

CE



*MEWA*

## Manual de operare si ingrijire

Editia 8 / 2022-10-25

**Caruciorul MEWA**

Un carucior modern si util



**Atenție! Utilizatorii cu dificultăți cognitive, dificultăți de citire sau probleme de vedere vor notifica producătorul pentru a primi următoarele informații în format potrivit nevoilor lor.**

#### **Scopul manualului.**

Manualul de operare și mentenanță conține informații de bază necesare pentru folosirea corectă a căruciorului : folosirea în siguranță, modul de asamblare, ajustările și pregătirile înainte de ajustare, îngrijirea și depozitarea produsului, condițiile de garanție etc.

Produsul este destinat persoanelor care au grija de copii cu dizabilități ( părinți, asistenți medicali, etc) care vor fi transportați cu ajutorul căruciorului.

Este destinat și pentru doctori dar și pentru specialiști în recuperare.

**ATENȚIE:** Citiți integral prezentul manual înainte de folosirea căruciorului !

Acest manual se va revinde odată cu căruciorul! Va fi păstrat pentru a putea fi verificat atunci când întâmpinați dificultăți de orice fel în folosirea căruciorului.

**ATENȚIE!** În cazul unor incidente legate de căruciorul nostru aveți obligația de a ne anunța imediat prin scris sau email.

---

Detaliile de contact ale producătorului :

- Adresa postală : MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Poland
- Numarul de telefon : +48 32 733 11 31
- Adresa de email : [mywam@mywam.pl](mailto:mywam@mywam.pl)

Versiunea manualului : **RO Edition:8 Date: 2022-10-25**



## .Cuprins

▪	Introducere.....	5
1.	Scopul căruciorului și indicațiile de utilizare.....	5
2.	Informații de bază despre caruciorul MEWA.....	5
3.	Inceput rapid:.....	6
▪	Siguranța.....	7
4.	Instrucțiuni importante și reguli de siguranță:.....	7
5.	5.1 Plăcuță de identificare.....	8
5.2	Plăcuță cu cod UDI.....	8
6.	Etichetele de avertizare.....	8
7.	Simboluri.....	8
▪	Produsul.....	9
8.	Asamblarea generală a căruciorului.....	9
9.	Configurarea și folosirea ramei de aluminiu.....	10
9.1	Mecanismul de pliere al ramei.....	10
9.2	Deschiderea ramei.....	10
9.3	Închiderea ramei.....	10
9.4	Roțile pivotante (se mișcă la 360 de grade). Blocarea direcției de mers a roților.....	11
9.5	Roțile din spate. Instalarea și deinstalarea lor.....	11
9.6	Sistemul de amortizare a roților din spate.....	12
9.7	Manerul ergonomic de împins caruciorul. Mecanismul de ajustare a manerului.....	12
9.8	Frâna centrală. Activarea și dezactivarea frânei.....	13
9.9	Picioarul pentru înclinarea caruciorului.....	13
9.10	Mânerul pentru transport.....	13
9.11	Suportul pentru picioare. Folosirea și ajustarea acestuia.....	13
10.	Asamblarea și dezasamblarea scaunului de pe rama de aluminiu.....	14
10.1.	Asamblarea și dezasamblarea scaunului de pe rama de aluminiu:.....	14
10.2	Scaun ajustabil, spatar cu funcție de înclinare.....	14
10.3	Spătarul ajustabil.....	15
11.	Echipament de bază.....	15
11.1	Hamul în 5 centuri.....	15
11.2	Bara de protecție.....	15
11.3	Baldachinul ajustabil cu fereastră.....	15
11.4.	Coșul pentru cumpărături.....	16
11.5	Centurile de stabilitate.....	16
11.6	Perna tip Wedge.....	17
11.7	Pernele pentru captuseala.....	17
11.8	Tapiseria.....	17
12.	Accesorii.....	18
12.1	Suportul pentru cap, ajustabil - ↔ and ⇕.....	18
12.2	Pad-urile ajustabile pentru piept și spate - ↔ and ⇕.....	18
12.3	Masa terapeutică.....	18
12.4	Kitul de micsoare a scaunului.....	19
12.5	Geanta pentru călătorie.....	19

12.6	Umbrela pentru soare .....	19
12.7	Manusile pentru iarna .....	19
12.8	Sacul de dormit pentru iarna .....	20
12.9	Plasa de tantari .....	20
12.10	Protectia de ploaie .....	20
13.	Specificatiile tehnice ale caruciorului MEWA .....	21
13.1	Compozitia materialului din care este produs caruciorul .....	21
14.	Livrare si unelte .....	21
15.	Asamblarea si dezasamblarea produsului .....	22
16.	Pregatiri pentru folosire .....	23
17.	Folosirea caruciorului .....	23
17.1	Transportul caruciorului .....	23
17.2	Punerea si scoaterea copilului in si din carucior. ....	23
17.3	Pozitia corecta in carucior. ....	23
17.4	Conducerea caruciorului .....	24
17.5	Conducusul caruciorului pe suprafete in panta. ....	24
17.6	Pragurile si curbele .....	24
17.7	Transportul caruciorului in masina sau in alte vehicule .....	24
17.8	Curatarea si ingrijirea .....	24
18.	DEPOZITAREA CARUCIORULUI .....	25
18.1	Prepararea caruciorului pt. o depozitare de lunga durata .....	25
18.2	Protectie impotriva coroziunii. ....	25
19.	Revanzarea caruciorului .....	25
20.	Service si inspectiile periodice .....	26
21.	Aruncarea caruciorului .....	26
22.	Actul de conformitate potrivit legilor europene privind dispozitivele medicale .....	26
23.	Notite .....	27
24.	Service-uri autorizate .....	28
25.	CARDUL DE GARANTIE .....	29

## ▪ Introducere

Va multumim ca ati ales caruciorul nostru special MEWA. Speram sa fie cauza multor momente speciale petrecute alaturi de copilul dvs. si ca va va fi folositor in fiecare zi. Facem eforturi mari in fiecare zi c produsele noastre sa fie conforme cu asteptarile dvs. Nu ezitati sa ne urmariti pe toate platformele noastre sociale sis a vizitati site-ul nostrum pentru mai multe informatii, dealtfel nu ezitati sa ne contactati pentru orice nelamurire legata de produsele noastre.

### 1. Scopul căruciorului si indicatiile de utilizare

"Mewa" este un carucior multifunctional destinat pentru copii cu dizabilitati. Caruciorul are o rama de aluminiu cu elemente de fier. Permite scoaterea fara dificultate a rotilor sau a suportului pentru cap. La caruciorul nostru se pot atasa o varietate de accesorii pentru a spori functionalitatea acestuia.: masa, centuri de siguranta, wedge, baldachin, plasa de tantari, sac de dormit, cos pentru cumparaturi, etc. Utilizatorii nu pot folosi caruciorul singuri ci doar ajutati de un parinte/adult/asistent medical etc. Caruciorul poate fi folosit atat inainttru cat si afara pe diferite suprafete: asfalt, beton, pamant, etc. cat si in diferite conditii meteo datorita multitudinii de accesorii atasabile. Alta folosire a caruciorului in afara de cele prezentate in manual este strict interzisa. Caruciorul trebuie folosit doar conform prezentului manual si doar de un adult. Conducerea caruciorului de catre copii, adolescent si/sau persoane neinstructite este stric interzisa. Caruciorul MEWA este un dispozitiv medical de clasa I menit sa fie folosit de copii cu dizabilitati care, datorita conditiei lor, nu pot merge sau sta "in fund" singuri. Produsul este util pentru transportul copiilor cu dizabilitati dar si pentru corectarea posturii acestora. Indicatii clinice: pentru copii care sufera de paralizie cerebrala, meningita, distrofie, paralizie, etc. Produsul este destinat pentru copii intre 3 si 10 ani. Inainte de folosirea caruciorului va sfatuim sa vorbiti cu un medic specialist sau un specialist in terpaie de recuperare.

**Contraindicatii:** În caz de contraindicație a poziției șezând și/sau poziționării verticale pasive, reglarea căruciorului trebuie consultată cu un kinetoterapeut sau cu medicul curant.


### 2. Informatii de baza despre caruciorul MEWA

Caruciorul MEWA are multe optiuni e.g.:

- Ajustarea spatarului (vezi 10.3)
- Ajustarea spatarului si a scaunului (vezi10.2)
- Ajustarea adancimii scaunului (vezi12.4)
- Ajustarea suportului pentru picioare (vezi9.11)
- Stabilizarea torso-ului (vezi 12.1 &12.2)
- Echipament optional (vezi 12)

### 3. Inceput rapid:

Pentru a incepe sa folosesti caruciorul, acesta trebuie despachetat si pregatit pentru folosire conform punctului 15 si a punctului 16. Mai jos aveti o scurta pictograma care nu va inlocui insa citirea cu atentie a intregului manual.

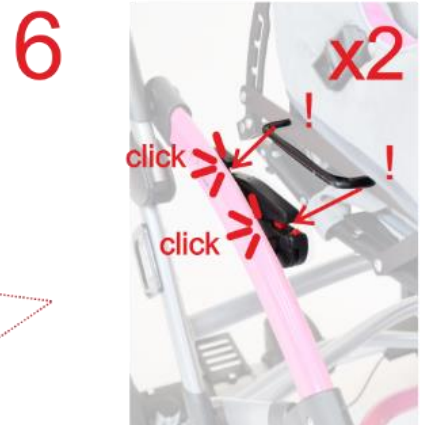

▪ **Siguranța**

**4. Instrucțiuni importante și reguli de siguranță:**

- Este interzisă folosirea necorespunzătoare a caruciorului!
- Produsul conține componente mici – PERICOL DE INGHITIRE !
- Caruciorul are o posibilitate de ajustare foarte mare – aveți grijă ca în timpul ajustărilor capul copilului să nu ajungă sub linia pelvisului acestuia – PERICOL DE SUFOCARE.
- ESTE INTERZISĂ folosirea de rucsacuri sau genti atarnate de spatarul – acest lucru poate duce la rasturnarea caruciorului și la ranirea copilului dvs. Dacă aveți nevoie de spațiu suplimentar de depozitare folosiți doar accesoriile originale compatibile cu caruciorul dvs.
- ATENTIE! În funcție de modificările și ajustările pe care le faceți caruciorului acesta își poate modifica dimensiunile!
- ATENTIE ! De fiecare dată, înainte de folosire, trebuie urmați toți pașii din prezentul manual și caruciorul trebuie verificat să nu aibă defectiuni care să pună în pericol siguranța dvs și a copilului dvs. Pentru orice nelămurire nu ezitați să ne contactați.
- ATENTIE! Atunci când treceți cu caruciorul printr-un spațiu care are uși, asigurați-vă că este destul spațiu în lateralele caruciorului.

---

**ATENTIE !!!**



- NU VA LASATI NICIODATA COPILUL NESUPRAVEGHEAT IN CARUCIOR.
- Nu este recomandat să conduceți acest produs în alergare sau când folosiți patine cu roțile!
- Produsul nu se va folosi ca scaun de masină.
- Nu carăți/ ridicați caruciorul în timp ce copilul dvs. se află în scaun.
- Caruciorul este împachetat într-o pungă de plastic. Punga de plastic nu este o jucărie și trebuie ținută departe de copii – PERICOL DE SUFOCARE!

---

**ATENTIE! Este interzisă folosirea caruciorului atunci când nu sunteți siguri că acesta este într-o condiție perfectă sau dacă suspectați că una din părțile componente ale caruciorului este defectă. Dacă aveți orice suspiciune legată de siguranța caruciorului vă sfătuim să nu îl folosiți și să ne contactați cât de repede posibil.**

### 5. 5.1 Plăcuță de identificare

- Plăcuța de indentificare conține: numele caruciorului, modelul, numarul de serie, greutate maxima admisa, data producerii, semnul CE, marca de dispozitiv medical și anumite attentionari. (vezi Fig. 5.1).
- Plăcuța este lipită pe rama căruciorului, în spate, lângă frâna centrală.

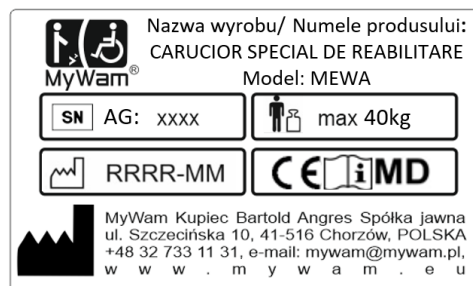


Fig 5.1

### 5.2 Plăcuță cu cod UDI

Plăcuța cu codul UDI include următoarele informații: numele, modelul, codul UDI, detaliile producătorului (vezi Fig. 5.2)



Fig. 5.2

### 6. Etichetele de avertizare

- Conțin avertizări care vizează utilizatorul
- Etichetele de avertizare sunt situate pe fiecare parte a ramei caruciorului. (vezi Fig. 6.1).

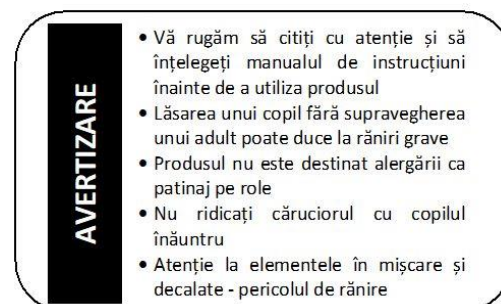


Fig. 6.1

### 7. Simboluri

Număr de serie	Numele producătorului
Greutate maxima admisă	Produsul este un dispozitiv medical
Data producerii	
Conformitate cu normele europene	Semnul folosit pentru a atrage atenția cititorului privind anumite pericole.
Avertizare – folosirea căruciorului conform prezentului manual de utilizare.	



▪ **Produsul**

**8. Asamblarea generală a căruciorului**

Căruciorul MEWA este alcătuit din două părți : rama de aluminiu și scaunul terapeutic.  
MEWA oferă o varietate de accesorii pentru diferitele nevoi pe care le puteți avea.

• **Echipamentul standard**

Rama căruciorului include :



1-	Badlachin ajustabil cu fereastră	- 11.3
2-	Maner ergonomic de impins caruciorul	- 9.7
3-	Centură în 5 puncte	- 11.1
4-	Mecanismul de ajustare al spatarului și al scaunului	- 10.2
5-	Siguranta de blocare pentru transport	- 9.2
6-	Suport pentru picioare ajustabil (conține și curele)	- 9.11
7-	Roțile din spate cu amortizoare	- 9.5
8-	Blocarea direcției roților din față	- 9.4
9-	Roți solide în față	- 9.4
10-	Bara de siguranță	- 11.2
11-	Pană/Abductor	- 11.6
12-	Tapiterie	- 17.8
13-	Frana centrală	- 9.8
14-	Picior de aplecare	- 9.9
15-	Sistemul de amortizare a roților din spate	- 9.6
16-	Pad-uri pentru laterale	- 11.7

• **Accesorii**

Căruciorul poate include :

- Masa de terapie - 12.3
- Centuri pentru stabilizare - 11.5
- Kit de micșorare a scaunului - 12.4
- Paduri ajustabile pentru piept și spate - 12.1&12.2
- Geantă pentru călătorie - 12.5
- Coș pentru cumpărături - 11.4
- Protecție de ploaie - 12.10
- Mănuși pentru iarnă - 12.7
- Sac de dormit pentru iarnă - 12.8
- Plasă pentru țânțari - 12.9
- Umbrelă de soare - 12.6



## 9. Configurarea si folosirea ramei de aluminiu

### 9.1 Mecanismul de pliere al ramei

Mecanismul de pliere al ramei căruciorului se află în interiorul ramei în două puncte pe partea dreapta și în trei puncte pe partea stângă.

- Plierea spre dreapta sau spre stânga: mecanismul care permite pliarea părții de sus a ramei – reducerea dimensiunii.
- Mecanismul de pliere cu siguranța pentru transport.



Fig 9.1

*Locurile de pliere/desfacere*

### 9.2 Deschiderea ramei.

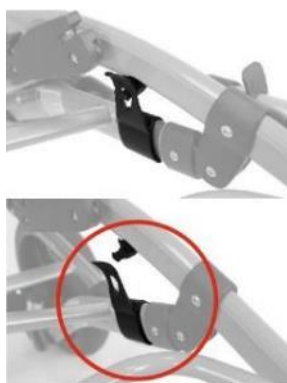


Fig. 9.2.1

*Încuietoare de transport*



Fig. 9.2.2

*Desfacerea cadrului*

Pentru a deschide rama căruciorului, poziționați căruciorul orizontal pe podea și desfaceți siguranța pentru transport.(fig. 9.2.1). Aduceți apoi spătarul în poziție dreaptă. (Fig. 9.2.2.) Pentru a seta căruciorul trageți ușor de maneta în sus în timp ce aduceți căruciorul în poziția dorită. Mecanismul ar trebui să facă un clic în momentul în care se va bloca. Clicul va asigura că dispozitivul este rabatat corect și este sigur pentru folosire.

### 9.3 Închiderea ramei

Pentru a închide rama căruciorului, apăsa pe butonul mic, roșu și trageți siguranța mecanismului ridicând-o în sus. Trageți de ambele mâner de rabatare în sus, în același timp până ce se activează mecanismul de rabatare. Pliati apoi rama în direcția roților din față. Aveți grijă ca mânerul de împingere și suportul pentru picioare nu se ating. Trageți apoi de mecanismul de pliere al spatarului. Atașați siguranța pentru transport.



Fig. 9.3.1

*Buton rosu*



Fig. 9.3.2

*Mecanism rabatabil al cadrului*

#### 9.4 Roțile pivotante (se mișcă la 360 de grade). Blocarea direcției de mers a roților.

Roțile durabile ale căruciorului asigură cele mai bune experiențe pentru dvs. cât și pentru copilul dvs. Anvelopele sunt fără cameră, pline cu un gel care ajută la absorbirea șocurilor. Roțile sunt făcute din fabrică să se potrivească cu furcile pentru roți dar și cu axele pentru roți ale căruciorului.

Ambele roți din față pot fi blocate să meargă doar drept sau pot fi setate să se învârtă la 360 de grade, ceea ce face manevrarea căruciorului mult mai ușoară. Datorită siguranței care se poate activa sau dezactiva căruciorul este mult mai adaptabil la diferite tipuri de activități. Este recomandat să îndepărtați siguranța și să lăsați roțile să se învârtă atunci când folosiți căruciorul pe o suprafață plană (în magazine, școala, acasă, etc).

- **Asamblarea.** Pentru a atașa roțile inserați axa roții în spațiul special destinat până auziți un clic.



Fig 9.4.1  
Buton de eliberare rapidă

Clicul este semnul că instalarea a fost făcută corect. Pentru demontarea roților din față apăsați pe butonul de deasupra roților și scoateți axa roților din spațiul special destinat. (Fig. 9.4.1)

- **Blocarea direcției.** În caz de suprafețe denivelate, alunecoase și/sau curbe este recomandat să instalați siguranța și să blocați direcția roților. Pentru blocare rotiți butonul în stânga. (Fig.9.4.2) Pentru deblocare rotiți de buton în dreapta.



Fig 9.4.2  
Buton de blocare a direcției

#### 9.5 Roțile din spate. Instalarea și

##### dezinstalarea lor.

Rotile durabile și rezistente asigură confortul folosirii căruciorului nostru. Rotile sunt fără cameră, umplute cu un gel special care are rolul absorbirii șocurilor. Datorită posibilității de a scoate roțile, căruciorul devine mic și practic după rabatare și facilitează transportarea și depozitarea.

Mecanismul de asamblare este situat în spatele roților din spate și asigură asamblarea și dezasamblarea rapidă a roților. Apăsăm pe clama mecanismului de asamblare spre centrul rotii, după care roata se poate atașa sau se poate scoate cu ușurință.

- **Asamblarea.** Când instalați roțile din spate pe axa lor, apăsați pe clema mecanismului spre centrul rotii și puneți roata la începutul axei. Apoi opriți-va din a apăsa pe clema și glisați roata până auziți un clic
- **Dezmembrarea:** Pentru a scoate roțile apăsați pe clema și glisați roata din axa ei Fig 9.5.2.

Fig 9.5.1  
Cataramă cu montare rapidă



### 9.6 Sistemul de amortizare a rotilor din spate

Caruciorul este prevazut cu un sistem de amortizare pe arcuri a ramei si a rotilor din spate. Aceasta functioneaza automat. Ajustarea se face prin activarea levierului de sub amortizor. Pentru a facilita schimbarea setarilor este permisa punerea presiunii pe arcul amortizor. Atunci cand levierul este mutat arcul de amortizare se va strange (potrivit pentru sol tare), sau se va extinde (potrivit pentru sol moale)

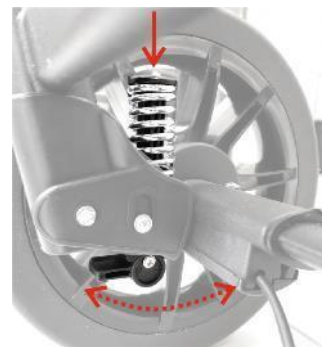


Fig 9.6

*Sistemul de amortizare*

### 9.7 Manerul ergonomic de impins caruciorul. Mecanismul de ajustare a manerului.

Manerul este folosit pentru a impinge caruciorul, asigurand o prindere ferma pentru orice fel de conditii. Este prevazut cu un sistem de reglare in functie de inaltimea celui care conduce caruciorul. Fig. 9.7

- **Mecanismul de ajustare.** Cele doua butoane localizate in afara ramei, la imbinarile manerului.
- **Unghiul de ajustare al manerului.** Pentru a schimba unghiul de inclinare al manerului, apasati simultan pe ambele butoane ale mecanismului si schimbati unghiul. Dupa ce asezati manerul in pozitia dorita opriti-va din a apasa pe butoane. Acest lucru va face ca manerul sa se blocheze in pozitia dorita.



Fig 9.7

*Ajustarea manerului de impingere*

### 9.8 Frâna centrală. Activarea si dezactivarea frânei.

Pedala pentru frana centrala se afla pe mijlocul barii transversal din spate. Aceasta pedala blocheaza complet rotile din spate. (Fig. 9.8),

- **Oprirea si pornirea franei**

Pentru a active frana apasati pe pedala spre sol, pana auziti un clic. Pentru a dezactiva frana ridicati de pedala in sus.



Fig 9.8  
*Frână centrală*

### 9.9 Picioarul pentru inclinarea caruciorului

Picioarul pentru inclinarea caruciorului se afla pe partea dreapta a barei transversale, in spatele ramei. Pentru a il folosi apasati pe piciorul de inclinare in timp va folositi de maner ca sa impingeti caruciorul – acest lucru va face ca partea din fata a caruciorului sa se ridice cu tot cu rotile. (Fig. 9.9) Folosirea piciorului de inclinare face usoara trecerea pragurilor.



Fig 9.9  
*Support picior inclinare*

### 9.10 Mânerul pentru transport

Manerul pentru transport este localizat deasupra coșului de cumpărături. Fig. 9.10



Fig 9.10  
*Mâner de transport*

### 9.11 Suportul pentru picioare. Folosirea si ajustarea acestuia.

Suportul pentru picioare ajustabil face parte din dotarea standard a caruciorului MEWA



Fig 9.11  
*Ajustarea suportului pentru picioare*

- Pentru a ajusta inaltimea suportului pentru picioare, desurubati butoanele care securizeaza suportul la rama caruciorului, apoi ajustati suportul la inaltimea dorita si insurubati butoanele inapoi.
- Pentru a ajusta unghiul de inclinare al suportului pentru picioare apasati pe butoanele marcate in poza, ajusteaza suportul si oprti-va din a apasa pe butoane.
- Folosirea suportului pentru picioare. Este recomandat sa ajustati inaltimea suportului pentru picioare la o inaltime care va permite picioarelor copilului dvs. sa stea comod pe intreaga suprafata a suportului in timp ce coapsele copilului sa stea paralele cu suprafata scaunului. Suportul pentru picioare este prevazut cu century a caror folosire este recomandata in timpul mersului.

## 10. Asamblarea si dezasamblarea scaunului de pe rama de aluminiu

### 10.1. Asamblarea si dezasamblarea scaunului de pe rama de aluminiu:

Cele doua cârlige atașate la scaun sunt un element foarte important. Ele sunt gândite să atașeze scaunul la rama de aluminiu. Folosirea conformă a celor două cârlige este esențială pentru siguranța utilizatorului. Înainte de atașarea scaunului fiți siguri că pe suprafața ramei nu există niciun fel de urmă de uzură. Verificați dacă funcționează corespunzător. Nu este permisă folosirea căruciorului dacă aveți orice îndoială legată de siguranța componentelor acestuia.



Zdj 10.1.11

Montarea scaunului la rama



Zdj 10.1.2

butonul de desprindere

- **Asamblarea scaunului.** Scaunul poate fi poziționat cu fata sau cu spatele la cel care conduce căruciorul. Pentru a il instala, plasati scaunul pe cârligele de atașare și apăsați până auziți un clic. Fig 10.1.1.
- **Dezmembrarea scaunului.** Pentru a

dezasambla căruciorul apăsați pe cele două butoane colorate din partea de jos a cârligelor. Scoateți scaunul. Fig 10.1.2.

### 10.2 Scaun ajustabil, spatar cu funcție de înclinare

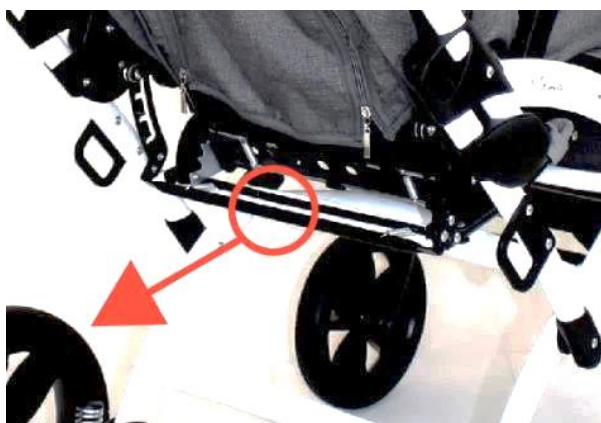


Fig 10.2

Scaunul ajustabil

Căruciorul are un scaun care poate fi ajustat în 4 poziții diferite, inclusiv într-o poziție de "pătuț". Pentru a schimba poziția, trage de mânerul din fier din spatele scaunului și mișca ușor până ajungi la poziția dorită. Odata ajuns la poziția dorită dai drumul mânerului.

**ATENȚIE!** Fiecare schimbare de poziție alterează centrul de greutate și afectează stabilitatea căruciorului.

**ATENȚIE!** Nu lăsați niciodată copilul în cărucior în timp ce faceți ajustările necesare.

### 10.3 Spătarul ajustabil

Spătarul căruciorului poate fi ajustat în numeroase poziții – verticală, orizontală. Pentru a schimba poziția spatarului aduceți inițial spatarul în poziție verticală. Trageți apoi de maneta aflată în spatele spatarului și modificați până ajungeți la poziția dorită. După ce ajungeți la poziția dorită trageți de maneta în jos.

**Atentie! Orice modificare a poziției spatarului înseamnă o modificare a centurii în 5 puncte.**

**Atentie! Nu lăsați niciodată copilul în carucior în timp ce executați ajustările necesare !**

**ATENȚIE ! În timpul ajustărilor frana nu trebuie apăsata.**

## 11. Echipament de baza

### 11.1 Hamul în 5 centuri



Fig 11.1.

*Centuri în cinci puncte*

Căruciorul MEWA este prevăzut cu un ham în 5 centuri (dotările standard)

- Ajustarea hamului în 5 centuri. Ajustați hamul pe mărimea copilului dvs. înainte de a îl atășa la scaun. Ajustați lungimea centurilor.
- Folosire. Pentru a asigura copilul în ham puneți centurile pe dreapta și pe stânga copilului și asigurați-le în catarama atașată de scaun. Pentru a scoate copilul din ham, apăsați butonul de pe cataramă și scoateți centurile.

**ATENȚIE:** La orice modificare a poziției scaunului va fi nevoie să modificați lungimea centurilor.

### 11.2 Bara de protecție

**Căruciorul MEWA poate fi echipat cu o bară de protecție care împiedică utilizatorul**



Fig 11.2

*Barieră de siguranță*

**căruciorului să cada “spre față”**

- Bara de protecție se montează folosind același mecanism de montare a mesei, deci nu veți putea folosi aceste două accesorii concomitent. Pentru a fixa bara de protecție, folosiți-vă de tuburile de fixare și glisați până auziți un clic. Clicul este indiciul dvs. că bara este bine atașată la scaun. Pentru a scoate bara de protecție, defaceți ambele siguranțe și trageți de bara în același timp.

### 11.3 Baldachinul ajustabil cu fereastră

Căruciorul MEWA este prevăzut cu un baldachin ajustabil cu fereastră care ajută la protejarea copilului dvs. de soare sau ploaie. Elementele din care este format baldachinul sunt: rama baldachinului, mecanismul de ajustare al baldachinului, două siguranțe cu butoane roșii care ajută la atașarea baldachinului la rama caruciorului, tapiseria baldachinului și o plasă de tantari cu fermoar.



Fig 11.3

*Copertina ajustabilă*

- **Asamblarea.** Sistemul de prindere ale baldachinului este constituit din doua bucati de plastic aflate pe partea exteriora spatarului, in partea de sus. Aceste bucati din plastic vor fi folosite ca sa atasam baldachinul.

Pentru instalare, ridicati spatarul in pozitie orizontala si glisati in paralel inchizatoarele baldachinului in spatiile special concepute de pe spatarul scaunului. Montati baldachinul astfel incat tapiseria acestuia sa se suprapuna cu spatele caruciorului.

- **Dezasamblarea baldachinului.** Pentru a dezasambla baldachinul apasa pe cele doua butoane rosii care asigura sistemul de prindere si glisati bucatile din plastic din suporturile special concepute de pe spatarul scaunului.

- **Folosirea baldachinului.** Pentru a ajusta marimea baldachinului, tineti arcul din spate al acestuia si arcul din fata si aropiati-le sau departati-le pentru a ajunge la forma dorita. Un lucru special pe care il are baldachinul nostru este fereastra, special conceputa pentru aerisire.

- Aceasta fereastra se inchide si se deschide cu ajutorul unui fermoar si este prevazuta cu o plasa de tantari.

#### 11.4. Coșul pentru cumparaturi.

Caruciorul MEWA poate fi prevazut cu un cos pentru cumparaturi – acesta va va fi de ajutor pentru transportarea lucrurilor mici. Nu transportati in cos lucruri care pot fi deteriorate de apa sau care se pot sparge/rupe, etc.

Este montat sub scaunul caruciorului. Acesta se va monta prin infasurarea lui de rama caruciorului si va fi securizat cu un fermoar. Greutatea maxima admisa este de 3 kg.



Fig 11.4  
Coș de cumpărături

#### 11.5 Centurile de stabilitate



Fig 11.5  
Centurile de stabilizare

Aceste centuri sunt folosite pentru o stabilitate pelvina mai buna si previn alunecarea din carucior a copilului dvs. Modul corect de a le folosi este acela de a ne asigura ca zona pelvina a copilului dvs, este cat mai aproape de spatarul scaunului. Acestea vor asigura o pozitie mai sanatoasa a copilului dvs. in carucior.

- **Ajustarea.** Pentru ajustare vom folosi dispozitivele de reglare. Le vom muta in sus sau in jos in functie de lungimea pe care ne-o dorim.

- \* **Folosire.** Pentru a putea folosi centurile, instalati copilul in scaun in infasurati centurile in jurul picioarelor copilului dvs. Asigurati apoi

centurile in catarama din fata.



### 11.6 Perna tip Wedge

Caruciorul MEWA poate fi prevazut cu o perna tip Wedge (o perna tare) care poate fi montata intre picioarele copilului dvs. pentru a preveni inclinarea spre stanga sau spre dreapta a acestora. Wedge-ul poate fi ajustat in 2 pozitii. Fig.11.6



Fig 11.6  
*Pană/Abductor*



Fig 11.7  
*Tampoane de  
căptușeală*

### 11.7 Pernele pentru captuseala.

Caruciorul MEWA este prevazut cu perne pentru captuseala securizand materialul de VELCRO de pe spatarul scaunului atunci cand nu mai este instalat niciun alt echipament suplimentar. Fig 11.7.

### 11.8 Tapiseria

Caruciorul MEWA este prevazut cu tapiseria care este total detasabila pentru a putea fi curatata mai usor. Pentru a scoate tapiseria desfaceti sigurantele cu care este atasata la rama caruciorului. Metodele de curatare recomandate le veti gasi la capitolul 18.

## 12. Accesorii

### 12.1 Suportul pentru cap, ajustabil - ↔ and ⇅

Pentru a ajusta suportul pentru cap, dati la o parte tapiseria din fata si din spatele scaunului. Apoi indepartati butoanele suportului pentru cap care sunt situate in spatele scaunului. Ajustati suportul pentru cap. Cand ajungeti la pozitia dorita insurubati la loc butoanele in golurile special destinate. La final trageți inapoi tapiseria.

### 12.2 Pad-urile ajustabile pentru piept si spate - ↔ and ⇅

Pentru a ajusta pad-urile(pernele) pentru piept si spate indepartati intai tapiseria din fata si din spatele scaunului. (Fig 12.2.2/1). In continuare scoateti suruburile care se afla pe partea din spate a scaunului. (Fig 12.2.3) si ajustatii pad-urile pentru piept si spate in fata scaunului. Dupa ce ati ajustat pad-urile insurubati inapoi suruburile in locurile special destinate din spatele scaunului si trageți tapiseria inapoi. (Fig 12.2.4)



Fig 12.2.1

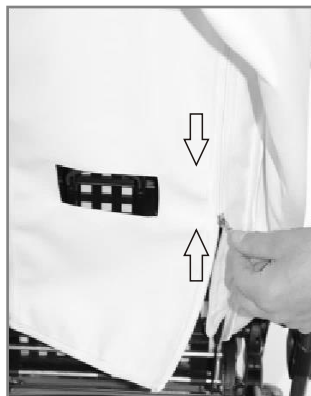


Fig 12.2.2

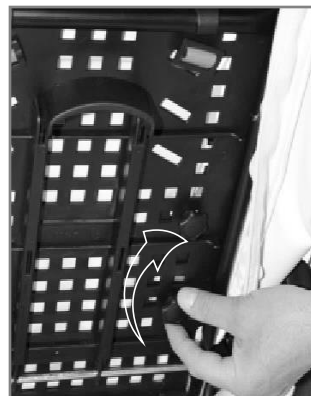


Fig 12.2.3



Fig 12.2.4

*Defaceti tapiseria / desfaceti butoanele / prindeti din nou tapiseria la locul ei*

### 12.3 Masa terapeutica



Fig 12.3

Masa terapeutica

Caruciorul MEWA poate fi prevazut cu o masa terapeutica cu o greutate maxima admisa de 3 kg.

Masa se monteaza cu acelasi sistem cu care se monteaza si bara de protectie, deci nu pot fi folosite concomitent.

Glisati masa pe tuburile de fixare pana auziti un clic. Atasati apoi tuburile de rama caruciorului. Asteptati sa auziti din nou un clic. Pentru a dezambla masa, deschideti ambele inchizatori si trageți de masa pentru a o scoate.

#### 12.4 Kitul de micsoare a scaunului.

Caruciorul MEWA este echipat cu un kit de micsoare al scaunului care contine 5 insertii. (Fig. 12.4). Acestea sunt folosite pentru a micsoara dimensiunile scaunului. Tapiseria kitului este detasabila datorita fermoarului.

- Asamblarea. Insertiile se instaleaza oriunde pe scaunul caruciorului, la orice inaltime, adaptandu-le la nevoile utilizatorului. Instalarea se face cu un material VELCRO de partea de jos a scaunului, de spatele scaunului si de lateralele scaunului.
- Dezasamblarea se face prin desfacerea kitului de pe tapiseria scaunului.



Fig 12.4

*Kitul de micsoare*

#### 12.5 Geanta pentru calatorie

Geanta de calatorie este montata pe cele doua manere dinauntru manerului de impingere a caruciorului. (Fig. 12.5). Incarcatura maxima a gentii este de 2 kg.

#### 12.6 Umbrela pentru soare

Caruciorul poate fi prevazut cu o umbrela care are rolul de a va preja copilul atunci cand soarele devine mult prea puternic. (see Fig. 12.6)

#### 12.7 Manusile pentru iarna

Cele doua manusi de iarna sunt prevazute pentru cel care impinge si conduce caruciorul. Acestea ajuta conducatorul sa impinga caruciorul chiar si in conditii termice neplacute, temperaturi scazute. Prima oara se ataseaza bucatile de material si sa le asigurate cu arici pe bara manerului de impingere al caruciorului. (Fig.12.7). Dupa aceea manusile se pun pe partile atasate la maner si se securizeaza cu inchizatoarele speciale.



Fig 12.5

*Geanta de calatorie*



Fig 12.6

*Umbrela de soare*



Fig 12.7

*Manusile de iarna*

### 12.8 Sacul de dormit pentru iarna

Caruciorul poate fi prevazut cu un sac de dormit pentru iarna care asigura confortul copilului dvs. Chiar si in zilele racoroase de iarna. (Fig. 12.8) Pentru acest echipament optional aveti nevoie de un alt echipament optional pentru a il atasa la carucior si anume de bara de siguranta. Pentru a monta sacul pentru iarna, bagati sacul peste suportul pentru picioare de dedesubt si treceti-l peste bara de protectie de deasupra. Asigurati-l cu capse de rama caruciorului

### 12.9 Plasa de tantari

Caruciorul MEWA poate fi prevazut cu o plasa pentru tantari. Acest accesoriu additional trebuie sa fie ajustat in functie de celalalte echipamente. Pentru a monta plasa de tantari, asezati-o de deasupra, peste baldachinul ajustabil si apoi acoperiti scaunului si suportul pentru picioare.

### 12.10 Protectia de ploaie

Caruciorul MEWA poate fi prevazut cu o protectie de ploaie suplimentara care va ofera avantajul de a folosi caruciorul in orice conditie meteo. Acest echipament optional se monteaza pe un alt echipament optional. Pentru montarea protectiei, asezati-o peste baldachinul ajustabil si acoperiti apoi scaunul si suportul pentru picioare. (see Fig. 12.10).



Fig 12.8  
*Sacul de dormit pt. iarna*



Fig 12.9  
*plasa de tantari*



Fig 12.10  
*Protectia pt. ploaie*

### 13. Specificatiile tehnice ale caruciorului MEWA

Lungimea caruciorului	94 - 126 cm
Latimea caruciorului	65 cm
Inaltimea caruciorului	124 – 129 cm
Greutate totala	20 – 28 kg
Adancimea scaunului	24*/28 cm
Latimea scaunului	25*-32 cm
Inaltimea spatariului	62 cm
Latimea spatariului	20**/30 cm
Distanta dintre suportul pt picioare si spatar / numarul de ajustari	17-32cm / 5 pozitii
Lungimea caruciorului pliat	Cadru 84 cm /Scaun 88 cm
Latimea caruciorului pliat	Cadru 64 cm /Scaun 43 cm
Inaltimea caruciorului pliat	Cadru 26 cm /Scaun 42 cm
Capacitatea cosului de cumparaturi	3 kg
Capacitatea gentii pentru calatorie	2 kg
Greutatea maxima admisa a caruciorului	40 kg
Inaltimea utilizatorului	90-125 cm
Unghiurile scaunului / numarul de ajustari	5,5°-21,5° / 4 pozitii
Unghiurile spatariului/ numarul de ajustari	8°-86° / 4 pozitii + orizontal
Unghiurile sup. pt picioare/ numarul de ajustari	64°-180° / 5 pozitii

#### COMENTARII

**\*) VALORILE MARCATE ASTFEL**

**TOLERANTA VALORILOR MARCATE ASTFEL +/- 20mm, +/- 1.5kg, +/- 1 °**

**PRODUCATORUL ISI REZERVA DREPTUL DE A FACE MODIFICARI PRIVIND PARAMETRII TEHNICI**

#### 13.1 Compozitia materialului din care este produs caruciorul

Fier pudrat si aluminiu, materiale 100% polyester si plastic (PP, PCV, ABS, PA, PE, PU).

#### 14. Livrare si unelte

Caruciorul este livrat intr-o cutie de carton si este pre-asamblat. Cutia ar trebui sa contina :

- Rama pliata cu scaun, spatar si roti
- Echipamentul optional pe care l-ati comandat
- Manualul de utilizare si cardul de garantie

Inainte de folosire asigurati-va ca pachetul contine tot ce ati comandat si ca niciuna dintre piese nu a fost stricata/sparta in timpul transportului. In cazul in care una dintre parti lipseste sau este stricata contactati vanzatorul si/sau producatorul pentru a putea primi elementul lipsa sau inlocui elementul stricat.

Datorita multifunctionalitatii si echipamentului suplimentar care poate fi atasat la caruciorul dvs. acesta poate fi personalizat pentru a se adapta cat mai bine nevoilor dvs. Pentru a face asta cititi integral prezentul manual.

Nu aveti nevoie de unelte pentru a asambla sau dezambla caruciorul.

Veti avea nevoie de o surubelnita Philips necesara pentru ajustarea suportului pentru picioare. O cheie Allen este necesara pentru ajustarea inaltimii spatarului si a adancimii scaunului.

### 15. Asamblarea si dezamblarea produsului.

- **Asamblarea caruciorului.** In pachetul pe care il veti primi caruciorul este deja pre-asamblat. Duceti pana la capat asamblarea urmarind pasii :
  - a) Montati rotile din spate pe axa special destinata
  - b) Desfaceti rama caruciorului si suportul pentru picioare:
    - Activati si dezactivati siguranta pentru rotile din fata
    - Ajustati inaltimea si unghiul manerului pentru impingerea caruciorului
    - Ajustati unghiul de inclinare al scaunului
    - Ajustati unghiul de inclinare al spatarului
    - Ajustati lungimea hamului cu 5 centuri
    - Ajustati unghiul de inclinare al suportului pentru picioare si inaltimea acestuia
  - c) Instalati accesoriile recomandate
    - Ajustati marimea scaunului (kittul de microrare al scaunului)
    - Instalati bara de protectie sau masa terapeutica
    - Ajustati centurile de siguranta
    - Ajustati baldachinul cu fereastră
    - Instalati si ajustati wedge-ul
    - Atasati geanta pentru calatorie
    - Atasati cosul pentru cumpataturi
    - Instalati accesoriile pentru diferite anotimpuri ( sacul de dormit, manusile pentru iarna, plasa de tantari, etc)
  - d) **Dezmembrarea caruciorului.**
    - Scoateti toate echipamentele optionale
    - Desfaceti scaunul de pe rama de aluminiu
    - Blocati rotile din fata, plati suportul pentru picioare si rama de aluminiu
    - Desfaceti rotile din fata si din spate
    - Pliati scaunulu si blocati siguranta de transport

## 16. Pregatiri pentru folosire

### Inainte de folosirea caruciorului:

- Verificati ca toate componentele caruciorului sa fie in perfecta stare de functionare. In caz de piese defecte contactati producatorul si/sau vanzatorul.
- Verificati ca rama caruciorului sa fie pliata conform instructiunilor si ca este blocata cu siguranta pentru transport.
- Verificati ca scaunul sa fie corect atasat la rama de aluminiu
- Verificati ca toate rotile sa fie instalate corect si ca toate anvelopele sunt in perfecta stare de functionare.
- Verificati ca frana centrala sa fie apasata si ca aceasta functioneaza corect.
- Faceti corect toate ajustarile conform nevoilor copilului dvs.
- Verificati ca tapiseria sa fie complet uscata.
- Securizati copilul ajutandu-va de toate elementele stabilizatoare ale caruciorului.
- Asigurati-va ca utilizatorul este imbracat cu haine care acopera punctele corpului care iau contact cu centurile si restul de elemente stabilizatoare.
- In cazul in care copilul dvs, are probleme cu incontinenta urinara, o musama suplimentara trebuie pusa pe scaunul caruciorului. Aceasta musama poate fi cumparata din orice farmacie.
- In cazul folosirii altor dispozitive medicale (tuburi, catetere) aveti grija ca acestea sa fie corect pozitionate si protejate.

## 17. Folosirea caruciorului

### 17.1 Transportul caruciorului

Cel mai bun mod de a transporta caruciorul este sa va folositi de roti. In cazurile unde acest lucru nu este posibil din motive de siguranta, caruciorul poate fi ridicat dupa ce toate echipamentele suplimentare au fost scoase. (inclusiv rotile, pentru a fi mai usor de carat). Atunci cand ridicati si transportati apucati caruciorul de partile fixe ale ramei. Din motive de siguranta nu incercati sa ridicati caruciorul atunci cand echipamentul suplimentar si rotile sunt atasate. Nu ridicati caruciorul de bara de siguranta, de masa de terapie sau de orice alt echipament suplimentar atasat.

### 17.2 Punerea si scoaterea copilului in si din carucior.

Atunci cand puneti copilul in carucior aduceti copilul cat mai aproape de o suprafata sigura. Dupa ce va asigurati ca frana este apasata si suportul pentru picioare este ridicat, puneti copilul in carucior.

**Nu va sprijiniti de suportul pentru picioare, acest lucru poate rasturna caruciorul si poate provoca ranirea dvs. sau a copilului dvs. Atunci cand scoateti copilul din carucior asigurati-va ca acesta nu se sprijina de suportul pentru picioare – acest lucru poate duce la rasturnarea caruciorului, provocand ranirea dvs. si a copilului dvs.**

### 17.3 Pozitia corecta in carucior.

Din motive de sanatate si siguranta, este recomandat ca zona pelvina si spatele copilului dvs. sa fie cat mai aproape de spatar).

Coapsele utilizatorului trebuie sustinute de scaun in toata lungimea lor (ajustarea adancimii scaunului) si picioarele trebuie sustinute de suportul pentru picioare. (veti impiedica alunecarea copilului dvs, din

carucior). O pozitie corecta a picioarelor este esentiala in vederea mentinerii unui tonus muscular bun in membrele inferioare ale corpului.

**Datorita optiunilor mari de ajustare a scaunului si a spatelui este posibila ajustarea pana ce capul copilului dvs sa fie sub zona pelvina. Aceasta pozitie este strict interzisa deoarece poate duce la sufocarea copilului dvs.**

#### **17.4 Conducerea caruciorului**

Atunci cand folosim caruciorul vom tine intotdeauna mainile pe manerul de impins. Dati drumul la frana centrala si impingeti caruciorul intr-o directie sigura.

#### **17.5 Conducerea caruciorului pe suprafete in panta.**

Pozitionati intotdeauna inainte atunci cand conduceti pe suprafete in panta. Conducatorul trebuie sa aiba destula forta sa impinga si sa controleze caruciorul. Urcati cat de usor posibil.

**Trebuie sa aveti intotdeauna in vedere faptul ca centrul de greutate al caruciorului se schimba in astfel de situatii. Atunci cand folositi rampe, verificati intotdeauna inainte de a urca cu caruciorul pe ea. Atunci cand urcati pe o rampa asigurati-va ca rotile sunt destul de inalte pentru a o urca. Asigurati-va ca nu atingeti cu rama caruciorului lateralele pantei pe care doriti sa o urcati. In aceste situatii cel mai indicat este sa mai fie inca un adult present in afara de cel care conduce caruciorul.**

#### **17.6 Pragurile si curbele**

Atunci cand trecem caruciorul peste obstacole mici, blocati piciorul de inclinare si apasati usor pe manerul de impingere pentru a ridica rotile din fata ale caruciorului. Treceti cu atentie rotile caruciorului peste obstacol. Ridicati apoi de manerul de impingere in sus pentru a ridica si rotile din spate. Treceti usor cu rotile peste obstacol.

#### **17.7 Transportul caruciorului in masina sau in alte vehicule**

Pentru a transporta caruciorul in masina, scoateti toate accesoriile si depozitati-le intr-un loc sigur. Dezmembrati apoi caruciorul, pliat-l si depozitati-l in portbagajul masinii.

Daca caruciorul demontat nu este depozitat in portbagaj departe de orice persoana din masina, atunci acesta trebuie securizat foarte bine de suprafata din masina pe care il depozitati. Pentru a securiza caruciorul va puteti folosi de centurile de siguranta ale masinii. Pentru a transporta caruciorul in alt tip de vehicule : trenuri, autobuze, barci, avioane, etc. va rugam sa va informati inainte privind securitatea transportarii caruciorului. Pentru a transporta caruciorul folosindu-va de orice alt mijloc de transport, indepartati toate accesoriile si depozitati-le in siguranta in bagajul dvs.

**Caruciorul nu va fi folosit ca si scaun de masina!**

#### **17.8 Curatarea si ingrijirea**

Tapiseria caruciorului trebuie spalata de mana (temperatura apei – 30 de grade). Nu este permisa spalarea tapiseriei in masina de spalat. Toate petele trebuie curatate cat de repede se poate.

Atentie! Nu curatati tapiseria cu solutii care contin chimicale, solvent sau decoloranti. Producatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice tip de deteriorare a caruciorului cauzata de folosirea de solutii



neaprobate.

Nu insistati asupra petelor – acest lucru poate distruge tesatura

Asigurati-va intotdeauna ca tapiseria este uscata integral inainte de folosire.



Spalare de mana



Fara inalbitori



Nu uscati la masina



Uscati intr-o  
pozitie orizonatala



Nu folositi fierul  
de calcat

In caz de pete de mancare, bautura, ulei:

- Uscati pata folosindu-va de servetele de hartie

- pentru a nu mari pata, inmuati o bucata de material in detergent si apa calduta si apasati pe pata.

Clatiti orice urma de detergent. Uscati bine.

In functie de marimea petei procedura de mai sus va trebui sau nu repetata.

Continuati procedura pana ce pata dispare.

De fiecare data cand adaugati detergent clatiti usor pana nu mai exista nicio urma de solutie.

## 18. DEPOZITAREA CARUCIORULUI

Depozitati caruciorul intr-un loc curat, uscar si ventilat la o temperature intre 0 si 35 de grade.

### 18.1 Pregatirea caruciorului pt. o depozitare de lunga durata

Verificati ca toate componentele sa fie in stare perfecta de functionare si apoi depozitati caruciorul intr-un loc uscat, curat si bine aerisit (ventilat).

### 18.2 Protectie impotriva coroziunii.

Pentru a evita coroziunea ramei de aluminiu caruciorul nu trebuie depozitat intr-un loc umed.

Atunci cand rama se uda aveti grija sa o stergeti si sa o uscati inainte de depozitare.

Stergeti partea de aluminiu cu o carpa uscata, imbibata intr-un ulei de protectie usor.

Curatarea si ungerea regulata a ramei de aluminiu cu lubrifianti de protectie asigura o viata mai lunga caruciorului dvs.

## 19. Revanzarea caruciorului.

Acest produs se poate revinde.

Produsul bine ingrijit are o perioada de viata de 3 ani.

Pentru revanzarea produsului parcurgeti urmatoorii pasi:

- Inlocuiti tapiseria cu una noua.
- Rama caruciorului trebuie curatata si dezinfectata.
- Produsul trebuie verificat de un service autorizat inainte de a il revinde.
- Toate partile componente care prezinta urme de uzura trebuie inlocuite cu componente noi.
- Doar produsele care trec prin pasii de mai sus pot fi revandute.

## 20. Service si inspectiile periodice

Pentru folosirea in siguranta a produsului acesta trebuie verificat periodic.

Pentru situatiile in care persoana care a cumparat caruciorul nu poate intreprinde aceste activitati singur, caruciorul ar trebui trimis la service-urile autorizate sau la producator, contracost.

Toate reparatiile se vor face in service-uri autorizate sau direct la producator.

Se vor folosi doar accesoriile originale ale caruciorului.

### Inspectiile ar trebui facute:

- **De fiecare data inainte de folosire**
  - Verificati frana centrala – de fiecare data cand este activate rotile din spate ar trebui sa se blocheze.
  - Verificati ca toate accesoriile suplimentare sa fie corect atasate, fiti atenti in special la : sistemul de atasare al scaunului la rama de aluminiu, functionarea corecta a hamului, la mecanismul de blocare al inclinarii, la atasarea corecta a suportului pentru picioare.
  - Verificati conditia anvelopelor.
  - Verificati conditia partilor fixe ale ramei, scaunului, spatarului si a suportului pentru picioare.
- **O data pe luna**
  - Curatati caruciorul. Curatati toate componentele cu o carpa moale si ungeti cu un ulei de protectie partea din fier si din aluminiu a caruciorului.
  - Verificati toate sisteme de atasare si cataramele. Toate butoanele si suruburile.
- **O data la sase luni**
  - Verificati cat de curate este tapiseria si inspectati conditia generala a caruciorului.

## 21. Aruncarea caruciorului.

Aruncarea si reciclarea: caruciorul folosit trebuie dus la un centru de reciclare in conformitate cu legile din zona in care locuiti.

## 22. Actul de conformitate potrivit legilor europene privind dispozitivele medicale

Dispozitiv medical clasa I în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2017/745 din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale.

Producătorul a emis o declarație de conformitate corespunzătoare pentru produs, care este disponibilă pe [www.mywam.eu](http://www.mywam.eu).

## 23. Notite

**24. Service-uri autorizate**

POLAND

MyWam Kupiec, Bartold, Angres sp. j.

ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, PL

tel: +48 32 733 11 31

[www.mywam.eu](http://www.mywam.eu)

[mywam@mywam.pl](mailto:mywam@mywam.pl)

## 25. CARDUL DE GARANTIE

Serie si numar .....

Data achizitionarii: ..... - ..... - .....

Stampila si semnatura vanzatorului

### Conditii de garantie :

- Producatorul asigura cumparatorului o garantie de 24 de luni de la cumpararea caruciorului. Orice neplacere survenita in aceasta perioada va fi rezolvata gratis.
- Cumparatorul care are probleme cu caruciorul lui va trimite caruciorul bine ambalat spre reparare la vanzator sau producator.
- Orice defectiune survenita din folosirea neconforma a caruciorului nu se va repara in baza garantiei.
- Orice defectiune survenita din impachetarea incorecta a caruciorului nu se va repara pe baza garantiei.
- Pretul transportului va fi suportat de comparator.
- Garantia va fi prelungita cu perioada in care caruciorul a fost reparat.
- Cumparatorul are dreptul la schimbarea caruciorului cu unul nou in caz ca, dupa reparare, acesta prezinta aceleasi probleme ca inainte.
- Caruciorul trebuie folosit in conformitate cu prezentul manual.
- Folosirea neconforma a caruciorului nu intra sub regulile garantiei.
- Facand orice modificare asupra caruciorului va veti anula garantia.
- Stricarea caruciorului prin: operarea gresita, ingrijirea gresita, depozitarea gresita, etc. nu sunt acoperite de garantie.
- Producatorul avertizeaza asupra repararii caruciorului in service-uri neautorizate.
- Garantia valabila trebuie sa contina: Data cumpararii confirmata prin semnatura si stampila vanzatorului, tipul caruciorului si numarul de serie al acestuia.
- Garantia este valabila atata timp cat nu contine stersaturi sau corectari.
- Plangerile care nu intra sub garantie vor fi rezolvate conform cu prevederile legale ale codului civil.
- Toate plangerile legate de carucior trebuie adresate vanzatorului si/sau producatorului.