

CE



Pegaz 

Manual de operare si mentenanta

Ediția 10 2022-10-25

Pegaz

Cărucior compact tip umbrela



ATENTIE! Utilizatorii cu dificultati cognitive, probleme de vedere sau dificultati de citire vor contacta producatorul pentru a primi indicatii intr-un format special, conform nevoilor lor.

Scopul prezentului manual

Manualul de operare si mentenanța conține informații de baza necesare pentru folosirea corecta a căruciorului: folosire in siguranța, mod de asamblare, ajustările si pregătirile înainte de ajustare, îngrijirea si depozitarea produsului, condițiile de garanție.

Produsul este destinat persoanelor care au grija de copii cu dizabilități (părinți, asistenți medical, etc) si care vor fi transportați cu ajutorul căruciorului.

ATENTIE! Citiți integral prezentul manual înainte de folosirea căruciorului. Înainte de a utiliza căruciorul, fiecare Utilizator este obligat să citească manualul și să acționeze în conformitate cu îndrumările acestuia.

Acest manual se va revinde odată cu căruciorul! Va fi păstrat pentru a putea fi verificat atunci când întâmpinați dificultăți de orice fel.

ATENTIE! In cazul unor incidente legate de căruciorul nostru, aveți obligația de a ne anunța imediat telefonic sau pe email.

Detalii de contact producător:

- adresa poștala : MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Poland
- număr de telefon: +48 32 733 11 31
- adresa de email: mywam@mywam.pl



Versiunea manualului: **RO edition 10 / 2022-10-25**

Cuprins

▪	Introducere.....	5
1.	Scopul căruciorului PEGAZ	5
2.	Informații de baza privind căruciorul PEGAZ	5
3.	Început rapid	6
▪	Siguranța.....	7
4.	Reguli si instrucțiuni privind siguranța folosirii PEGAZ	7
5.	5.1 Plăcută de identificare.....	8
5.2	Plăcuță cu cod UDI.....	8
6.	<i>Etichetele de avertizare</i>	8
7.	Simbolurile.....	8
▪	Produsul.....	9
8.	Asamblarea generala a căruciorului	9
9.	Configurarea si folosirea – rama căruciorului	10
9.1.	Desfacerea căruciorului	10
9.2.	Plierea căruciorului	10
9.3.	Rotile duble din fata. Blocarea direcției de mers.	11
9.4.	Rotile duble din spate. Sistem de frână independent.	11
9.5.	Sistemul de amortizare pentru toate cele patru roți duble	11
9.6.	Piciorul pentru înclinarea căruciorului	12
9.7.	Mânere ergonomice si ajustabile	12
9.8.	Suportul pentru picioare.....	12
9.9.	Reglarea adâncimii scaunului.	13
9.10.	Ajustarea înălțimii spătarului	13
9.11.	Ajustarea înclinării spătarului	14
10.	Echipamentul standard.....	15
10.1.	Hamul cu 5 centuri	15
10.2.	Siguranța pentru transport.	15
10.3.	Bara de protecție	16
10.4.	Coșul de cumpărături.....	16
10.5.	Perna tip wedge	16
10.6.	Centurile de stabilizare	17
11.	Echipamentul adițional.....	17
11.1.	Baldachinul ajustabil, cu fereastra	17
11.2.	Masa terapeutica	18
11.3.	Perna pentru spate	18
11.4.	Suportul pentru cap.	18
11.5.	Pad-urile pentru îngustarea scaunului.....	18
11.6.	Geanta de călătorie.....	19
11.7.	Protecția de ploaie	19
11.8.	Plasa de țânțari	19
11.9.	Sacul de dormit	19
11.10.	Umbrela de soare.....	19

12.	Specificatii tehnice	21
12.1.	Compoziția materialului din care este făcut căruciorul.....	21
13.	Livrare si unelte	21
14.	Asamblarea si dezasamblarea căruciorului	22
15.	Pregătiri pentru utilizare.....	23
16.	Utilizarea căruciorului.....	23
16.1.	Cărarea si ridicarea căruciorului	23
16.2.	Punerea copilului si scoaterea copilul din cărucior.	23
16.3.	Poziția corecta in cărucior	23
16.4.	Conducusul căruciorului	24
16.5.	Conducerea căruciorului pe suprafețe in panta	24
16.6.	Conducerea peste obstacole mici (curbe, praguri, etc).....	24
16.7.	Transportarea căruciorului in mașina sau in alte vehicule	24
16.8.	Curățarea si îngrijirea	24
17.	Depozitarea căruciorului	25
17.1.	Pregătirea căruciorului pentru depozitare de lunga durata	25
17.2.	Protecție împotriva coroziunii	25
18.	Revânzarea.....	25
19.	Service si inspecțiile periodice	25
20.	Aruncarea căruciorului	26
21.	Actul de conformitate privind normele dispozitivelor medicale.....	27
22.	Notite	28
23.	Service-uri autorizate.....	29
24.	Card de garantie	30

▪ Introducere

Va mulțumim ca ați ales căruciorul nostru PEGAZ! Sperăm să fie motivul multor momente speciale petrecute alături de copilul dvs. Și ca va fi folositor în fiecare zi. Facem eforturi mari în fiecare zi ca produsele noastre să fie conforme cu așteptările dvs. Nu ezitați să ne urmăriți pe toate platformele noastre sociale și să vizitați site-ul nostru pentru mai multe informații. De altfel nu ezitați să ne contactați pentru orice nelămurire legată de produsele noastre.

1. Scopul căruciorului PEGAZ

"Pegaz" este un cărucior multifuncțional destinat pentru copii cu dizabilități. Căruciorul are o ramă de aluminiu cu elemente de fier. Este echipat cu o suspensie "pe perne" a roților din față și din spate și este un cărucior destinat pentru copii și adolescenți cu o greutate de până în 40 de kg. Produsul este prevăzut cu un număr mare de accesorii care îmbunătățesc funcționalitatea acestuia: masă, centuri de siguranță, pernă tip wedge, plasă pentru țințari, sac de dormit, cos de cumpărături, etc.

"Pegaz" este un dispozitiv medical de clasă I menit să fie folosit de copii cu dizabilități, care din cauza condiției lor nu pot sta "în fund" sau merge singuri.

Indicații clinice: paralizie cerebrală, meningită, distrofie, paralizie.

Produsul este indicat să fie folosit de utilizatori cu o înălțime între 80 și 140 de cm. Utilizatorii nu pot conduce singuri căruciorul și este nevoie de asistentă permanentă a unui adult. Căruciorul poate fi folosit atât afară cât și înăuntru, pe diferite suprafețe: asfalt, ciment, pământ, piatră; și în diferite condiții meteo. Orice altă folosire a căruciorului în afară de cele indicate în prezentul manual este strict interzisă. Căruciorul trebuie folosit conform indicațiilor medicului specialist sau a specialistului în recuperare. Căruciorul va fi condus doar de un adult. Copii, adolescenții și persoanele neinstruite nu vor conduce căruciorul.

Contraindicații: În caz de contraindicație a poziției șezând și/sau poziționării verticale pasive, reglarea căruciorului trebuie consultată cu un kinetoterapeut sau cu medicul curant.

2. Informații de bază privind căruciorul PEGAZ

Opțiunile căruciorului PEGAZ, e.g.

- | | |
|--|-----------|
| • Ajustarea spătarului. | vezi 9.11 |
| • Ajustarea adâncimii scaunului. | vezi 9.9 |
| • Ajustarea înălțimii spătarului. | vezi 9.10 |
| • Ajustarea suportului pentru picioare | vezi 9.8 |
| • Inserții pentru îngustare | vezi 11.5 |
| • Echipament adițional | vezi 11 |

3. Început rapid

Avantajul acestui cărucior este ușurința cu care poate fi folosit și faptul că este atât de compact. Poate fi pregătit pentru folosire folosind pașii simpli de mai jos: (Fig. 3.1):

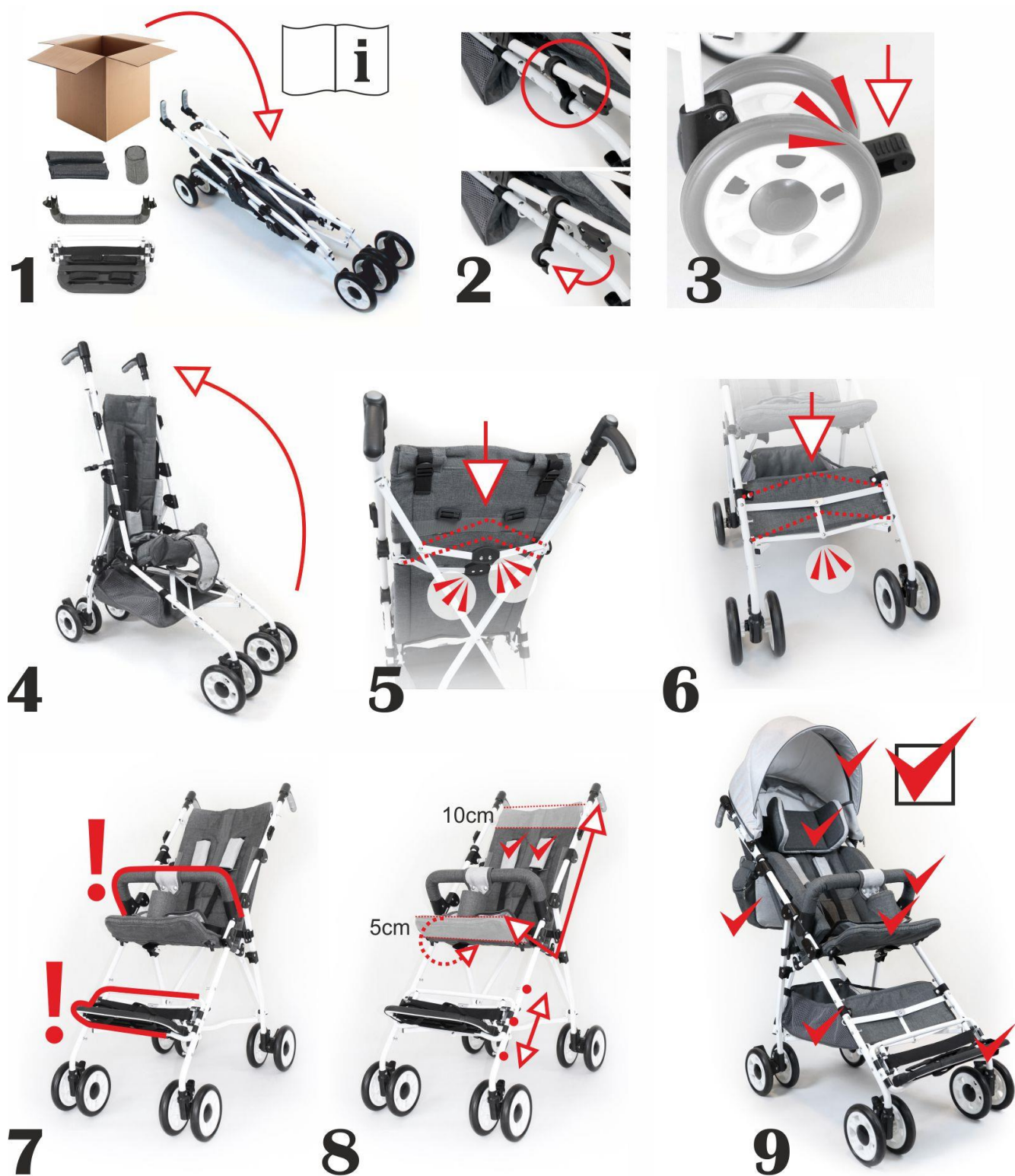


Fig. 3.1

▪ Siguranța

4. Reguli si instrucțiuni privind siguranța folosirii PEGAZ

Sfaturi generale :

- Este interzisă folosirea neconforma a căruciorului!
- Produsul conține componente mici – PERICOL DE INGHITIRE!
- CARUCIORUL are o posibilitate foarte mare de ajustare – aveți grija ca in timpul ajustărilor capul copilului dvs. sa nu ajungă sub linia pelviana – PERICOL DE SUFOCARE!
- ESTE INTERZISA folosirea de rucsacuri si genți atârinate de spătarul căruciorului – acest lucru poate duce la răsturnarea acestuia si la rănirea dvs. sau a copilului dvs. Daca aveți nevoie de spațiu suplimentar de depozitare folosiți doar accesoriile noastre originale compatibile cu PEGAZ.
- ATENTIE! In funcție de modificările si ajustările pe care le faceți căruciorului acesta își poate modifica dimensiunile!
- ATENTIE! De fiecare data, înainte de folosire, trebuie urmați toți pașii din prezentul manual si căruciorul trebuie verificat sa nu aibă defecțiuni care sa pună in pericol siguranța dvs. si a copilului dvs. Pentru orice nelămurire nu ezitați sa ne contactați.
- ATENTIE! Atunci când treceți cu căruciorul printr-un spațiu cu uși, asigurați-va ca este destul de mult spațiu in lateralele căruciorului pentru a nu va prinde mâinile, degetele sau pentru a nu zgâria căruciorul.

ATENTIE!



- Nu va lăsați niciodată copilul nesupravegheat in cărucior.
- Acest produs nu se va conduce in timp ce alergați si/sau in timpul folosirii patinelor cu roțile.
- Produsul nu se va folosi pe post de scaun de mașina.
- Nu cărați/ridicați căruciorul in timp ce copilul se afla in scaun.
- Căruciorul este împachetat intr-o punga de plastic. Punga de plastic nu este o jucărie – PERICOL DE SUFOCARE.

ATENTIE! ESTE INTERZISA FOLOSIREA CARUCIORULUI ATUNCI CAND NU SUNTETI SIGURI CA ACESTA ESTE INTR-O CONDITIE PERFECTA SAU DACA SUSPECTATI CA UNA DIN PARTILE COMPONENTE ALE CARUCIORULUI ESTE DEFECTA. DACA AVETI ORICE SUSPICIUNE LEGATA DE SIGURANTA CARUCIORULUI VA SFATUIM SA NU IL FOLOSITI SI SA NE CONTACTATI CAT DE REPEDE POSIBIL.

5. 5.1 Plăcută de identificare

- Plăcuta de identificare conține: numele căruciorului, modelul, numărul de serie, greutatea maxima admisa, data producerii, semnul CE, marca de dispozitiv medical si anumite atenționări (vezi Fig. 5.1).
- Plăcuta este lipita de partea din spate-jos a ramei căruciorului.

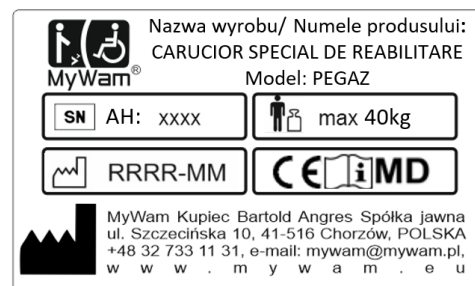


Fig. 5.1

5.2 Plăcuță cu cod UDI

Plăcuța cu codul UDI include următoarele informații: numele, modelul, codul UDI, detaliile producătorului (vezi Fig. 5.2)



Fig. 5.2

6. Etichetele de avertizare

- Contin avertizări care vizează conducătorul (vezi Fig. 6.1).
- Etichete de avertizare sunt situate pe partea din spate a ramei căruciorului.

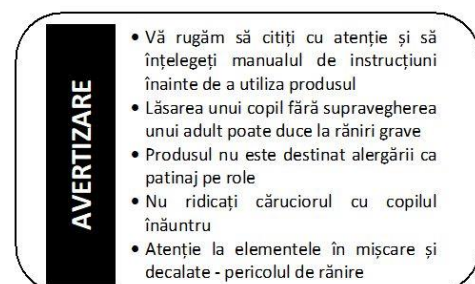


Fig. 6.1

7. Simbolurile

	Număr de serie		Numele producătorului
	Greutate maxima admisă		Produsul este un dispozitiv medical
	Data producerii		
	Conformitate cu normele europene		
	Avertizare – folosirea căruciorului conform prezentului manual de utilizare.		Semnul folosit pentru a atrage atenția cititorului privind anumite pericole.

▪ Produsul

8. Asamblarea generala a căruciorului

Căruciorul PEGAZ este format dintr-un singur element : rama cu scaunul si spătarul – părțile lui integrale. Aveți posibilitatea atașării unei varietăți mari de accesorii pentru a face căruciorul conform cu nevoile dvs. si a copilului dvs.

• Echipamentul standard



- 1- Mâner ergonomic pentru împins căruciorul..... vezi 9.7
- 2- Spătar cu mecanism de ajustare a înălțimii... vezi 9.10
- 3- Mecanism de ajustare a unghiului spătarului.. vezi 9.11
- 4- Siguranța pentru transport..... vezi 10.2
- 5- Tapițeria
- 6- Cos de cumpărături..... vezi 10.4
- 7- Frane independente pt. roțile din spate..... vezi 9.4
- 8- Sistem de amortizare al roților vezi 9.5
- 9- Blocarea direcției roților din fata vezi 9.3
- 10-Set de 4 roți solide din gel vezi 9.3 i 9.4
- 11-Suport picioare ajustabil si detașabil..... vezi 9.8
- 12-Mecanism de ajustare a adâncimii scaunului vezi 9.9
- 13-Centuri de stabilizare vezi 10.6
- 14-Abductor..... vezi 10.5
- 15-Bara de protecție vezi 10.3
- 16- Ham de siguranță..... 10.1

• Accesorii

- 17- Geanta de calatorii..... vezi 11.6
- 18- Sac de dormit pt. picioare..... vezi 11.9
- 19- Inserții pentru îngustare..... vezi 11.5
- 20- Suport pt. cap vezi 11.4
- 21- Protecție pt. soare. vezi 11.10
- 22- Baldachin ajustabil cu fereastră ..vezi 11.1
- 23- Protecție de ploaie..... vezi 11.7
- 24- Plasa de țânțari..... vezi 11.8
- 25- Perna pentru spate vezi 11.3
- 26- Masa de terapie..... vezi 11.2



9. Configurarea si folosirea – rama căruciorului

9.1. Desfacerea căruciorului

Înainte de a desface căruciorul asigurați-va ca toate cele patru roți ating solul. Pentru a desface căruciorul trebuie sa îndepărtați întâi siguranța pentru transport aflată pe partea dreapta a căruciorului. Apoi, cu ajutorul mânerelor de împingere ridicați partea de sus a spătarului in timp ce glisați ușor mânerele spre exterior. Următorul pas este acela de a slăbi structura căruciorului prin coborârea barelor pliabile localizate in fata căruciorului la înălțimea coșului pentru cumpărături si in spatele căruciorului, in spatele spătarului. Ar trebui sa le lăsați in jos pana ajung intr-o poziție orizontala.

9.2. Plierea căruciorului

Îndepărtați toate accesoriile atașate. Următorul pas este sa ridicați barele pliabile aflate între roțile din față, la nivelul coșului pentru cumpărături (Fig. 9.1.2) si in spatele căruciorului, în spatele spătarului. (Fig. 9.1.3) Următorul pas este sa apăsați pe barele pliabile spre interior (Fig. 9.1.4) si să împingeți simultan partea de sus a căruciorului înainte si în jos. (Fig. 9.1.5) Din aceste acțiuni rezultă pliarea corectă a căruciorului. Pentru a asigura căruciorul activați siguranța pentru transport aflată pe partea dreaptă a căruciorului.



Fig. 9.2.1

Poziția de baza a barelor pliabile



Fig. 9.2.2

Ridicarea barelor pliabile din fata



Fig. 9.2.3

Ridicarea celor din spate



Fig. 9.2.4

Împingerea mânerelor



Fig. 9.2.5

Plierea căruciorului



Fig. 9.2.6

Închiderea siguranței de transport

9.3. Rotile duble din fata. Blocarea direcției de mers.

Rotile din față sunt parte integrală din cărucior și pot fi demontate pentru a fi înlocuite.

- **Funcția de blocare a direcției.** În eventualitatea unor suprafețe neregulate, la curbe sau la trecerea peste obstacole este recomandat să instalați siguranța și să blocați direcția de mers a roților. Pentru a bloca funcția de rotire a roților trebuie ridicat butonul dintre roțile pereche. (Fig. 9.3.1). Pentru a debloca roțile, apăsați pe buton în jos și așezați siguranța la locul ei. Fig. 9.3.2)



Fig. 9.3.1

Direcție blocată

Fig. 9.3.2

Direcție neblocată

9.4. Rotile duble din spate. Sistem de frână independent.

Roțile din spate sunt parte integrală a ramei și pot fi demontate pentru a fi înlocuite.

- **Sistemul independent de frânare.** Roțile din spate sunt echipate cu două sisteme de frânare localizate în spatele fiecărei perechi de roți. Pentru a pune frână apăsați pe ambele frâne. Pentru a dezactiva frâna trageți de pedale în sus. (Fig. 9.4.2).



Fig. 9.4.1

Frână activată



Fig. 9.4.2

Frână dezactivată



Fig. 9.5.

Sistemul de amortizare

9.5. Sistemul de amortizare pentru toate cele patru roți duble

Toate cele patru roți ale căruciorului sunt echipate cu un sistem de amortizare. Aceasta funcționează automat și nu trebuie modificat de către cumpărător. (Fig. 9.5).

9.6. Piciorul pentru înclinarea căruciorului

Căruciorul poate fi prevăzut cu un picior de inclinare inclus în echipamentul adițional. Piciorul de inclinare face ușoară manevrarea căruciorului atunci când va întâlniți cu obstacole mici. (scări, curbe, etc) Pentru a ridica roțile din față, apăsați pe piciorul de înclinare și trageți de ambele mânere spre dumneavoastră.



Fig. 9.6.

Piciorul de inclinare

9.7. Mânere ergonomice și ajustabile

PEGAZ este prevăzut cu două mânere de împingere ajustabile și ergonomice. Pentru a le ajusta, apăsați pe butoanele de pe mânere și rotiți pentru a le schimba unghiul de înclinare. (Fig. 9.7.1 și 9.7.2) După ce ați așezat ambele mânere în poziția dorită opriți-vă din a apăsa pe butoane. Mânerele se pot ajusta o dată la 90 de grade.



Fig.9.7.1



Fig. 9.7.2

Mânerul de împingere – poziția a și b

9.8. Suportul pentru picioare

- **Instalarea.** Pentru instalarea suportului pentru picioare, glisați suportul în acele de montare aflate în partea de jos a ramei căruciorului, pe mai multe nivele. Un clic ar trebui să se audă atunci când totul este la locul lui. După acești pași asigurați-vă că suportul pentru picioare este montat corect. Pentru a verifica, puteți trage de el în sus, acesta nu ar trebui să se miște.

- **Dezasamblarea.** Pentru a scoate suportul pentru picioare apăsați pe cele două butoane aflate de o parte și de alta a suportului și ridicați.

Căruciorul nu se va folosi fără suportul pentru picioare.

- **Folosirea suportului.** Este recomandat ca suportul pentru picioare să fie corect atașat. Picioarele copilului trebuie să se odihnească liber pe toată suprafața sa. Totodată coapsele copilului trebuie să fie paralele cu suprafața scaunului. (Fig. 9.8.1 și 9.8.2). Există curele pe placa suportului pentru picioare, pentru a asigura picioarele copilului dvs. Este recomandat să le folosiți în timpul folosirii căruciorului. Placa suportului pentru picioare ar trebui să stea în poziție orizontală, totuși în timpul transportului sau al depozitării căruciorului aceasta trebuie îndepărtată.



Fig. 9.8.1

Pozitia minima



Fig. 9.8.2

Pozitia maxima

9.9. Reglarea adâncimii scaunului.

PEGAZ are funcția de a ajusta adâncimea scaunului. Datorită posibilității de a plia partea din fata putem lungi șezutul cu 5 cm. Pentru a face asta apasă pe ambele butoane aflate pe de o parte și pe alta a scaunului, în același timp și îndoiți partea ajustabilă pentru a obține poziția primei părți a scaunului. (Fig. 9.9.1). Pentru a plia scaunul, apăsați butoanele și pliați bucata în plus sub scaun. (Fig. 9.9.2).

9.10. Ajustarea înălțimii spătarului

Pegaz are funcția de ajustare a înălțimii spătarului. (Fig. 9.10.1). Datorită opțiunii de a atașa extensii



Fig. 9.9.1

AJUSTAREA ADANCIMII SCAUNULUI-POZITIE MINIMALA



Fig 9.9.2

AJUSTAREA ADANCIMII – POZITIE MAXIMALA



Fig. 9.10.1

INALTIMEA SPATARULUI



Fig. 9.10.2

EXTENSII

metalice în partea de sus a spătarului, îl putem mari cu 10 cm. Pentru a face asta detașați partea de sus a tapiseriei spătarului, inserați extensia în găurile tuburilor spătarului și așezați tapiseria peste. (Fig. 9.10.2).

9.11. Ajustarea înclinării spătarului

Pegaz are funcția de a ajusta spătarul în două trepte. (Fig. 10.11.1 si 10.11.2). Pentru a ajusta căruciorul desfaceți barele pliabile din spatele spătarului ridicandu-le, (Fig. 10.11.3) mutați monturile aflate in ambele părți ale ramei in jos si inclinați spătarul spre spate din poziția lui inițială in poziție inclinată. (Fig. 10.11.4) Pentru a asigura poziția spătarului, barele pliabile trebuie aduse la forma inițială. (Fig. 10.11.5).



Fig. 10.11.1

Inclinația scaunului – poziție de baza



Fig. 10.11.2

Inclinația spătarului – poziție modificată

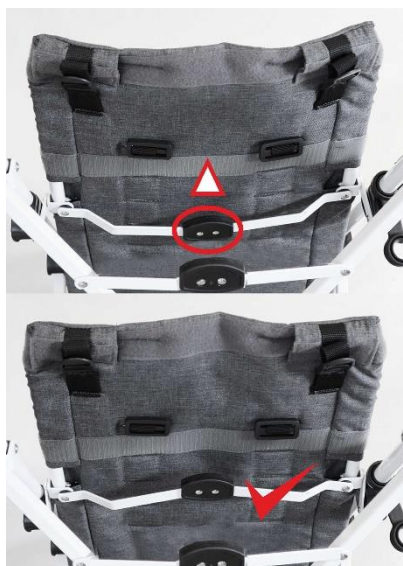


Fig. 10.11.3

Desfacerea mecanismului de pliere

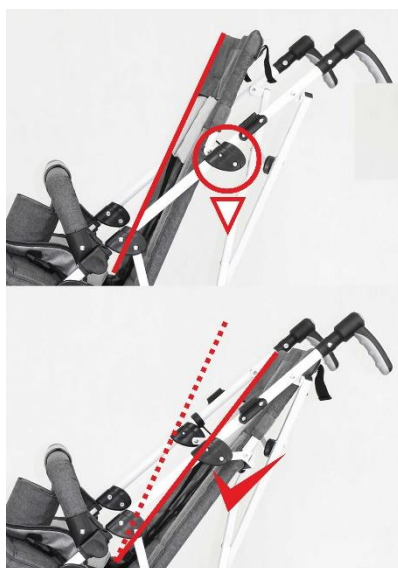


Fig. 10.11.4

Coborârea monturilor



Fig. 10.11.5

Blocarea mecanismului de pliere

10. Echipamentul standard

10.1. Hamul cu 5 centuri

PEGAZ este prevăzut cu un ham de siguranță format din 5 centuri ajustabile. (Fig. 10.1.1).



Fig. 10.1.1
Ajustare minima



Fig. 10.1.2
Ajustare maxima

- **Ajustarea:** Ajustați hamul înainte de a pune copilul în cărucior. Pentru a ajusta lungimea centurilor, mutați ajustoarele în sus sau în jos pe centuri și mutați pernele de protecție în funcție de lungimea centurii. (Fig. 10.1.1 și 10.1.2). Pentru a ajusta înălțimea hamului, atașamentele acestuia trebuie mutate de sus în jos sau invers.
- **Folosirea.** Pentru a îmbrăca copilul cu hamul, treceți mâna dreaptă și mâna stângă acestuia prin centurile hamului iar apoi securizați centurile în catarama prinsă de scaun. Pentru a scoate copilul din ham, apăsați pe butonul de pe cataramă atașată de scaun și scoateți ambele mâini ale copilului din centurile hamului. **De fiecare dată când faceți ajustări spătarului trebuie să modificați și ajustările făcute hamului.**

10.2. Siguranța pentru transport.

Căruciorul este prevăzut cu o siguranță pentru transport care are rolul de a securiza rama pliată în această poziție și de a împiedica desfacerea acesteia în timpul transportului sau a depozitării. (Fig. 10.2) Siguranța trebuie atașată după ce ați pliat rama și trebuie desfăcută atunci când doriți să desfaceți rama. Nu desfaceți rama căruciorului cât timp siguranța este atașată, acest lucru poate duce la distrugerea structurii ramei.



Fig. 10.2
Siguranța pentru transport

10.3. Bara de protecție

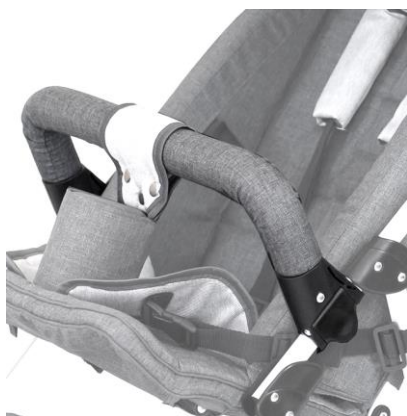


Fig. 10.3
Bara de siguranță

PEGAZ este prevăzut cu o bară de protecție (echipament standard). Bara de protecție este gândită să împiedice copilul să cadă din cărucior. (Fig. 10.3). Bara de protecție folosește același sistem de montare ca masa terapeutică și nu pot fi folosite concomitent.

- **Instalare.** Acest element se instalează pe rama căruciorului folosind siguranțe din plastic care arată la fel în ambele părți. După aplicarea siguranțelor la înălțimea potrivită apăsați până acestea acoperă definitiv rama căruciorului.

ATENȚIE! Din motive de structură bară de protecție și suportul pentru picioare nu pot fi folosite concomitent cu masa terapeutică.

10.4. Coșul de cumpărături

Coșul de cumpărături face parte din echipamentul standard al căruciorului. Se afla sub scaunul căruciorului și greutatea maximă admisă este de 2 kg. (Fig. 10.4)



Fig. 10.4
Cosul de cumpărături

10.5. Perna tip wedge

Căruciorul este echipat cu o perna tip wedge care este plasată între picioarele copilului dvs. Pentru instalare atașați wedge-ul cu materialul din VELCRO și apoi înfășurați-l cu o bandă pentru a îl asigura. (Fig. 10.5.1 și 10.5.2)



Fig. 10.5.1
Wedge – poziția maximă



Fig. 10.5.2
Wedge – poziția minimă

10.6. Centurile de stabilizare

Centurile de stabilizare sunt folosite pentru siguranța adițională în zona pelvisului și pentru a preveni alunecarea copilului din cărucior. (Fig. 10.6) Modul corect de utilizare este acela de a le înfășura în jurul coapselor copilului astfel încât zona pelvisului să fie cât mai aproape de spătar. Acest lucru ajută la păstrarea unei poziții mai sănătoase și corecte.

- **Ajustări.** Pentru a ajusta lungimea centurilor de stabilizare trebuie să mutați elementele de ajustare în sus sau în jos pe toată lungimea centurii până când ajungeți la lungimea dorită.
- **Folosirea.** Pentru a folosi centurile de stabilizare copilul trebuie pus în scaun și securizat cu hamul de protecție – înfășurați piciorul copilului cu centurile de stabilizare și închideți centurile.



Fig. 10.6
Centurile de stabilizare

11. Echipamentul adițional

11.1. Baldachinul ajustabil, cu fereastră

Pegaz poate fi echipat cu un baldachin cu fereastră ajustabil care ajută la protejarea copilului de soare și de ploaie. (Fig. 11.1.1). Elementele cabinei sunt: rama (rama arcuită în față și în spate), protecția pentru soare, două închizători cu butoane roșii care ajută la atașarea baldachinului de rama de aluminiu, tapiseria acoperișului și fereastră prevăzută cu o plasă de țânțari atașabilă cu un fermoar.

- **Instalare.** Mecanismul de prindere al baldachinului constă în două elemente de plastic localizate în exteriorul părții de sus a ramei, la nivelul suportului pentru cap. Pentru a asambla baldachinul ajustabil cu fereastră, puneți spătarul într-o poziție dreaptă și apoi glisați simultan închizătoarele în spațiile special prevăzute de pe rama. Montați cabina cu fereastră în așa fel încât partea din spate a tapiseriei acesteia să se suprapună cu spatele spătarului.
- **Dezinstalare.** Pentru a dezinstala baldachinul apăsați pe cele două butoane roșii și apoi glisați baldachinul din locurile special prevăzute de pe rama.
- **Folosirea.** Pentru a schimba mărimea baldachinului țineți rama arcuită din față și pe cea din spate și apropiați-le sau depărtați-le în funcție de poziția pe care o doriți. Mecanismul de ajustare se blochează automat. Baldachinul este prevăzut cu o fereastră cu plasă de țânțari care asigură aerisirea corectă. Plasa de țânțari se închide și se deschide cu ajutorul unui fermoar.



Fig. 11.1.1
Adjustable canopy with window

11.2. Masa terapeutică



Fig. 11.2

Masa terapeutică

Pegaz poate fi echipat cu o masă terapeutică fabricată dintr-un material care nu aluneca și care poate suporta o încărcătură de maxim 3kg. (Fig. 11.2) Pentru a asambla masă, glisați clemele de siguranță pe elementele principale ale ramei și apoi închideți clemele până sunteți siguri că masă este corect atașată. Pentru a dezinstala masă, desfaceți clemele și îndepărtați masă de pe ramă căruciorului.

Masă terapeutică se va folosi alternativ cu bară de protecție și este un element de structură esențial al căruciorului.

ATENȚIE! Din motive privind structura căruciorului acesta trebuie să aibă instalată fie bară de protecție și suportul pentru picioare, fie masă terapeutică.

11.3. Perna pentru spate

Perna pentru spate este echipament adițional și are rolul de a face folosirea căruciorului mult mai confortabilă. Spătarul căruciorului devine mai moale și mai plăcut. (Fig. 11.3). Perna se atașează de spătar printr-un material VELCRO.

11.4. Suportul pentru cap.

Suportul pentru cap este echipament opțional. (Fig. 11.4). Are rol de confort și de stabilizare. Atașați suportul pentru cap de spătarul scaunului, la nivelul optim, apoi, pentru mai multă siguranță, trageți centurile acestuia montate cu VELCRO prin deschizăturile din spătarul scaunului și atașați-le în spatele acestuia.

11.5. Pad-urile pentru îngustarea scaunului.

Pegaz este echipat cu două inserții de îngustare a scaunului. Ele sunt folosite pentru ajustarea dimensiunilor dinăuntrul scaunului. (Fig. 11.5). Inserțiile se atașează cu partea verticală cea mai lungă la marginile exterioare ale spătarului folosind-se de o centură VELCRO.



Fig. 11.3

Perna pentru spate



Fig. 11.4

Suportul pentru cap



Fig. 11.5

Padurile pentru îngustare

11.6. Geanta de călătorie

Geanta de călătorie este atașată pe două mânere localizate în interiorul mânerului de împingere a căruciorului. (Fig. 11.6) Greutate maximă suportată – 2 kg.

ATENȚIE! Depășirea greutății maxime admise are un efect negativ asupra stabilității căruciorului și este periculos pentru dvs. și pentru copilul dvs.



Fig. 11.6

Geanta de calatorie

11.7. Protecția de ploaie

Pegaz poate fi echipat cu o protecție de ploaie (Fig. 11.7) Această protecție de ploaie este un echipament opțional care poate fi atașată la alte echipamente opționale – baldachinul cu fereastră.

Asamblare. Pentru a instala protecția de ploaie așezați-o pe baldachinul cu fereastră, de deasupra și apoi așezați-o peste scaun și peste suportul pentru picioare. După aceea asigurați-vă că protecția este așezată corespunzător atașându-o de ramă și de suportul de picioare cu închizătorile special prevăzute.

11.8. Plasa de țânțari

Pegaz poate fi prevăzut cu o plasă de țânțari care are rolul de proteja copilul dvs. de țânțari și alte insecte. (Fig. 11.8). Acest accesoriu se atașează la alt accesoriu – baldachinul cu fereastră.

Asamblare. Pentru instalare plasați plasa de țânțari peste baldachinul cu fereastră și acoperiți scaunul și suportul pentru picioare. După ce vă asigurați că plasa este pusă în poziția corectă atașați-o cu închizătorile special prevăzute de ramă și de suportul pentru picioare.

11.9. Sacul de dormit

Pegaz poate fi prevăzut cu un sac de dormit pentru picioare, care ajută la confortul copilului în zilele mai friguroase. (Fig. 11.9). Acest accesoriu trebuie atașat la bara de protecție.

Asamblare. Pentru a monta sacul de dormit atașați-l la suportul pentru picioare de dedesubt și atașați-l de deasupra prin bara de protecție. Asigurați-vă apoi sacul de dormit cu închizătorile special prevăzute la ramă a căruciorului.

11.10. Umbrela de soare

Pegaz poate fi prevăzut cu o umbrelă pentru soare care are rolul de a proteja copilul de soare. (Fig. 11.10)

Asamblare. Pentru a instala umbrela de soare la cărucior desfăceți clema deșurubând filamentul localizat în interior și glisați umbrela înăuntru, având grijă ca șaibă de cauciuc să rămână la locul ei. După ce ați ales înălțimea optimă strângeți filamentul până ce clema de pe ramă a căruciorului este fixată corect.



Fig. 11.7
Protectia de ploaie



Fig. 11.8
Plasa de tantari



Fig. 11.9
Sacul de dormit



Fig. 11.10
Umbrela pentru soare

12. Specificatii tehnice

Lungimea căruciorului	90 - 108 cm
Lățimea căruciorului	56 cm
Înălțimea căruciorului	106 - 130 cm
Greutate maxima admisa	10kg - 19,6kg
Adâncimea scaunului	25 / 33 cm
Lățimea scaunului	30* / 38 cm
Înălțimea scaunului	50 / 60 cm
Lățimea scaunului	30* / 37 cm
Distanța dintre suportul de picioare si scaun/ Numărul de ajustări	20, 30, 40 cm / 3 poziții
Lungimea căruciorului pliat	124 cm
Lățimea căruciorului pliat	28 cm
Înălțimea căruciorului pliat	39 cm
Capacitatea coșului de cumpărături	2 kg
Capacitatea genții de călătorie	2 kg
Înălțimea maxima a copilului	80 – 140 cm
Greutatea maxima a copilului	40 kg
Unghiurile scaunului / nr. de ajustări	25° / 1 poziție
Unghiurile spătarului / nr. de ajustări	22° i 34° / 2 poziții
Unghiurile sup. de picioare / nr. de ajustări	75° /1 poziție

COMENTARII: *) valorile bifate astfel

Toleranta maxima a valorilor bifate +/- 20mm, +/- 1.5kg, +/- 1 °

Producătorul își rezerva dreptul de a face modificări la parametrii tehnici.

12.1. Compoziția materialului din care este făcut căruciorul

Aluminiu pudrat si fier pudrat, materiale 100% poliester si plastic. (PP, PCV, ABS, PA, PE, PU).

13. Livrare si unelte

Pegaz este livrat într-o cutie de carton si este pre-asamblat. Pachetul trebuie sa conțină:

- Rama pliata a căruciorului cu scaun, spătar, roti, suport pentru picioare, bara de protecție si wedge (sau centuri de stabilizare) integrat.
- Manualul de utilizare si cardul de garanție

Înainte de utilizare asigurați-va ca pachetul conține toate elementele si ca niciun element nu a fost stricat/spart/rupt etc in timpul transportului. Daca una din piese lipsește sau este stricata va rugam sa contactați vânzătorul si/sau producătorul pentru a primi piesa lipsa sau pentru ca piesa stricata sa va fie înlocuita.

Echipamentul multifuncțional va oferă posibilitatea de a ajusta si regula căruciorul pentru ca acesta sa se potrivească cerințelor dvs. Pentru a ajusta si regula căruciorul corect citiți si respectați instrucțiunile din prezentul manual.

Nu este necesara niciun fel de unealta pentru a asambla sau dezambla căruciorul.

14. Asamblarea si dezasamblarea căruciorului

Asamblarea căruciorului. Produsul vine pre asamblat. Terminați asamblarea acestuia ghidând-va după următorii pași:

- Desfaceți căruciorul ajustând următorii parametrii: coborați si fixați expansivii din spate la înălțimea spătarului si pe cele din fata la nivelul coșului de cumpărături.
- activați/ dezactivați siguranța de direcție
- ajustați înălțimea si inclinarea mânerului de împingere al căruciorului
- setați unghiul de inclinare al spătarului
- ajustați lungimea hamului
- puneți suportul pentru picioare la înălțimea dorita.
- montați masa de terapie sau bara de protective
- instalați echipamentul comandat si ajustați parametrii:
 - Atașați inserțiile de micșorare ale scaunului
 - Instalați sau dezinstalați extensia spătarului
 - Setati adâncimea scaunului
 - Ajustați centurile stabilizatoare
 - Ajustați baldachinul cu fereastră
 - Instalați si ajustați Wedge-ul
 - Atașați coșul pentru cumpărături
 - Atașați echipamentul potrivit condițiilor meteo:
 - sac de dormit pentru picioare
 - plasa de țânțari
 - protecția pentru ploaie
 - umbrela
- **Dezmembrarea căruciorului**

Pentru a dezmembra căruciorul:

 - a) Îndepărtați toate accesoriile
 - b) îndepărtați suportul pentru picioare
 - c) îndepărtați bara de protecție sau masa de terapie
 - d) Blocați roțile din fata
 - e) activați frâna roților din spate
 - f) ridicați traversele din spatele căruciorului la nivelul spătarului si pe cele din fata la nivelul coșului de cumpărături
 - g) pliați si asigurați cu siguranța pentru transport.

15. Pregătiri pentru utilizare

Înainte de a folosi căruciorul:

- Verificați condiția tehnică a căruciorului și a elementelor sale. Dacă observați defecțiuni căruciorul nu trebuie utilizat. Va rugăm să contactați vânzătorul și/sau producătorul.
- Verificați ca rama a fost pliată corect și ca siguranța pentru transport a fost închisă.
- Verificați ca scaunul să fie corect atașat la rama din aluminiu.
- Verificați ca toate cele 4 roți să fie corect instalate și ca anvelopele sunt în condiție bună.
- Verificați ca frâna centrală să funcționeze corect.
- Faceți toate ajustările necesare pentru comoditatea copilului dvs. Verificați ca acestea să fie securizate.
- Verificați ca tapiseria căruciorului să fie uscată.
- Securizați elementele de stabilitate ale căruciorului (hamul, centurile de stabilizare, wedge-ul, suportul pentru picioare, etc). Faceți toate ajustările înainte de a așeza copilul în cărucior.
- Asigurați-vă ca îmbrăcămintea copilului dvs. este corectă și ca acoperă pielea în toate punctele în care aceasta ia contact cu centurile și curelele căruciorului.
- În cazul în care copilul dvs. are probleme cu incontinența urinară, o mușama medicală va fi poziționată pe scaun. Aceasta se găsește în toate farmaciile și magazinele de profil.
- În cazul în care sunt utilizate alte aparate medicale – tuburi, catetere etc., aveți grijă ca acestea să fie securizate și ca nu pot fi smulse/strânse, etc.

16. Utilizarea căruciorului

16.1. Cărare și ridicarea căruciorului

Modul cel mai bun de a cară căruciorul este folosind-l de roțile acestuia. Dacă acest lucru nu este posibil din motive de siguranță căruciorul poate fi ridicat și mișcat cu ambele mâini după ce este pliat și toate accesoriile au fost scoase. (pentru a reduce greutatea acestuia).

Aveți grijă la ridicarea ramei din aluminiu. Aceasta va fi ridicată doar în momentul în care este atașată siguranța pentru transport. Ridicați rama doar ajutându-vă de elementele fixe ale acesteia.

Din motive de siguranță nu ridicați căruciorul cât timp acesta încă are accesoriile atașate.

Nu ridicați căruciorul de bara de protecție sau de suportul pentru picioare.

16.2. Punerea copilului și scoaterea copilului din cărucior.

Pentru a pune copilul în cărucior, aduceți căruciorul cât mai aproape de o suprafață plană și sigură. Asigurați-vă că frâna roților din spate este activă și după aceea îndepărtați suportul pentru picioare pentru a evita sprijinirea, puneți copilul în cărucior.

Nu stați pe suportul pentru picioare – există riscul de răsturnare al căruciorului – acest lucru poate duce la rănirea dvs, a copilului dvs și/sau la stricarea căruciorului.

16.3. Poziția corectă în cărucior

Din motive de siguranță și sănătate este recomandat ca zona pelviană a copilului dvs. să fie cât mai aproape de spătarul scaunului – mai mult suport al coloanei vertebrale.

Coapsele copilului dvs. trebuie susținute pe toată lungimea lor – acest lucru poate fi obținut prin ajustarea adâncimii scaunului, iar picioarele copilului dvs. trebuie susținute de suportul pentru picioare. Acest lucru asigură o poziție corectă și previne alunecarea copilului dvs. din cărucior.

16.4. Conducusul căruciorului

Atunci când conduceți căruciorul țineți ambele mâini pe ambele mânere de împins căruciorul. Dezactivați frâna roților din spate și împingeți căruciorul în direcția dorită.

16.5. Conducerea căruciorului pe suprafețe în pantă

Poziționați întotdeauna căruciorul drept înainte atunci când urcați căruciorul pe suprafețe în pantă. Limitați viteza și mișcați-vă cât de încet puteți. Părintele trebuie să aibă suficientă forță de a ține căruciorul sub control.

Luați în considerare că centrul de gravitație al căruciorului se modifică pe suprafețe în pantă. Când conduceți căruciorul pe astfel de suprafețe trebuie să aveți atenție sporită. Atunci când urcați căruciorul pe rampe aveți grijă ca acestea să fie potrivite pentru cărucior. În aceste cazuri este indicat să mai fie o persoană în plus în afara de cel/cea care conduce căruciorul.

16.6. Conducerea peste obstacole mici (curbe, praguri, etc)

Atunci când vreți să treceți căruciorul peste obstacole mici, blocați piciorul de înclinare cu piciorul dvs. Și împingeți căruciorul în jos și spre dvs. pentru a ridica roțile din fața acestuia. După ce ați depășit obstacolul cu roțile din față ridicați ușor de cărucior pentru a trece obstacolul și cu roțile din spate.

16.7. Transportarea căruciorului în mașina sau în alte vehicule

Pentru a transporta căruciorul în mașină, scoateți toate accesoriile și depozitați-le într-un spațiu potrivit. Pliati apoi căruciorul și așezați-l în portbagaj. Dacă portbagajul nu este separat de locurile pentru pasageri, căruciorul va trebui atașat la mașină. Pentru a asigura căruciorul va puteți folosi de centurile acestuia.

- Pentru a transporta căruciorul în alte vehicule ca: trenuri, autobuze, avioane, barci, etc. vă rugăm să comunicați cu șoferul despre condițiile de transport din vehicul și dacă aveți spațiu pentru cărucior.
- Pentru transportarea căruciorului în alte vehicule, scoateți toate accesoriile și depozitați-le într-un loc sigur. Pliati apoi căruciorul în compartimentul pentru bagaje.

16.8. Curățarea și îngrijirea

Tapiseria căruciorului trebuie spălată de mână (temperatura apei – 30 de grade). Nu este permisă spălarea tapiseriei în mașina de spălat. Tapițeria trebuie spălată numai manual (temperatura recomandată a apei – 30 de grade). Toate petele trebuie curățate cât de repede se poate.

Atenție! Nu curățați tapiserie cu soluții care conțin chimicale, solvent sau decoloranți. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice tip de deteriorare a căruciorului cauzată de folosirea de soluții neaprobate.

Nu insistați asupra petelor – acest lucru poate distruge țesătura.

Asigurați-vă întotdeauna că tapiseria este uscată integral înainte de folosire.



Spălați doar de
mână



Nu folosiți
înmălbitori



Nu uscați la tambur



Uscați în poziție
orizontală



Nu folosiți fier de
calcat

În caz de pete de mâncare, băutură, ulei:

- Uscăți pata folosind-va de șervetele de hârtie
- pentru a nu mari pata, înmuiați o bucată de material în detergent și apă caldă și apăsați pe pata. Clătiți orice urmă de detergent. Uscăți bine.

În funcție de mărimea petei procedura de mai sus va trebui sau nu repetată.

Continuați procedura până ce pata dispăre.

De fiecare dată când adăugați detergent clătiți ușor până nu mai există nicio urmă de soluție.

17. Depozitarea căruciorului

Depozitați căruciorul într-un loc curat, uscat și ventilat la o temperatură între 0 și 35 de grade.

17.1. Pregătirea căruciorului pentru depozitare de lungă durată

Verificați ca toate componentele să fie în stare perfectă de funcționare și apoi depozitați căruciorul într-un loc uscat, curat și bine aerisit. (ventilat)

17.2. Protecție împotriva coroziunii

Pentru a evita coroziunea ramei de aluminiu căruciorul nu trebuie depozitat într-un loc umed.

Atunci când rama se umezește grija să o ștergeți și să o uscați înainte de depozitare.

Ștergeți partea de aluminiu cu o cârpă uscată, îmbibată într-un ulei de protecție ușor.

Curățarea și ungerea regulată a ramei de aluminiu cu lubrifianți de protecție asigură o viață mai lungă căruciorului dvs.

18. Revânzarea

Acest produs se poate revinde.

Produsul bine îngrijit are o perioadă de viață de 3 ani.

Pentru revânzarea produsului parcurgeți următorii pași:

- Înlocuiți tapiseria cu una nouă.
- Rama căruciorului trebuie curățată și dezinfectată.
- Produsul trebuie verificat de un service autorizat înainte de a îl revinde.
- Toate părțile componente care prezintă urme de uzură trebuie înlocuite cu componente noi.
- Doar produsele care trec prin pașii de mai sus pot fi revândute.

19. Service și inspecțiile periodice

Pentru folosirea în siguranță a produsului acesta trebuie verificat periodic.

Pentru situațiile în care persoana care a cumpărat căruciorul nu poate întreprinde aceste activități singur, căruciorul ar trebui trimis la service-urile autorizate sau la producător, contracost.

Toate reparațiile se vor face în service-uri autorizate sau direct la producător.

Se vor folosi doar accesoriile originale ale căruciorului.

Inspekțiile ar trebui făcute :

- **De fiecare data înainte de folosire**
 - Verificați frâna centrală – de fiecare dată când este activate roțile din spate ar trebui să se blocheze.
 - Verificați ca toate accesoriile suplimentare să fie corect atașate, fiți atenți în special la : sistemul de atașare al scaunului la rama de aluminiu, funcționarea corectă a hamului, la mecanismul de blocare al înclinării, la atașarea corectă a suportului pentru picioare.
 - Verificați condiția anvelopelor.
 - Verificați condiția părților fixe ale ramei, scaunului, spătarului și a suportului pentru picioare.
- **O dată pe luna**
 - Curățați căruciorul. Curățați toate componentele cu o cârpă moale și ungeți cu un ulei de protecție partea din fier și din aluminiu a căruciorului.
 - Verificați toate sisteme de atașare și cataramele. Toate butoanele și șuruburile.
- **O dată la șase luni**
 - Verificați cât de curate este tapiseria și inspectați condiția generală a căruciorului.

20. Aruncarea căruciorului

Aruncarea și reciclarea: căruciorul folosit trebuie dus la un centru de reciclare în conformitate cu legile din zona în care locuiți.

21. Actul de conformitate privind normele dispozitivelor medicale

Dispozitiv medical clasa I în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2017/745 din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale.

Producătorul a emis o declarație de conformitate corespunzătoare pentru produs, care este disponibilă pe www.mywam.eu

22. Notite

23. Service-uri autorizate

POLAND

MyWam Kupiec, Bartold, Angres Sp. Jawna

ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska

tel.: +48 32 733 11 31

website: www.mywam.eu

e-mail: mywam@mywam.pl

24. Card de garanție

Serie si număr

Data achiziționării: - -

Stampila si semnătura vânzătorului

Condiții de garanție :

- Producătorul asigura cumpărătorului o garanție de 24 de luni de la cumpărarea căruciorului. Orice neplăcere survenita in aceasta perioada va fi rezolvata gratis.
- Cumpărătorul care are probleme cu căruciorul lui va trimite căruciorul bine ambalat spre reparare la vânzător sau producător.
- Orice defecțiune survenita din folosirea neconforma a căruciorului nu se va repara in baza garanției.
- Orice defecțiune survenita din împachetarea incorecta a căruciorului nu se va repara pe baza garanției.
- Prețul transportului va fi suportat de comparator.
- Garanția va fi prelungita cu perioada in care căruciorul a fost reparat.
- Cumpărătorul are dreptul la schimbarea căruciorului cu unul nou in caz ca, după reparare, acesta prezinta aceleași probleme ca înainte.
- Căruciorul trebuie folosit in conformitate cu prezentul manual.
- Folosirea neconforma a căruciorului nu intra sub regulile garanției.
- Făcând orice modificare asupra căruciorului va veți anula garanția.
- Stricarea căruciorului prin: operarea greșita, îngrijirea greșita, depozitarea greșita etc, nu sunt acoperite de garanție.
- Producătorul avertizează asupra reparării căruciorului in service-uri neautorizate.
- Garanția valabila trebuie sa conțină: Data cumpărării confirmata prin semnătura si stampila vânzătorului, tipul căruciorului si numărul de serie al acestuia.
- Garanția este valabila atâta timp cat nu conține ștersături sau corectări.
- Plângerile care nu intra sub garanție vor fi rezolvate conform cu prevederile legale ale codului civil.
- Toate plângerile legate de cărucior trebuie adresate vânzătorului si/sau producătorului.