

CE



MANUAL DE OPERARE SI MENTENANTA

Edition 7/ 2022-10-25

Carucior special **YETI**

Carucior special pentru copii **YETI Young**

⚠️ Atenție! Utilizatorii cu dificultăți cognitive, dificultăți de citire sau probleme de vedere vor notifica producătorul pentru a primi următoarele informații în format potrivit nevoilor lor.

Scopul manualului.

Manualul de operare și mentenanță conține informații de bază necesare pentru folosirea corectă a căruciorului : folosirea în siguranță, modul de asamblare, ajustările și pregătirile înainte de ajustare, îngrijirea și depozitarea produsului, condițiile de garanție etc.

Produsul este destinat persoanelor care au grija de copii cu dizabilități (părinți, asistenți medicali, etc) care vor fi transportați cu ajutorul căruciorului.

Este destinat și pentru doctori dar și pentru specialiști în recuperare.

ATENȚIE: Citiți integral prezentul manual înainte de folosirea căruciorului !

Acest manual se va revinde odată cu căruciorul! Va fi păstrat pentru a putea fi verificat atunci când întâmpinați dificultăți de orice fel în folosirea căruciorului.

ATENȚIE! În cazul unor incidente legate de căruciorul nostru aveți obligația de a ne anunța imediat prin scris sau email.

Detaliile producătorului:

- adresa poștală: MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Poland
- numărul de telefon: +48 32 733 11 31
- adresa de email: mywam@mywam.pl



Versiunea manualului: **RO Edition 7 / 2022-10-25**

CUPRINS

▪	Introducere	5
1.	Utilizarea caruciorului YETI/ YETI YOUNG.....	5
2.	Informații de bază.....	5
3.	Inceput rapid	6
▪	Siguranța.....	7
4.	Instrucțiuni importante și reguli de siguranță	7
5.	5.1 PLACUȚA DE IDENTIFICARE	8
	5.2 Plăcuță cu cod UDI	8
6.	ETICHETELE DE AVERTIZARE	8
7.	SIMBOLURI.....	8
▪	Produsul.....	9
8.	Construcția generală a căruciorului.....	9
9.	Configurarea și folosirea căruciorului.....	11
9.1	Mecanismul de pliere al ramei	11
9.2	Defacerea ramei	11
9.3	Plierea ramei	12
9.4	Siguranța pentru transport.	12
9.5	Roțile pivotante din față. Blocarea direcției de mers.....	12
9.6	Rotile din spate. Instalarea și scoaterea roților din axul lor	13
9.7	Sistemul de amortizare al roților.....	13
9.8	Mânerul ergonomic de împingere al căruciorului. Mecanismul de ajustare al acestuia.	13
9.9	Frâna centrală. Activarea și dezactivarea ei	14
9.10	Picioarul de înclinare.....	14
9.11	Ajustarea ramei și adâncimii scaunului.....	14
9.12	Ajustarea ramei în vederea ajustării unghiului scaunului.	15
9.13	Ajustarea ramei în funcție de înălțimea spătarului	15
9.14	Ajustarea ramei în funcție de înclinarea spătarului	15
9.15	Suportul pentru picioare.....	16
10.	Configurarea și folosirea – scaunul terapeutic cu spătar	17
10.1	Tapiseria caruciorului. Adăugarea și scoaterea tapiseriei.....	17
10.2	Sistemul de tensiune din spatele căruciorului	18
10.3	Ajustările tapiseriei de pe scaun și de pe spătar	18
10.4	Hamul din 5 centuri	19
11.	Echipamentul adițional	19
11.1	Bara de protecție	19
11.2	Masa terapeutică	20
11.3	Centurile de stabilizare	20
11.4	Kitul de micșorare a scaunului	20
11.5	Suportul pentru cap	21
11.6	Baldachinul ajustabil cu fereastră	21
11.7	Geanta de călătorie.....	22

11.8	Coșul pentru cumpărături	22
11.9	Perna tip wedge	22
11.10	Protecția de ploaie	23
11.11	Mănușile de iarnă	23
11.12	sac de dormit pt. iarna	24
11.13	Plasă de țânțari	24
11.14	Umbrelă de soare.....	24
12.	Specificații tehnice	25
12.1	Material composition of the stroller	25
13.	Livrarea si unelele	25
14.	Asamblarea si dezasamblarea caruciorului	26
15.	Pregătirile înainte de utilizarea căruciorului	27
16.	Folosirea caruciorului	27
16.1	Transportarea căruciorului	27
16.2	Punerea și scoaterea copilului din cărucior	27
16.3	Poziția corectă în cărucior.....	28
16.4	Conducerea căruciorului	28
16.5	Conducerea căruciorului pe suprafețe în pantă	28
16.6	Pragurile și curbele	28
16.7	Transportul căruciorului în mașină și în alte vehicule.....	28
16.8	Curățarea și îngrijirea	29
17.	Depozitarea caruciorului	29
17.1	Pregătirea caruciorului pt. depozitare îndelungată	29
17.2	Protecție împotriva coroziunii	29
18.	Revânzarea	30
19.	Service-ul și inspecțiile periodice	30
20.	Aruncarea căruciorului.....	30
21.	Certificat conformitate norme europene.....	31
22.	Notite	32
23.	Service-uri autorizate	33
24.	Cardul de garanție	34
25.	Condiții de garanție	34

▪ Introducere

Multumim pentru achiziționarea caruciorului special Yeti/Yeti Young pentru tineri și adulți. Sperăm să fie motivul multor momente speciale petrecute alături de copilul dvs. și ca vă va fi folositor în fiecare zi. Facem eforturi mari ca produsele noastre să fie conforme cu așteptările dvs. Nu ezitați să ne urmăriți pe toate platformele noastre sociale și să vizitați site-ul nostru pentru mai multe informații, de altfel nu ezitați să ne contactați pentru orice nelămurire legată de produsele noastre. www.mywam.eu

1. Utilizarea caruciorului YETI/ YETI YOUNG

Yeti/ YETI YOUNG este un cărucior multifuncțional destinat pentru copii cu dizabilități. Căruciorul are o ramă de aluminiu cu elemente de fier. Permite scoaterea fără dificultate a roților sau a suportului pentru cap. La căruciorul nostru se pot atașa o varietate de accesorii pentru a spori funcționalitatea acestuia: masă, centuri de siguranță, wedge, baldachin, plasa de tantari, sac de dormit, cos pentru cumpărături, etc. Utilizatorii nu pot folosi căruciorul singuri ci doar ajutați de un părinte/adult/asistent medical etc. Căruciorul poate fi folosit atât înăuntru cât și afară pe diferite suprafețe: asfalt, beton, pamant, etc., cât și în diferite condiții meteo datorită multitudinii de accesorii atașabile. Altă folosire a căruciorului în afară de cele prezentate în manual este strict interzisă. Căruciorul trebuie folosit doar conform prezentului manual și doar de un adult. Conducerea căruciorului de către copii, adolescent și/sau persoane neinstruite este strict interzisă. Căruciorul special "Yeti" și căruciorul special pediatric YETI Young este un dispozitiv medical de clasa I menit să fie folosit de copii cu dizabilități care, datorită condiției lor, nu pot merge sau sta "în fund" singuri. Produsul este util pentru transportul copiilor cu dizabilități dar și pentru corectarea posturii acestora. Indicații clinice: pentru copii care suferă de paralizie cerebrală, meningită, distrofie, paralizie, etc. Produsul este recomandat pentru copii între 130-175 cm.

Contraindicații:

În caz de contraindicație a poziției șezând și/sau poziționării verticale pasive, reglarea căruciorului trebuie consultată cu un kinetoterapeut sau cu medicul curant.

2. Informații de bază

Opțiunile caruciorului, e.g.:

- Ajustarea spătarului (vezi punctul 9.14)
- Ajustarea înălțimii spătarului (vezi punctul 9.13)
- Ajustarea unghiului scaunului (vezi punctul 9.12)
- Ajustarea adâncimii scaunului (vezi punctul 9.11 și 11.13)
- Ajustarea suportului pt. picioare (vezi punctul 9.15)
- Stabilizarea capului (vezi punctul 11.5)
- Stabilizarea trunchiului (vezi punctul 10.4, 11.3, 11.4, 11.9)
- Echipament opțional (vezi punctul 11)

3. Inceput rapid

Pentru a incepe sa folosesti caruciorul, acesta trebuie despachetat si pregatit pentru folosire conform punctului 14 si a punctului 15. Mai jos aveti o scurta pictograma care nu va inlocui insa citirea cu atentie a intregului manual.



▪ Siguranta

4. Instrucțiuni importante si reguli de siguranță

Sfaturi generale

- Este interzisă folosirea necorespunzătoare a caruciorului!
- Produsul contine componente mici – PERICOL DE INGHITIRE !
- Căruciorul are o posibilitate de ajustare foarte mare – aveți grijă ca in timpul ajustarilor capul copilului sa nu ajunga sub linia pelvisului acestuia – PERICOL DE SUFOCARE.
- ESTE INTERZISĂ folosirea de rucsacuri sau geți atârinate de spătar – acest lucru poate duce la rasturnarea căruciorului si la rănirea copilului dvs. Daca aveți nevoie de spațiu suplimentar de depozitare folosiți doar accesoriile originale compatibile cu caruciorul dvs.
- ATENTIE! In functie de modificarile si ajustarile pe care le faceti caruciorului acesta isi poate modifica dimensiunile!
- ATENTIE ! De fiecare data, inainte de folosire, trebuie urmati toti pasii din prezentul manual si caruciorul trebuie verificat sa nu aiba defectiuni care sa puna in pericol siguranta dvs. si a copilului dvs. Pentru orice nelamurire nu ezitati sa ne contactati.
- ATENTIE! Atunci cand treceti cu caruciorul printr-un spatiu care are usi, asigurati-va ca este destul spatiu in lateralele caruciorului.

ATENTIE!



- NU VA LASATI NICIODATA COPILUL NESUPRAVEGHEAT IN CARUCIOR.
- ACEST PRODUS NU ESTE MENIT PENTRU ALERGARE SI/SAU PATINE CU ROTILE.
- Produsul nu se va folosi ca scaun de masina.
- Nu carati/ ridicati caruciorul in timp ce copilul dvs. se afla in scaun.
- Caruciorul este impachetat intr-o punga de plastic. Punga de plastic nu este jucarie si trebuie tinuta departe de copii – PERICOL DE SUFOCARE
- **ATENTIE! Este interzisa folosirea caruciorului atunci cand nu sunteti siguri ca acesta este intr-o conditie perfecta sau daca suspectati ca una din partile componente ale caruciorului este defecta. Daca aveti orice suspiciune legata de siguranta caruciorului va sfatuim sa nu il folositi si sa ne contactati cat de repede posibil.**

5. 5.1 PLACUȚA DE IDENTIFICARE

- Plăcuța de identificare conține: numele caruciorului, modelul, numărul de serie, greutate maximă admisă, data producerii, semnul CE, marca de dispozitiv medical și anumite atenționări. (vezi Fig. 5.1).
- Plăcuța este localizată pe traversa, în spatele ramei, pe partea stângă, lipită deasupra.

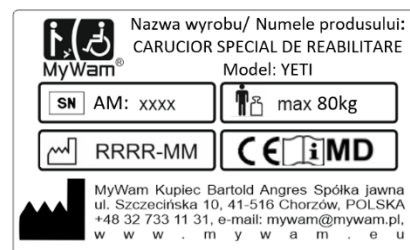


Fig.5.1

5.2 Plăcuță cu cod UDI

Plăcuța cu codul UDI include următoarele informații: numele, modelul, codul UDI, detaliile producătorului (vezi Fig. 5.2)



Fig. 5.2

6. ETICHETELE DE AVERTIZARE

- Conțin avertizări care vizează utilizatorul (see Fig. 6.1).
- Sunt localizate în spatele ramiei, pe stânga și pe dreapta.

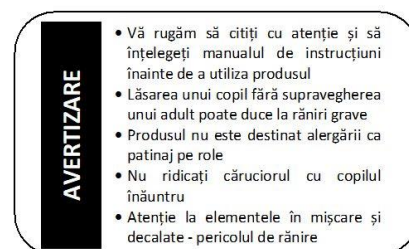
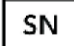









Fig. 6.1

7. SIMBOLURI

 Număr de serie	 Numele producătorului
 Greutate maximă admisă	 Produsul este un dispozitiv medical
 Data producerii	
 Conformitate cu normele europene	 Semnul folosit pentru a atrage atenția cititorului privind anumite pericole.
 Avertizare – folosirea căruciorului conform prezentului manual de utilizare.	

▪ **Produsul.**

8. Construcția generală a căruciorului

Caruciorul special "Yeti" si caruciorul special pediatric YETI Young este alcătuit din două părți : rama de aluminiu si scaunul terapeutic. YETI / YETI Young oferă o varietate de accesorii pentru diferitele nevoi pe care le puteți avea.

• **Rama din fier cu scaun si spatar**

Elementele de baza:



- 1- Maner ergonomic de impingere a caruciorului -vezi 9.8
- 2- Ajustare pe snur a tapiseriei in exces. - vezi 10.3
- 3- Centura in 5 puncte - vezi 10.4
- 4- Tapiserie - vezi 10.1
- 5- Slit pt. depozitarea tapiseriei in exces - vezi 10.1
- 6- Invelitoare pentru rama - vezi 10.1
- 7- Support pt. picioare ajustabil - vezi 9.15
- 8- Picior de inclinare - vezi 9.10
- 9- Frana centrala - vezi 9.9
- 10- Sistem amortizare roti din spate - vezi 9.7
- 11- Rotile din spate - vezi 9.6

- 12- Ajustarea manerului de impingere - vezi 9.8

- 13- Mecanismul de pliere al ramei -vezi 9.1
- 14- Ajustarea spatarului - vezi 9.14

- 15- Ajustarea adancimii scaunului - vezi 9.11
- 16- Ajustarea unghiului scaunului - vezi 9.12
- 17- Ajustarea inaltimei scaunului - vezi 9.13
- 18- Blocarea sistemului de pliere al ramei - vezi 9.3
- 19- Ajustarea suportului pt. picioare(unghi de inclinare) - vezi 9.15

- 20- Ajustarea inclinarii spatarului - vezi 9.14
- 21- Siguranta pt. trasnport - vezi 9.4
- 22- Ajsuatarea lungimii suportului pt. picioare - vezi 9.15
- 23- Mecanismul rapid de asamblare al rotilor - vezi 9.6
- 24- Blocarea directiei rotilor din fata - vezi 9.5
- 25- Rotile din fata - vezi 9.5



9. Configurarea si folosirea căruciorului

9.1 Mecanismul de pliere al ramei

Mecanismul de pliere al ramei este localizat inaintea ramii in doua puncte pe dreapta si in trei puncte pe stanga.

- Plierea stanga – dreapta - un element care ajuta la plierea partii de sus a caruciorului pentru a ii reduce dimensiunile.
- Mecanismul de pliere si siguranta pt. transport.

9.2 Defacerea ramei

Pentru a desface rama: plasati rama pe un suprafata solida, orizontala si desfaceti siguranta pentru transport. (Fig. 9.2.1). Ridicati usor spatarul in pozitie dreapta.

(Fig. 9.2.2.).



Fig. 9.1



Fig.9.2.1



Fig. 9.2.2

Pentru a seta caruciorul trageti in sus de mâner in timp ce aduceti caruciorul in pozitia dorita. (Fig. 9.2.3) până când mecanismul de blocare se activează. (Fig. 9.2.4) Acest lucru este evidențiat de un clic.



Fig.9.2.3



Fig.9.2.4

9.3 Plierea ramei

Pentru a închide (plia) rama caruciorului, dezactivați mecanismul de blocare prin ridicarea lui și prin tragerea de manerele de pliere ale ramei în același timp. (Fig.9.3) Apoi pliați rama înspre roțile din față. Asigurați-vă că manerul de împingere nu se întâlnește cu suportul pentru picioare. Trageți apoi de mecanismul spatarului. Aplicați siguranța pentru transport.



Fig. 9.3

9.4 Siguranța pentru transport.

Căruciorul este prevăzut cu o siguranță pentru transport care va asigura că rama pliată nu se va deschide accidental în timpul transportului. Siguranța este formată dintr-un ochet și o tijă de blocare.

Pentru a securiza rama, pliați-o și apoi atașați siguranța de transport, puneți ochetul peste tija de blocare astfel încât aceste două elemente să se suprapună. (Fig. 4.4.).

Pentru a deschide siguranța, înainte de deschiderea ramei, îndepărtați ochetul de pe tija de blocare și desfaceți rama în siguranță.



9.5 Roțile pivotante din față. Blocarea direcției de mers

Rotile durabile asigură confortul atât pt. cel care conduce căruciorul cât și pentru cel aflat în scaun. Anvelopele sunt fără cameră și sunt umplute cu gel special care absoarbe șocurile.

Ambele roți din față pot fi blocate să meargă doar înainte sau pot fi pivotante (se pot răsuci la 360 de grade) creând un confort în plus pentru cel care conduce căruciorul.

Este recomandat să deblocați direcția de mers a roților atunci când conduceți căruciorul pe suprafețe plane (centrele comerciale, școli, etc).

Este recomandată blocarea direcției roților în caz de suprafețe în pantă, suprafețe alunecoase, curbe, obstacole etc. Pentru a preveni rotirea roților puneți butonul în spațiu special creat - vezi Fig. 9.5.1. Pentru a debloca direcția de mers a roților rotiți butonul de blocare și lăsați-l în afara spațiului special destinat. -



vezi Fig. 9.5.2.



9.6 Rotile din spate. Instalarea si scoaterea rotilor din axul lor

Rotile durabile din spate asigura confort atat celui care conduce cat si celui care utilizeaza caruciorul nostru. Anvelopele sunt fara camera si sunt umplute cu un gel special care absoarbe socurile.

Posibilitatea scoaterii rotilor dupa plierea ramei asigura micșorarea caruciorului in vederea depozitarii lui.

Mecanismul de asamblare al rotilor este localizat inaintea rotilor din spate si asigura asamblarea si dezasamblarea rapida a acestora. Apasati pe clema de dezasamblare rapida (Fig. 9.6.1) spre centrul rotii si montati roata in axul ei.

- **Montarea roților pe ax**

Cand montati rotile din spate pe axul lor, apasati pe clema din centrul rotii si puneti roata la inceputul axului. Opriti-va din a apasa pe clemă si continuati să glisati roata în ax pana auziti un clic. Roata dvs. este montata corespunzator.

- **Scoaterea rotilor din ax**

Pentru a scoate roata, apasati pe clema spre centrul rotii si glisati roata in afara axului. Fig. 9.6.2.

9.7 Sistemul de amortizare al rotilor

Caruciorul este echipat cu sistem de amortizare pe perne cu arcuri al ramei si rotilor din spate, localizat la capatul picioarelor din spate ale ramei unde acestea intra în contact cu bara transversala. Sistemul de amortizare functioneaza automat. Ajustarea se face activând manerul "sus-jos" de sub mecanismul de absorbtie al socurilor. Pentru a facilita schimbarea setarilor manerului, aplicarea presiunii este permisă. Atunci cand mânerul este schimbat, arcul de absorbtie al socurilor va fi comprimat (optiune pentru pamant tare) sau extins (pamant moale).

9.8 Mânerul ergonomic de împingere al căruciorului. Mecanismul de ajustare al acestuia.

Manerul este folosit pentru a împinge căruciorul. Este făcut astfel încât să poată fi ajustat conform cerințelor dvs. - Fig. 9.8

- **Mecanismul de ajustare.**

Sunt doua butoane, in afara ramei, localizate la terminatiile mânerului de impingere.

- **Unghiul de ajustare al manerului**

Pentru a schimba unghiul manerului de impingere al caruciorului, apasati pe butoanele mentionate mai sus si ajustati manerul. Dupa ce ati setat manerul in pozitia dorita opriti-va din a apasa pe butoane – acest lucru va bloca instantaneu manerul in pozitia aleasa.



Fig. 9.6.1



Fig. 9.6.2

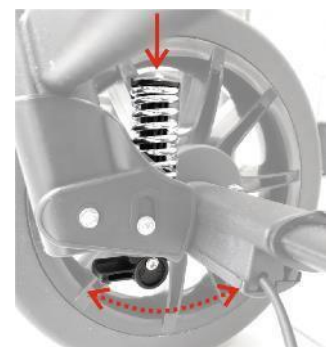


Fig. 9.7



Fig. 9.8

9.9 Frâna centrala. Activarea si dezactivarea ei

Pedala pentru frâna centrală (Fig. 9.9) – atunci când este apasată blochează cele două roți din spate. Este localizată în mijlocul bari transversale, în spatele ramei caruciorului.

- **Activarea si dezactivare franei**

Pentru a activa frana, apăsați pe pedala în jos până auziți un clic. Acest clic vă asigură că frana este activată corect.

Pentru a dezactiva frana, trageți de pedala în sus.



Fig. 9.9

9.10 Picioarul de inclinare.

Picioarul de inclinare (Fig. 9.10) este localizat în partea dreaptă a bari transversale. Pentru a îl folosi apăsați pe picioarul de inclinare și în același timp ridicați de manerul de împingere pentru a ridica roțile din față ale caruciorului.

Folosirea picioarului de inclinare face mai ușoară conducerea caruciorului în curbe și trecerea acestuia peste obstacole mici.



Fig. 9.10

9.11 Ajustarea ramei si adâncimii scaunului



Fig. 9.11

Căruciorul are opțiunea de a schimba adâncimea scaunului. Pentru a face asta, activați frana centrală astfel încât caruciorul să fie stabil, apoi desfaceți șuruburile din ambele părți ale ramei cu o cheie Allen și extindeți sau strângeți rama caruciorului în poziția dorită. Poziția corectă trebuie securizată prin strângerea înapoi a șuruburilor. (vezi Fig. 9.11.)

Ajustarea ramei se poate face între 30 de cm până la 45 cm. Ajustarea tapiseriei este prezentată în punctul 10.2 al prezentului manual.

9.12 Ajustarea ramei in vederea ajustarii unghiului scaunului.

Căruciorul are posibilitate de ajustare între 10° și 30° (din 5 în 5). Mecanismul de ajustare al unghiului scaunului este format dintr-un element tip "fagure" la care rama căruciorului se atașează cu un șurub.

Pentru a seta unghiul potrivit, activați frâna centrală astfel încât căruciorul să fie stabil, apoi desfaceți șurubul din ambele părți ale elementului tip "fagure" (vezi fig. 9.12), setați scaunul la unghiul la care aveți nevoie și strângeți șuruburile la loc în poziția corectă. O șurubelniță "Phillips" vă este necesară pentru a efectua această operație. (vezi Fig. 9.12.)



Fig. 9.12

9.13 Ajustarea ramei in functie de înălțimea spătarului

Căruciorul are un spătar cărui înălțime îi puteți ajusta. Pentru a face asta, activați frâna centrală astfel încât căruciorul să fie stabil, apoi desurubați șuruburile din ambele părți ale ramei cu o cheie "Allen" și extindeți sau glisați spătarul în poziția dorită. Securizați apoi poziția dorită strângând șuruburile la loc. Nivelul maxim este indicat prin încuietorea în formă de bilă. Ajustarea se poate face între 65 și 85 cm. (vezi Fig. 9.13).



Fig. 9.14

9.14 Ajustarea ramei in functie de inclinarea spatarului

Căruciorul este prevăzut cu un sistem de ajustare a înclinării spătarului. Acesta poate fi ajustat dintr-o poziție verticală la una orizontală. Acest lucru este posibil din cauza mecanismului care

conține: un cablu de desfacere, câte o închizătoare tip fagure pe stanga și pe dreapta (element cu o scară de 8 puncte) și tije pentru a fixa poziția. (vezi Fig. 9.14.1).

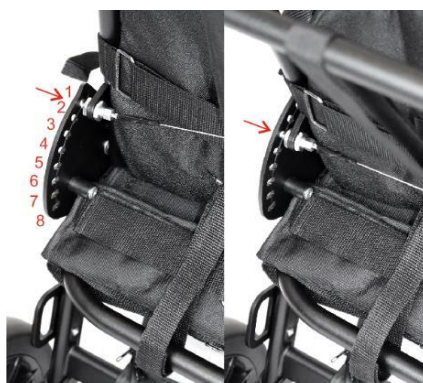


Fig. 9.14.1

Pentru a schimba unghiul de înclinare al spătarului, activați frâna centrală pentru a vă asigura stabilitatea căruciorului și trageți de cablul de eliberare în sus. (vezi Fig. 9.14.2)

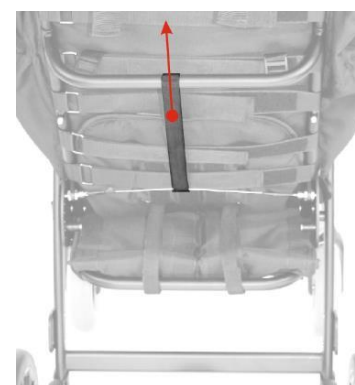


Fig. 9.14.2

Ajustați spătarul la nivelul care este cel mai comod. Spătarul ar trebui să se blocheze în poziția dorită în momentul în care dați drumul cablului – fapt care ar trebui să activeze siguranța de blocare. În momentul în care auziți clicul de blocare pe ambele părți ale ramei puteți fi siguri că spătarul scaunului este ajustat corect.

Atunci cand schimbați nivelul de inclinare al căruciorului este necesar sa ajustati si tapiseria acestuia. (punctul 10.3. al prezentului manual)

Mecanismul de ajustare permite ajustarea acestuia in șase poziții diferite de la pozitia total verticală până la pozitia total orizontală.

ATENȚIE ! Dupa orice ajustare a spătarului este necesară și ajustarea hamului in 5 centuri

9.15 Suportul pentru picioare

Suportul pentru picioare este inclus in echipamentul standard si este format dintr-o platformă de sustinere a picioarelor atasata la rama suportului pentru picioare care are o posibilitate de ajustare in sapte pozitii diferite pornind de la 28.5cm si pana la 43.5cm.



Fig. 9.15.1

- **Ajustarea înălțimii platformei de susținere**

Pentru a schimba înălțimea platformei de susținere, deșurubati butoanele de pe suruburile care sustin suportul pentru picioare de pe ambele parti. Setati apoi inaltimea dorita si insurubati la loc suruburile asigurandu-le cu butoanele mai sus mentionate pana cand acestea sunt bine stranse. (Fig. 9.15.1)

- **Mecanismul de ajustare al unghiului de inclinare pt suportul de picioare.**

Mecanismul este localizat in fata scaunului si conecteaza scaunul de suportul pentru

picioare. Exista doua racorduri negre, din plastic cu butoane inaintea. (vezi Fig. 9.15.2) Mecanismul este folosit pentru a schimba unghiul de inclinare al suportului pentru picioare si va permite sa alegeti una din cele opt pozitii posibile ale acestuia. (intre 10° to -90°) Pentru a schimba pozitia de inclinare, apasati pe mecanismul de ajustare din ambele parti ale suportului pentru picioare, apoi setati suportul in pozitia dorita si opriti-va din a apasa pe butoanele mai sus mentionate. Mecanismul de ajustare, in timpul folosirii căruciorului, ar trebui acoperit cu invelitoarele special prevazute. (vezi punctul 10.2).



Fig. 9.15.2

- **Folosirea suportului pentru picioare.**

Este recomandată folosirea suportului pentru picioare la o înălțime la care picioarele copilului dvs. să se poată odihni pe toată suprafața platformei de susținere, în timp ce coapsele copilului dvs. sunt paralele cu suprafața scaunului. Platforma de susținere a picioarelor este prevăzuta cu centuri care sunt recomandate în timpul folosirii căruciorului.

In mod normal platforma de susținere este intr-o pozitie orizontală. Vă recomandăm ca în timpul depozitării sau transportării căruciorului să o pliați înspre rama acestuia.

10. Configurarea si folosirea – scaunul terapeutic cu spătar

10.1 Tapiseria caruciorului. Adaugarea si scoaterea tapiseriei

Tapiseria caruciorului este formata din: baza tapiseriei, tapiseria scaunului, tapiseria din spate si invelitoarele pentru rama.

- **Instalarea tapiseriei**

Înainte de ajustarea tapiseriei, ajustati rama : inaltimea spatelui, adancimea scaunului si inaltimea suportului pentru picioare trebuie sa fie ajustate conform nevoilor dvs. (Vezi punctul 7.12.)

Pentru a monta tapiseria, montați baza tapiseriei pe scaun ajutându-vă de benzile din VELCRO, intinzând tapiseria complet. Partea de sus a tapiseriei de baza este caracterizată de benzi din VELCRO longitudinale pe care se va atașa tapiseria. Montați benzile tapiseriei de baza, de jos în sus, înfășurându-le de rama căruciorului (din afară). Prima banda de VELCRO din laterala suportului pentru picioare este montată pe fragmentul de plastic al îndoitorii, dar dinăuntrul scaunului. Înfășurăm excesul de tapiserie care ramane în spatele scaunului. Baza tapiseriei trebuie să fie intinsa corespunzător permițând invelitoarelor pentru rama sa fie atasate în locurile unde scaunul se pliază (la contactul cu suportul pentru picioare în stânga si în dreapta).

Invelitoarele pentru ramă sunt gândite pentru a proteja utilizatorul căruciorului de partile in care acesta se pliază si a asigura confortul acestuia. Acestea trebuie montate cu VELCRO in josul elementelor de plastic ale locurilor de pliere.

Punem tapiseria pentru spate pe tapiseria de baza si o asigurăm cu centuri in spatele caruciorului înfășurând rama din afară. Dacă este folosită înălțimea minimă a spătarului, înfășurăm tapiseria in exces deasupra ramei si o ajustam cu centurile de ajustare la distanța optima. Dacă spătarul este la înălțimea lui maximă punem partea de sus pe rama si o trecem prin cataramă.

Pentru a monta invelitoarele laterale ale tapiseriei, este recomandat ca spatul sa fie reglat la un unghi de 45 de grade. Securizăm invelitoarele cu VELCRO pe stânga și pe dreapta căruciorului în două părți pe fiecare parte (acolo unde rama se pliază). După ce ajustăm spătarul scaunului într-o poziție verticală, colectam tapiseria in exces din parti cu ajutorul cablurilor cu cleme.

La final atasam tapiseria scaunului, aranjând-o si ajustând-o cu VELCRO la tapiseria de bază. Tapiseria in exces a spatelui se înfășoara în spate sub cablurile tapiseriei spatelui. Centura care ajuta la instalarea tapiseriei scaunului (atasata sub scaun, imbrăcând rama din afară) trebuie sa încapă peste primul VELCRO al tapiseriei de baza si nu trebuie sa interfereze cu invelitoarele pentru rama. Atașati, cu VELCRO, partea de jos a tapiseriei scaunului la tapiseria suportului pentru picioare.

Căruciorul are o banda suplimentara cu care tapiseria se ataseaza la bara de protectie. Dacă nu este nevoie de ea, poate fi ascunsa in slotul special dedicat. – vezi Fig. 10.1.

- **Scoaterea tapiseriei**

Scoatem tapiseria urmând pașii de mai sus in ordine inversă: defaceți centurile tapiseriei pentru scaun si scoateți tapiseria. Detașati lateralele tapiseriei spătarului si îndepărtați protecția pentru spătar. Desfaceți



Fig.10.1

toate centurile si scoateți tapiseria pentru spătar. Ultimul pas este să deschideti toate centurile tapiseriei de baza si să le scoateti de pe rama caruciorului. Tapiseria trebuie protejata pentru a nu se strica.

10.2 Sistemul de tensiune din spatele căruciorului



Fig.10.2.1



Fig.10.2.2

Sistemul ajustabil de tensiune este un set extensiv format din 14 centuri din Velcro, care permit intinderea scaunului si a spatelui in functie de nevoile copilului dvs.

Sistemul este format din 7 centuri din Velcro pentru partea de jos a scaunului si 7 centuri din Velcro pentru spatar si ajustările se fac prin tensionarea sau slabirea acestora. Datorita acestui mecanism este posibila, prabusirea intr-un punct sau intr-o maniera completa in scaun si in spatar. Acest mecanism asigura suportul prin compresie.

10.3 Ajustările tapiseriei de pe scaun si de pe spatar

- Scaunul poate fi ajustat de la 31 de cm pana la 45 de cm. Acest lucru este posibil prin extinderea ramei in parametrii recomandați. (vezi punctul 9.11) si prin ajustarea tapiseriei conform ramei. Pentru a ajusta adâncimea scaunului, indepartati tapiseria, ajustați rama pentru a schimba adâncimea scaunului, glisând rama până ajungem la pozitia dorită. Rama poate fi extinsă până la 15 cm. Atașati apoi tapiseria pe baza scaunului cu VELCRO. (vezi punctual 10.1).

- Spătarul poate fi ajustat de la 65 de cm pana la 85 de cm. Acest lucru este posibil prin extinderea ramei si prin ajustarea tapiseriei la parametrii necesari.

Pentru a schimba înălțimea spătarului, detașati partea de sus a tapiseriei de pe benzile de prindere din spatele căruciorului si ajustați partea de sus a ramei spătarului în pozitia dorita. Ajustarea poate fi de pana la 20 de cm. După ce ati ales pozitia dorita, aranjati partea de sus a tapiseriei adaptand-o dupa rama. Daca spatarul este la inaltimea minima, va trebui sa rulati ce va ramane din tapiserie. Tapiseria de sus trebuie asigurata cu centuri (cele de jos pentru inaltime minima – cele de sus pentru inaltimea maxima). Inainte de a va pune copilul in carucior ajustati tensiunea tapiseriei si a spatelui ajustand setul de centuri. (Fig. 10.3.1) (Fig. 10.3.2)

- Pentru o pozitionare corectă a lateralelor tapiseriei, cablurile trebuie ajustate. Pentru pozitia verticală a spatelui tapiseria in exces trebuie inlaturată cu ajutorul cablurilor. Inainte de a pune spătarul intr-o pozitie orizontala acestea trebuie slabite, dând posibilitatea tapiseriei să se “intinda” cat este necesar.



Fig. 10.3.1



Fig. 10.3.2

10.4 Hamul din 5 centuri



Fig.10.4.1

Yeti/Yeti Young este echipat standard cu un ham din 5 centuri. Centurile sunt ajustate la scaun din fabrică și nu trebuie îndepărtate deoarece asigură confortul și siguranța copilului dvs. în timpul folosirii caruciorului. (Fig. 10.4.1). Catarama în care centurile se închid facilitează scoaterea rapidă a copilului din scaun. (vezi Fig. 10.4.2) Elementele de reglare glisante sunt localizate pe centurile din stanga și din dreapta. Centurile sunt echipate additional cu o cataramă de închidere la nivelul pieptului. Acest element este unul important deoarece ajută la păstrarea dimensiunilor centurilor.

- **Ajustarea.** Ajustați centurile la nevoile copilului dvs. înainte de a le închide. Ajustați centurile glisând elementele de reglare în sus sau în jos în funcție de lungimea dorită.

- **Folosirea.** Pentru a vă pune copilul în hamul caruciorului, puneți centurile din stanga și din dreapta și asigurați-le în cataramă fixate de scaun. Pentru a putea scoate copilul din ham apăsați butonul de pe cataramă de la nivelul pieptului și pe cele de pe cataramă atașată de scaun și îndepărtați centurile.

ATENȚIE: ÎN URMA ORICAREI AJUSTĂRI ADUSĂ SCAUNULUI ȘI/SAU SPATARULUI VA TREBUI SĂ AJUSTAȚI DIN NOU ȘI CENTURILE HAMULUI.



Fig.10.4.2

11. Echipamentul adițional

11.1 Bara de protecție

Căruciorul poate fi echipat cu o bară de protecție care împiedică utilizatorul caruciorului să cada "spre față". Bariera de protecție se montează folosind același mecanism ca atunci când montați masa terapeutică, deci nu veți putea folosi ambele accesorii în același timp. (vezi Fig. 11.1)

Pentru a instala bara de protecție, deschideți cele două cleme de pe bara și glisați-le pe rama caruciorului în același timp.

Bara va fi corect instalată atunci când veți auzi un clic.

Pentru a scoate bara de protecție trageți de ambele siguranțe ale ramei în același timp și îndepărtați bara de protecție.



Fig. 11.1

11.2 Masa terapeuțica

YETI/ Yeti Young poate fi prevăzut cu o masă terapeuțică, dintr-un material care nu alunecă și care poate suporta o încărcătură de maxim 3 kg. Masa se atașează la ramă cu același mecanism ca și bara de protecție deci nu pot fi folosite în același timp. (vezi Fig. 11.2).

Pentru a asambla masa, deschideți clemele și glisați-le simultan pe rama căruciorului până auziți un clic.

Pentru a dezambla masa, scoateți ambele sigurante în același timp și scoateți masa.



Fig.11.2

11.3 Centurile de stabilizare



Fig.11.3.1

Centurile de stabilizare sunt folosite pentru un suport pelvin adițional și previn alunecarea copilului dvs. din cărucior. Modul corect de a le folosi este să asigurăm copasele copilului în așa fel încât zona lui pelvina să fie cât mai apropiată de spătarul scaunului. Acest lucru va asigura o poziție mai corectă și mai sănătoasă a copilului.

- **Ajustare.** Pentru a ajusta lungimea centurilor trebuie să mutăm dispozitivele de reglare în sus sau în jos în funcție de lungimea pe care ne-

o dorim.

- **Folosire.** Pentru a putea folosi centurile, înfășurați picioarele copilului dvs. și asigurați centurile închizându-le în cataramele din față.



Fig. 11.3.2



Fig. 11.3.3

11.4 Kitul de micșorare a scaunului

Căruciorul este prevăzut cu inserții vezi (fig.11.4) care vor fi folosite pentru a micșora spațiul din scaunul căruciorului. Aceste inserții sunt detașabile (prevăzute cu fermoar).

- **Asamblare:** Inserțiile se pun în scaunul căruciorului și se adaptează la toate ajustările scaunului. Se atașează printr-un material Velcro.

Scoaterea inserțiilor se face prin simpla tragere a acestora de pe tapiseria scaunului.

11.5 Suportul pentru cap

Suportul pentru cap este folosit pentru stabilizarea capului utilizatorului și este un element moale, care asigură confort și siguranță. (Fig. 11.5). Tapiseria suportului este detașabilă datorită fermoarului și din acest motiv este ușor de scos și de pus la loc.

- Montați suportul pentru cap cu VELCRO la înălțimea dorită.
- Dezasamblarea : îndepărtarea suportului și a centurilor de Velcro de pe spătarul scaunului.



Fig.11.4



Fig. 11.5

11.6 Baldachinul ajustabil cu fereastră

Caruciorul poate fi prevăzut cu un baldachin ajustabil cu fereastră care ajută la protejarea copilului dvs. de soare sau ploaie. Elementele din care este format baldachinul sunt: rama baldachinului, mecanismul de ajustare al baldachinului, două sisteme de prindere cu butoane roșii care atasează baldachinul la rama caruciorului, tapiseria baldachinului și o plasa de tantari cu fermoar.



Fig. 11.6.1

- **Asamblare.** Elementele de atașare al badacinhului de carucior sunt două elemente din plastic localizate în părțile exterioare al spătarului.

Pentru a instala baldachinul, plasați spătarul într-o poziție verticală și apoi glisați prinzătoarele baldachinului în locurile speciale de pe spătarul căruciorului. Montați baldachinul astfel încât tapiseria din spatele baldachinului să se suprapună cu spătarul scaunului. Fiti siguri că elementul de ajustare al baldachinului este sigur cu tapiseria înăuntru. Acest lucru poate fi făcut întinzând tapiseria și prin plasarea buclei de prindere peste butonul din colțul baldachinului. (Fig. 11.6.1)



Fig.11.6.2

- **Dezasamblare.** Pentru a dezambla baldachinului apăsați pe cele două butoane roșii de pe prinzătorile de sus și de pe cele din laterale și glisați prinzătorile în din locurile speciale de pe rama caruciorului.

- **Folosire.** Pentru a schimba dimensiunea baldachinului, apăsați arcul din față și arcul din spate și apropiați sau departați arcurile în funcție de mărime dorită. Mecanismul de ajustare a baldachinului se blochează automat.

O caracteristică specială a baldachinului nostru, este fereastra care este prevăzută cu o plasa de tantari. Fereastra se închide și se deschide cu ajutorul unui fermoar. (vezi .11.6.2).

11.7 Geanta de calatorie

Aceasta este montată pe cele două mâner aflate în interiorul mânerului de împingere al căruciorului. (vezi Fig. 11.7)

Încărcătura maximă a genții este de 2 kg.



Fig.11.7



Fig. 11.8

11.8 Coșul pentru cumpărături

Familia de cărucioare Yeti poate fi prevăzută cu un cos pentru cumpărături. (Fig. 11.8.) care poate fi folosit pentru depozitarea sau transportarea lucrurilor de zi cu zi. Este rezistent la impact și la șocuri. Este montat în partea de jos a scaunului și se montează înfășurându-l în jurul ramei și asigurându-l cu un fermoar.

Încărcătura maximă este de 3 kg.

11.9 Perna tip wedge

Familia de cărucioare Yeti poate fi prevăzută cu o pernă wedge, care poate fi folosită la ajutorul stabilizării poziției picioarelor copilului dvs. și se montează de obicei între picioarele copilului. (Fig. 11.9.1.),

- **Asamblare.** Wedge-ul este montat în partea din față a căruciorului, la elementul care conectează tapiseria de bară de protecție. (vezi Fig. 11.9.2) Pentru a atașa wedge-ul asigurați partea dedicată a tapiseriei la bară de protecție și atasează wedge-ul folosindu-vă de VELCRO. Wedge-ul poate fi atașat în față sau în spatele centurii de conectare, ajustând distanța în funcție de copilul dvs. Pentru a îl asigura, înfășurați wedge-ul cu o centură.



Fig. 11.9.1



Fig. 11.9.2

- **Dezasamblare.** Pentru a scoate wedge-ul, scoateți centura cu care l-ați securizat și detașați wedge-ul de centura cu care conectează tapiseria la bară de protecție.



Fig.11.10

căruciorului. Apoi mănușile se pun pe bucățile de arici și se securizează cu închizătorile special prevăzute.

11.10 Protecția de ploaie

Familia de cărucioare Yeti poate fi echipat cu o protecție pentru ploaie care va da posibilitatea folosirii caruciorului și în condiții meteo mai nefavorabile și are rolul păstrării tapiseriei uscate. Acest echipament optional se montează peste alt echipament optional – baldachinul ajustabil. Pentru a monta protecția, plasați-o peste întregul baldachin ajustabil și acoperiți scaunul și suportul pentru picioare. (see Fig. 11.10).

11.11 Mănușile de iarnă

Mănușile de iarnă sunt pentru cel care manevrează și conduce căruciorul (părinte, asistent medical, etc) Acestea ajută părintele să împingă căruciorului chiar și în condiții termice neplăcute, temperaturi scăzute (vezi Fig.11.11) Prima oară se atașează bucățile de arici de mânerul de împingere al



Fig. 11.11

11.12 sac de dormit pt. iarna

Familia de cărucioare Yeti poate fi prevăzută cu un sac de dormit pentru iarnă. (see Fig. 11.12). Sacul de dormit se atașează la bara de protecție.

Pentru a monta sacul de dormit, puneți-l pe suportul pentru picioare de dedesubt și atașați-l la bara de protecție.

11.13 Plasă de țânțari

Căruciorul poate fi prevăzută cu o plasă de țânțari (see Fig. 11.13). Acest accesoriu adițional trebuie să fie compatibil cu celelalte accesorii. Puneți plasa de țânțari de sus, peste baldachin și acoperiți în întregime scaunul dar și suportul pentru picioare.



Fig.11.12



Fig.11.13

11.14 Umbrelă de soare

Familia de cărucioare Yeti poate fi prevăzută cu o umbrelă care are rolul de a proteja copilul de soarele puternic. Pentru a o instala glisați umbrela în locul special situat pe rama căruciorului. (vezi Fig. 11.14.2)



Fig.11.14.1

Fig.11.



12. Specificații tehnice

Lungimea caruciorului	114,5 - 146 cm
Lățimea	66cm
Inălțimea	117-138 cm
Greutate totala	24 - 28,6 kg
Adâncimea scaunului	31-45 cm
Lațimea	28* / 43 cm
Inălțimea spatarului	65 - 85cm
Lățimea	25*/42 cm
Distanța dintre sup. pt picioare si scaun /numarul de ajustari	28,5 - 43,5 cm / 7 pozitii
Lungimea caruciorului pliat	110 cm
Lățimea caruciorului pliat	66cm
Inălțimea caruciorului pliat	50 cm
Capacitatea coșului pt. cumparaturi	3 kg
Capacitatea genții de călătorie	2 kg
Greutatea maximă a utilizatorului	80kg
Inălțimea utilizatorului	130-175 cm
Unghiurile scaunului / nr.de ajustari	ok 9,5°-29° / 5
Unghiurile spatarului/nr.de ajustari	ok 3°-99° / 8 +intins
Unghiurile suportului pt.picioare/nr.de ajustari	ok 80°-180° /6 pozitii

COMENTARII *) Valorile evidentiate cu

Toleranta valorilor evidentiate cu * +/- 20mm, +/- 1.5kg, +/- 1 °

Producatorul isi rezerva dreptul de a face ajustari privind parametrii tehnici ai caruciorului.

12.1 Material composition of the stroller

Fier si aluminium, materiale 100% polyester and plastic (PP, PCV, ABS, PA, PE, PU).

13. Livrarea si unelele

Carucior este livrat intr-o cutie de carton, pre-asamblat. Pachetul contine:

- Rama pliata, scaun, spatar si suport pentru picioare
- Echipamentul optional comandat
- Manualul de utilizare si cardul de garantie

Înainte de folosire asigurati-va ca pachetul contine tot ce ati comandat si ca niciunul din elemente nu a fost stricat sau spart in timpul transportului. In cazul in care una din parti lipseste sau este stricata contactati vanzatorul si/sau producatorul pentru a putea primi elementul lipsa sau inlocui elementul stricat.

Datorita multifunctionalitatii si echipamentului suplimentar care poate fi atasat la caruciorul dvs. acesta poate fi personalizat pentru a se adapta cat mai bine nevoilor dvs. Pentru a face asta cititi integral prezentul manual.

Nu aveti nevoie de unelte pentru a asambla sau dezambla caruciorul.

O surbelniță Philips este necesară pentru ajustarea suportului pentru picioare. O cheie Allen este necesară pentru ajustarea înălțimii spatarului și a adâncimii scaunului.

14. Asamblarea și dezasamblarea caruciorului

- Asamblarea căruciorului. Produsul se livrează pre-asamblat. Pentru a continua asamblarea urmați pașii:
 - b) Montați roțile din spate - vezi punctul 9.6
 - c) Defaceți rama cu suport pt. picioare și ajustați:
 - Activează/dezactivează blocarea direcției roților din față – vezi punctul 9.5
 - Ajustați înălțimea și înclinarea manerului de împingere – vezi punctul 9.8
 - Ajustați adâncimea scaunului – vezi punctul 9.11
 - Ajustați înclinarea scaunului – vezi punctul 9.12
 - Ajustați înălțimea spatarului – vezi punctul 9.13
 - Setați înclinarea spatarului – vezi punctul 9.14
 - Ajustați lungimea centurilor – vezi punctul 10.4
 - Ajustați înălțimea și înclinarea suportului pentru picioare – see point 9.15
 - d) Ajustați tapiseria – vezi punctele 10.1, 10.2, 10.3
 - e) Instalați accesoriile și faceți ajustările necesare (echipament optional):
 - Ajustați lățimea scaunului – vezi 11.4
 - Ajustați suportul pentru cap – vezi 11.3
 - Ajustați baldachiunul cu fereastră – vezi 11.6
 - Instalați și ajustați perna wedge – vezi 11.9
 - Instalați geanta de călătorie - vezi 11.7
 - Instalați cosul de cumpărături – vezi 11.8
 - Instalați echipamentele destinate diferitelor sezoane:
 - sac de dormit pentru iarnă – vezi 11.12
 - Manusi de iarnă – vezi 11.11
 - plasa de tantari – vezi 11.13
 - protecție de ploaie – vezi 11.10
 - umbrella de soare – vezi 11.14
- Dezmembrarea caruciorului. Pentru a dezmembra caruciorul:
 - a) Scoateți tot echipamentul suplimentar
 - b) Desfaceți tapiseria (elementele laterale)
 - c) Blocați roțile din față; pliați rama caruciorului
 - d) Desfaceți roțile din spate
 - e) Asigurați rama pliată cu siguranță pentru transport

15. Pregătirile înainte de utilizarea căruciorului

Înainte de folosire:

- Verificați ca toate componentele căruciorului să fie în perfectă stare de funcționare. În caz de piese defecte contactați producătorul și/sau vânzătorul.
- Verificați ca rama căruciorului să fie pliată conform instrucțiunilor și ca este blocată cu siguranță pentru transport.
- Verificați ca scaunul să fie corect atașat la rama căruciorului.
- Verificați ca toate roțile să fie instalate corespunzător și ca toate anvelopele sunt în perfectă stare de funcționare.
- Verificați ca frâna centrală să fie apăsată și ca aceasta funcționează corect.
- Faceți corect toate ajustările conform nevoilor copilului dvs.
- Verificați ca tapiseria scaunului să fie complet uscată.
- Securizați copilul ajutându-vă de toate elementele stabilizatoare ale căruciorului: inserțiile de micșorare, centurile, wedge-ul, suportul pentru picioare, etc.
- Asigurați-vă ca utilizatorul este îmbrăcat cu haine care acoperă punctele corpului care iau contact cu centurile și restul elementelor stabilizatoare.
- În cazul în care copilul dvs. are probleme cu incontinența urinară, o mușama suplimentară trebuie pusă pe scaunul căruciorului. Această mușama poate fi cumpărată din orice farmacie..

16. Folosirea căruciorului

16.1 Transportarea căruciorului

Cel mai bun mod de a transporta căruciorul este să vă folosiți de roți. În cazurile unde acest lucru nu este posibil din motive de siguranță, căruciorul poate fi ridicat și transportat după ce toate echipamentele suplimentare au fost scoase. (incluzând roțile – pentru a îl face mai ușor) Atunci când transportați sau ridicați căruciorul, transportați-l folosind părțile fixe ale ramei. Din motive de siguranță nu încercați să ridicați căruciorul atunci când toate echipamentele suplimentare și roțile sunt atașate. Nu ridicați căruciorul de bara de siguranță, de masa de terapie sau de orice alt echipament suplimentar atașat.

16.2 Punerea și scoaterea copilului din cărucior

Atunci când puneți copilul în cărucior aduceți căruciorul cât de aproape posibil de o suprafață sigură. După ce ați apăsat frâna și ați ridicat suportul pentru picioare puteți pune copilul în cărucior.

Nu vă sprijiniți de suportul pentru picioare, acest lucru poate răsturna căruciorul și poate provoca ranirea dvs. sau a copilului dvs. Atunci când scoateți copilul din cărucior, asigurați-vă că acesta nu se sprijină de



Fig.16.1

suportul pentru picioare – acest lucru poate duce la rasturnarea caruciorului, provocand ranirea dvs. si a copilului dvs.

16.3 Poziția corectă in cărucior

Din motive de sănătate si siguranță, este recomandat ca zona pelvina si spatele copilului dvs. sa fie cat mai aproape de spatar.

Coapsele utilizatorului trebuie sustinute de scaun in toata lungimea lor (ajustarea adancimii scaunului si picioarele trebuie sustinute de suportul pentru picioare. (veti impiedica alunecarea copilului dvs, din carucior). O poziție corectă a picioarelor este esențiala în vederea menținerii unui tonus muscular bun in membrele inferioare ale corpului.

Datorită optiunilor mari de ajustare a scaunului si a spatarului este posibila ajustarea pana ce capul copilului dvs sa fie sub zona pelvina. Aceasta pozitie este strict interzisa deoarece poate duce la sufocarea copilului dvs.

16.4 Conducerea căruciorului

Atunci cand folosim cruciorul vom tine intotdeauna mainile pe manerul de impins. Dati drumul la frana centrala si impingeti de carucior intr-o directie sigura.

16.5 Conducerea căruciorului pe suprafete in panta

Poziționați căruciorul intotdeauna indreptat in față. Urcati cat de usor posibil. Trebuie sa aveti control asupra căruciorului in orice moment.

Trebuie să aveti intotdeauna in vedere faptul că centrul de greutate al căruciorului se schimbă in astfel de situatii. Atunci cand folositi rampe, verificați întotdeauna înainte de a urca căruciorul pe ea. Atunci când urcați pe o ramă asigurati-vă că roțile sunt destul de inainte pentru a o urca. Asigurati-va ca nu atengeti cu rama caruciorului panta pe care doriti sa o urcati. In aceste situatii cel mai indica teste sa mai fie inca un adult present.

16.6 Pragurile si curbele

Atunci cand trecem cu caruciorul peste obstacole mici, blocati piciorul de inclinare si apasati usor pe manerul de impingere pentru a ridica usor rotile din fata ale caruciorului. Treceti cu atentie rotile caruciorului peste obstacol. Ridicati apoi de manerul de impingere in sus pentru a ridica si rotile din spate. Treceti usor cu rotile din spate peste obstacol.

16.7 Transportul căruciorului in mașină si în alte vehicule

Pentru a transporta caruciorul in mașină, scoateți toate accesoriile si depozitați-le intr-un loc sigur. Dezmembrați apoi caruciorul, pliați-l si depozitati-l in partbagajul masinii.

Daca căruciorul demontat nu este depozitat în portbagaj departe de orice persoana din mașina, atunci acesta trebuie securizat foarte bine de suprafata din masina pe care il depozitati. Pentru a securiza caruciorul va puteti folosi de centurile de siguranta ale masinii. Pentru a transporta caruciorul in alt timp de vehicule : trenuri, autobuze, barci, avioane etc va rugam sa va informati inainte privind securitatea

transportarii caruciorului. Pentru a transporta caruciorul folosindu-va de orice alt mijloc de transport, indepartati toate accesoriile si depozitati-le in siguranta in bagajul dvs.

YETI / YETI YOUNG NU VA FI FOLOSIT CA SI SCAUN DE MASINA!

16.8 Curățarea și îngrijirea

Tapiteria căruciorului trebuie spălată de mână (temperatura apei – 30 de grade). Nu este permisă spălarea tapiteriei în mașina de spălat. Toate petele trebuie curățate cât de repede se poate.

Atentie! Nu curățați tapiteria cu soluții care conțin chimicale, solvent sau decoloranți. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice tip de deteriorare a caruciorului cauzată de folosirea de soluții neaprobate.

Nu insistați asupra petelor – acest lucru poate distruge țesătura

Asigurați-vă întotdeauna că tapiseria este uscată integral înainte de folosire.



Spalare manuala



Fara inalbitori



Nu uscati la masina



Uscati in pozitie
orizonatala



Nu folositi fierul
de calcat

In caz de pete de mâncare, bautura, ulei:

- Uscati pata folosindu-va de servetele de hartie

- Pentru a nu mări pata, inmuiați o bucată de material în detergent și apă caldă și apăsați pe pata.

Clătiți orice urmă de detergent. Uscati bine.

In functie de marimea petei procedura de mai sus va trebui sau nu repetata.

17. Depozitarea caruciorului

Depozitați caruciorul într-un loc curat, uscat și ventilat la o temperatură între 0 și 35 de grade.

17.1 Pregătirea caruciorului pt. depozitare îndelungată

Verificați ca toate componentele să fie în perfectă stare de funcționare și apoi depozitați caruciorul într-un loc curat, uscat și bine aerisit.

17.2 Protecție împotriva coroziunii

Pentru a evita coroziunea ramei de aluminiu caruciorul nu trebuie depozitat în locuri umede.

Atunci când rama se uda aveți grijă să o ștergeți și să o uscați înainte de depozitare.

Ștergeți partea de aluminiu cu o cârpă uscată îmbibată cu un ulei de protecție ușor.

Curățarea și ungerea regulate a ramei de aluminiu cu lubrifianți de protecție, asigură o viață mai lungă caruciorului dvs.

18. Revânzarea

Acest produs se poate revinde.

Produsul bine îngrijit are o perioadă de viață de 3 ani.

Pentru revânzarea produsului parcurgeți următorii pași :

- Inlocuiți toate bucatile de tapiserie cu unele noi.
- Rama caruciorului trebuie curată și dezinfectată.
- Produsul trebuie verificat de un service autorizat (capitolul 23)
- Toate părțile componente care prezintă urme de uzură ar trebui înlocuite cu componente noi.
- Doar produsele care trec prin pașii de mai sus pot fi revândute.

19. Service-ul și inspecțiile periodice

Pentru folosirea în siguranță a produsului acesta trebuie verificat periodic.

Pentru situațiile în care persoana care a cumpărat caruciorul nu poate întreprinde aceste activități singur, caruciorul ar trebui trimis la service-urile autorizate sau la producător, contracost.

Toate reparațiile se vor face în service-uri autorizate și/sau direct la producător.

Se vor folosi doar accesoriile originale ale caruciorului.

Verficările trebuie făcute:

- De fiecare dată înainte de folosirea caruciorului:
 - b. Verificați frâna centrală – după activare ambele roți din spate ar trebui să se blocheze.
 - c. Verificați ca toate accesoriile suplimentare să fie bine atasate. Fiti atenți în special la : sistemul de atasare al scaunului la rama, la sistemul de atasare al roților, funcționarea corectă a hamului, la mecanismul de blocare al înclinării, atasarea corectă a suportului pentru picioare.
 - d. Verificați condiția cauciucurilor.
- O dată pe luna:
 - e. Curățați caruciorul : Curățați toate componentele cu o cârpă moale și ungeți cu un ulei ușor partea de fier și aluminiu a caruciorului pentru a preveni coroziunea părților.
 - f. Verificați toate sistemele de atasare – toate butoanele și suruburile.
- O dată la șase luni
 - g. Verificați ca tapiseria să fie curată și inspecțati condiția generală a caruciorului.

20. Aruncarea căruciorului

Aruncarea și reciclarea : căruciorul folosit trebuie dus la un centru de reciclare conform cu legile reciclării din zona în care locuiți.

21. Certificat conformitate norme europene

Dispozitiv medical clasa I în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2017/745 din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale.

Producătorul a emis o declarație de conformitate corespunzătoare pentru produs, care este disponibilă pe www.mywam.eu

22. Notite

23. Service-uri autorizate

POLAND

MyWam Kupiec, Bartold, Angres spółka jawna

ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Poland

tel: +48 32 733 11 31

Website: www.mywam.eu

E-mail adress: mywam@mywam.pl

24. Cardul de garantie

Numar de serie:

Data achizitionarii: - -

Semnatura si stampila vanzatorului

.....
.....

25. Conditii de garantie

- Producatorul asigura cumparatorului o garantie de 24 de luni de la cumpararea caruciorului. Orice neplacere survenita in aceasta perioada va fi rezolvata gratis.
- Cumparatorul care are probleme cu caruciorul lui va trimite caruciorul bine ambalat spre reparare la vanzator sau producator.
- Orice defectiune survenita din folosirea neconforma a caruciorului nu se va repara in baza garantiei.
- Orice defectiune survenita din impachetarea incorecta a caruciorului nu se va repara pe baza garantiei.
- Pretul transportului va fi suportat de cumparator.
- Garantia va fi prelungita cu perioada in care caruciorul a fost reparat.
- Cumparatorul are dreptul la schimbarea caruciorului cu unul nou in caz ca, dupa reparare, acesta prezinta aceleasi probleme ca inainte.
- Caruciorul trebuie folosit in conformitate cu prezentul manual.
- Folosirea neconforma a caruciorului nu intra sub regulile garantiei.
- Facand orice modificare asupra caruciorului va veti anula garantia.
- Stricarea caruciorului prin : operarea gresita, ingrijirea gresita, depozitarea gresita etc, nu sunt acoperite de garantie.
- Producatorul avertizeaza asupra repararii caruciorului in service-uri neautorizate.
- Garantia valabila trebuie sa contina: Data cumpararii confirmata prin semnatura si stampila vanzatorului, tipul caruciorului si numarul de serie al acestuia.
- Garantia este valabila atata timp cat nu contine stersaturi sau corectari.
- Plangerile care nu intra sub garantie vor fi rezolvate conform cu prevederile legale ale codului civil.
- Toate plangerile legate de carucior trebuie adresate vanzatorului si/sau producatorului.