

PRODUCENT / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Sp. z o.o.

CE



**alfa***flex*

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



## INSTRUKCJA UŻYWANIA

Edycja 3 / 2025-09-01

**Wózek inwalidzki specjalny ALFA flex**

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.**

**UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

## PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Instrukcja używania przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi (asystentów - rodziców, opiekunów), które będą przewożone w wózku. Przeznaczona jest również dla lekarzy i rehabilitantów obsługujących wózki.

**UWAGA!** Przed przystąpieniem do użytkowania wózka, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i stosowania się do niej.

**UWAGA!** W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek incydentu medycznego związanego z wózkiem inwalidzkim ALFA flex, należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić o tym Producenta i właściwy organ państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania, kontaktując się poprzez list polecony lub e-mail za potwierdzeniem odbioru.

Dane kontaktowe producenta:

- adres pocztowy: MyWam Sp. z o.o., ul. Plebiscytowa 3, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polska
- numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31
- adres e-mail: [mywam@mywam.eu](mailto:mywam@mywam.eu)



Wersja Instrukcji używania: PL, Edycja 3 / 2025-09-01

MyWam Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści Instrukcji używania bez wcześniejszego uprzedzania. Każda zmiana zostanie określona datą ostatniej aktualizacji instrukcji.

Instrukcja w wersji elektronicznej będzie dostępna na stronie internetowej [www.mywam.eu](http://www.mywam.eu)

**UWAGA!** Zdjęcia zawarte w Instrukcji używania mają charakter poglądowy i mogą się różnić od zakupionego wyrobu.

MyWam Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 13485 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów medycznych klasy I. System certyfikowany przez LL-C (Certification).



**ISO 13485**

LL-C (Certification)



Wózek ALFA flex powstał we współpracy z



## SPIS TREŚCI

|       |                                                                                       |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | PRZEZNACZENIE I WSKAZANIA DO STOSOWANIA.....                                          | 5  |
| 2.    | TABLICZKI .....                                                                       | 5  |
| 3.    | OZNACZENIE SYMBOLI.....                                                               | 5  |
| 4.    | WAŻNE WSKAZÓWKI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.....                                          | 6  |
| 5.    | OGÓLNA BUDOWA WÓZKA .....                                                             | 7  |
| 6.    | FUNKCJE WÓZKA .....                                                                   | 9  |
| 6.1.  | Rozkładanie ramy wózka .....                                                          | 9  |
| 6.2.  | Składanie ramy wózka .....                                                            | 11 |
| 6.3.  | Blokada transportowa. Zakładanie i ściąganie blokady transportowej.....               | 12 |
| 6.4.  | Przednie koła skrętne. Blokada kierunku jazdy przednich kół .....                     | 12 |
| 6.5.  | Tylne koła. Montaż i demontaż tylnych kół na ośkę.....                                | 13 |
| 6.6.  | System amortyzacji tylnych kół .....                                                  | 14 |
| 6.7.  | Rączka do pchania wózka .....                                                         | 14 |
| 6.8.  | Hamulec centralny.....                                                                | 15 |
| 6.9.  | Stopka przechyłowa.....                                                               | 15 |
| 6.10. | Mechanizm mocowania oparcia do ramy wózka .....                                       | 16 |
| 6.11. | Regulacja głębokości siedziska .....                                                  | 18 |
| 6.12. | Regulacja ramy w zakresie zmiany kąta siedziska .....                                 | 19 |
| 6.13. | Regulacja wysokości .....                                                             | 19 |
| 6.14. | Regulacja ramy w zakresie kąta pochylenia oparcia .....                               | 20 |
| 6.15. | Podnózek .....                                                                        | 21 |
| 6.16. | Kamizelka zabezpieczająca .....                                                       | 22 |
| 6.17. | Regulowana pelota zagłówka .....                                                      | 23 |
| 6.18. | Regulowane peloty piersiowo-lędźwiowe.....                                            | 23 |
| 6.19. | Regulowane peloty biodrowe.....                                                       | 24 |
| 6.20. | Pasy odwodząco-stabilizujące .....                                                    | 25 |
| 6.21. | Barierka zabezpieczająca .....                                                        | 26 |
| 6.22. | Regulowany daszek z okienkiem .....                                                   | 26 |
| 6.23. | Uchwyt na kubek .....                                                                 | 27 |
| 6.24. | Siedzisko z klinem i bocznymi pelotami stabilizujące całą miednicę STABILO .....      | 27 |
| 6.25. | Oparcie gorsetowe STABILO .....                                                       | 28 |
| 6.26. | Poduszka zagłówka STABILO.....                                                        | 29 |
| 6.27. | Pas stabilizujący STABILO.....                                                        | 30 |
| 7.    | WYPOSAŻENIE DODATKOWE.....                                                            | 31 |
| 7.1.  | Regulowany stolik terapeutyczny (zakładany w miejsce barierki zabezpieczającej) ..... | 31 |
| 7.2.  | Plecak.....                                                                           | 31 |
| 7.3.  | Kosz na zakupy.....                                                                   | 31 |
| 7.4.  | Rękawice zimowe .....                                                                 | 32 |
| 7.5.  | Folia przeciwdeszczowa (zakładana na regulowanym daszku z okienkiem) .....            | 32 |
| 7.6.  | Śpiwór na nogi (zakładany na barierce zabezpieczającej) .....                         | 32 |
| 7.7.  | Moskitiera (zakładana na regulowany daszek z okienkiem) .....                         | 33 |

---

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 7.8. Parasolka przeciwsłoneczna.....                            | 33 |
| 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA ALFA flex.....                 | 34 |
| 8.1. Skład surowcowy wózka .....                                | 34 |
| 9. DOSTAWA I NARZĘDZIA .....                                    | 34 |
| 10. MONTAŻ I DEMONTAŻ WÓZKA.....                                | 35 |
| 11. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA.....                           | 35 |
| 12. PRZENOSZENIE WÓZKA.....                                     | 36 |
| 13. WSIADANIE I ZSIADANIE Z WÓZKA INWALIDZKIEGO .....           | 37 |
| 14. PRAWIDŁOWA POZYCJA W WÓZKU INWALIDZKIM .....                | 37 |
| 15. UŻYTKOWANIE WÓZKA.....                                      | 37 |
| 16. PORUSZANIE SIĘ PO POWIERZCHNIACH POCHYŁYCH.....             | 38 |
| 17. POKONYWANIE PROGÓW LUB KRAWĘŻNIKÓW.....                     | 38 |
| 18. TRANSPORT W SAMOCHODZIE I W INNYCH POJAZDACH.....           | 38 |
| 19. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA .....                             | 38 |
| 20. PRZECHOWYWANIE WÓZKA .....                                  | 39 |
| 21. SERWIS I PRZEGLĄDY OKRESOWE.....                            | 39 |
| 22. UTYLIZACJA.....                                             | 40 |
| 23. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI WYROBÓW MEDYCZNYCH ..... | 40 |
| 24. LISTA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH.....               | 41 |
| 25. KARTA GWARANCYJNA .....                                     | 42 |
| 26. NOTATKI .....                                               | 43 |

## 1. PRZEZNACZENIE I WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Wózek inwalidzki specjalny ALFA flex jest wyrobem medycznym klasy I wskazanym do używania przez te osoby niepełnosprawne, które ze względu na swoje schorzenie nie mogą samodzielnie chodzić, stać lub siadać. Wyrób przeznaczony jest do transportu i przemieszczania powyższych osób w pozycji siedzącej lub leżącej oraz na korekcji postawy.

Wskazania kliniczne to m.in. mózgowie porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, dystrofie, niedowłady itp.

Wyrób przewidziany jest dla użytkowników o wzroście 100-150 cm oraz wadze do 55 kg. Wyrób powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego lub fizjoterapeuty.

### Przeciwwskazania:


W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.

## 2. TABLICZKI

Tabliczka znamionowa



Tablica ostrzegawcza

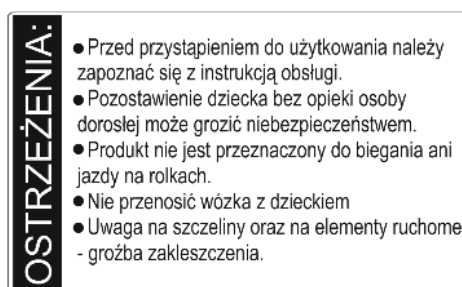

## 3. OZNACZENIE SYMBOLI

|                                                                                     |                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Numer seryjny produktu                                                        |  | Nazwa producenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Dopuszczalny całkowity ciężar użytkownika                                     |  | Dany produkt jest wyrobem medycznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Data produkcji                                                                |  | OPIS " <b>OSTRZEŻENIE!</b> " i symbol w niniejszej instrukcji używane są w celu wzmocnienia uwagi osoby czytającej na treść oznaczoną tym znakiem. Niestosowanie się do treści oznakowanych tym opisem może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i osób towarzyszących, a także może doprowadzić do uszkodzenia produktu. |
|  | Znak oceny zgodności według odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw europejskich |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Ostrzeżenie o postępowaniu zgodnie z Instrukcją używania produktu             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 4. WAŻNE WSKAZÓWKI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Zabrania się użytkowania wózka w sposób, do którego wózek nie jest przeznaczony.
- Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dziecko!
- **Z uwagi na duże możliwości regulacyjne wózka, podczas regulacji kątowej siedziska i regulacji kątowej oparcia na plecy, istnieje możliwość ustawienia takiej pozycji, w której głowa użytkownika znajdzie się poniżej linii miednicy. Zabronione jest stosowanie takiej pozycji, gdyż mogłoby to doprowadzić do niebezpieczeństwa zachłyśnięcia lub zakrztuszenia się użytkownika.**
- Zabrania się umieszczania na wózku dodatkowego ciężaru, co w szczególności dotyczy umieszczania dodatkowego ciężaru z tyłu oparcia np. plecaka lub torby. Może to spowodować przewrócenie wózka i obrażenia użytkownika! Nie dotyczy oryginalnych akcesoriów dodatkowych dedykowanych do wózka ALFA flex nieprzekraczających dopuszczalnego obciążenia. Wszystkie dodatkowe elementy mocowane do wózka wpływają na jego stabilność.
- **UWAGA!** Nigdy nie dokonuj regulacji wózka, gdy użytkownik nie jest zabezpieczony kamizelką.
- **UWAGA!** Podczas użytkowania wózka oraz podczas składania i regulowania mechanizmów należy szczególnie uważać na elementy ruchome, gdyż może zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika/opiekuna w otworach/szczelinach pomiędzy elementami.
- **UWAGA!** W zależności od wykonanych regulacji - dotyczy ustawienia rączki do pchania wózka, regulacji wysokości oparcia, regulacji kątowej oparcia, regulacji głębokości siedziska, regulacji kątowej siedziska, regulacji kąta podnóżka oraz ustawienia podnóżka - to wózek ten może przekraczać zalecane maksymalne gabaryty.
- **UWAGA!** Podczas przejazdu przez drzwi lub podobne zwężenia, ograniczające kierunek jazdy wózka, należy upewnić się, czy po obu stronach wózka jest odpowiednia ilość miejsca, co zapobiega przytrzaśnięciu się dłoni lub innych części ciała, jak również zapobiega uszkodzeniu wózka.
- **UWAGA!** Temperatura wózka może wzrosnąć, gdy wózek jest wystawiony na działanie promieni słonecznych.

#### OSTRZEŻENIE!



- Nigdy nie pozostawiaj użytkownika bez opieki w wózku, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem!
  - Ten produkt nie nadaje się do biegania lub jazdy na tyżwach czy rolkach.
  - Uwaga na szczeliny i elementy ruchome – grozi zakleszczeniem.
  - Nie przenosić wózka z użytkownikiem.
  - Wózek zapakowany jest w worek. Przechowywać poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.
- 
- **UWAGA!** Zabrania się użytkowania wózka, jeżeli stan techniczny wyrobu lub jego pojedynczego elementu budzi wątpliwości użytkownika lub jest wyraźnie nieprawidłowy, wówczas nie wolno go użytkować. W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą w celu otrzymania porady.

## 5. OGÓLNA BUDOWA WÓZKA

### Wyposażenie podstawowe



- 1- Daszek z okienkiem
- 2- Poduszka zagłówka STABILO
- 3- Oparcie gorsetowe STABILO
- 4- Kamizelka zabezpieczająca
- 5- Barierka zabezpieczająca
- 6- Pasy odwodząco-stabilizujące
- 7- Siedzisko z klinem i bocznymi pelotami stabilizujące całą miednicę STABILO
- 8- Regulowany podnóżek z pasami
- 9- Pelota zagłówka
- 10- Uchwyt na kubek
- 11- Mechanizm składania ramy
- 12- Blokada transportowa
- 13- Regulacja głębokości siedziska
- 14- Blokada kierunku jazdy przednich kół
- 15- Przednie koła skrętne

- 16- Peloty piersiowo-lędźwiowe
- 17- Regulacja wysokości oparcia
- 18- Peloty biodrowe
- 19- Mechanizm regulacji kątowej całego podnóżka
- 20- Regulacja długości podnóżka
- 21- Hamulec centralny
- 22- Tylne koła
- 23- Rączka do pchania wózka
- 24- Mechanizm regulacji kątowej rączki do pchania
- 25- Blokada mechanizmu składania ramy
- 26- Regulacja kąta oparcia
- 27- Mechanizm regulacji kątowej oparcia
- 28- Regulacja kąta siedziska
- 29- System amortyzacji tylnych kół
- 30- Stopka przechyłowa
- 31- Mechanizm szybkiego montażu kół tylnych

## Wyposażenie dodatkowe



- 1- Parasolka przeciwsłoneczna
- 2- Stolik terapeutyczny
- 3- Śpiwór na nogi
- 4- Moskitiera

- 5- Folia przeciwdeszczowa
- 6- Rękawice zimowe
- 7- Plecak
- 8- Kosz na zakupy

## 6. FUNKCJE WÓZKA

### 6.1. Rozkładanie ramy wózka



1

Ściągnij blokadę transportową



2



3



4

Mechanizm montażu oparcia znajduje się z tyłu siedziska.



5


Wsuń oparcie




6

Odblokowany mechanizm ustaw na wysokości otworów po obu stronach

7

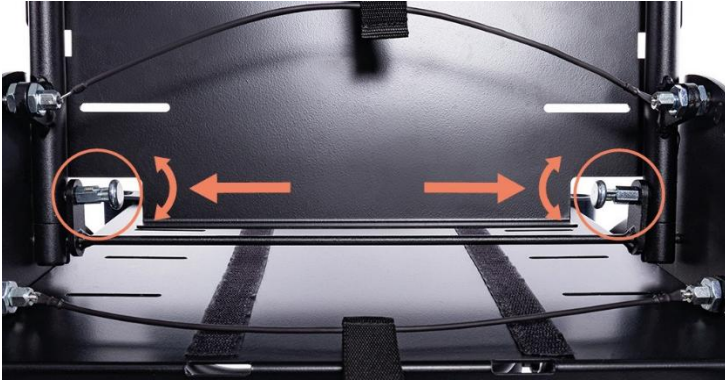

Wsuń bolce w otwory po obu stronach

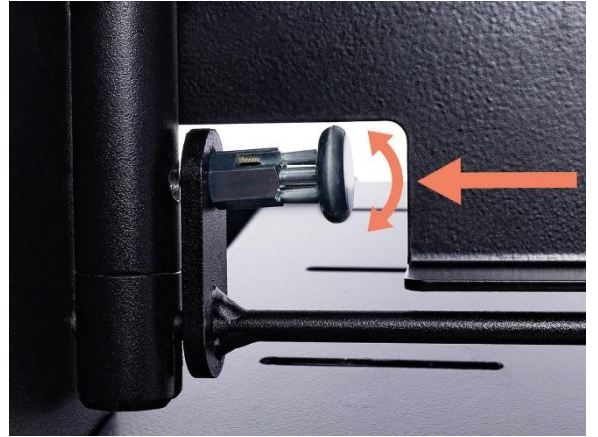

8



Zablokuj mechanizm mocowania oparcia



9



Pociągnij uchwyt do góry i ustaw kąt oparcia

10




## 6.2. Składanie ramy wózka

1



2

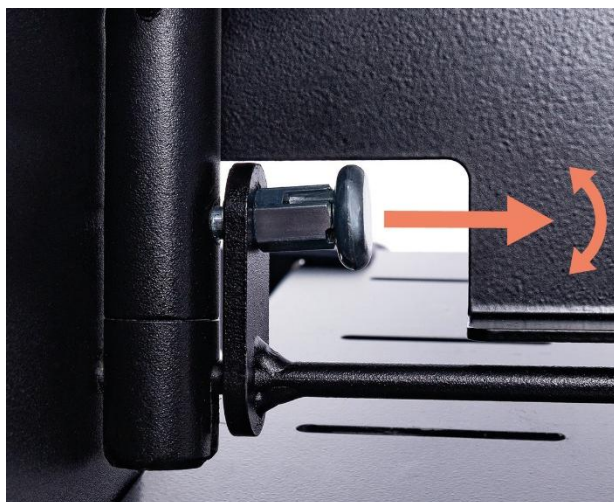


Odblokuj mechanizm mocowania oparcia

3



Opuść mechanizm w dół

4

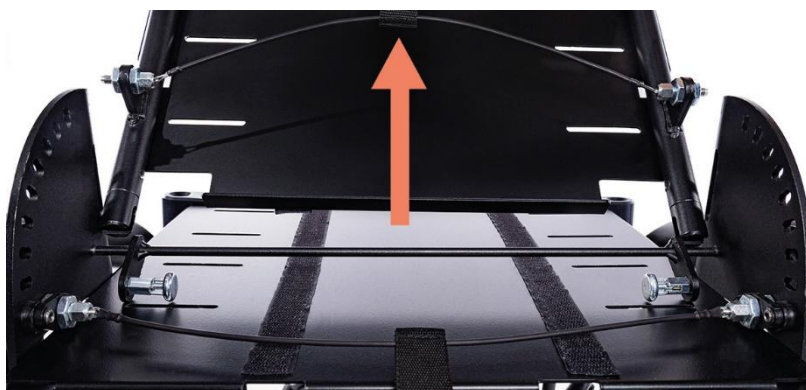


Wyciągnij oparcie

5



Wciśnij czerwony przycisk

6

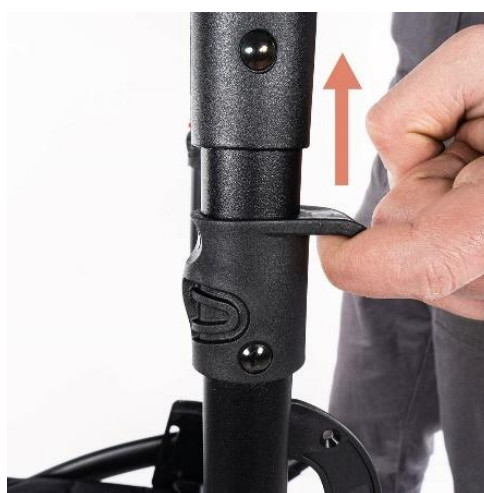

Jednocześnie pociągnij uchwyty po obu stronach ramy do góry



7



8

Założ blokadę transportową

### 6.3. Blokada transportowa. Zakładanie i ściąganie blokady transportowej



Założona blokada



Ściągnięta blokada

### 6.4. Przednie koła skrętne. Blokada kierunku jazdy przednich kół

**Blokowanie przednich kół**



## Odblokowywanie przednich kół



## 6.5. Tylne koła. Montaż i demontaż tylnych kół na ośkę

### Montaż kół

1



2



Wciśnij w miejscu wgłębienia

3



## Demontaż kół



## 6.6. System amortyzacji tylnych kół



Zawieszenie twarde



Zawieszenie miękkie

## 6.7. Rączka do pchania wózka

### Mechanizm regulacji kątowej rączki do pchania



Wciśnij przyciski po obu stronach i zmień kąt rączki do pchania.

## Regulacja kątowa rączki do pchania



### 6.8. Hamulec centralny



Hamulec centralny służy tylko i wyłącznie do całkowitej blokady kół – nie ma funkcji hamowania dynamicznego.

**UWAGA!** Należy regularnie kontrolować stan hamulca oraz usuwać ewentualny brud i błoto.


### 6.9. Stopka przechyłowa



Używanie stopki przechyłowej ułatwia wjazd wózka na niewielkie progi lub krawężniki.

## 6.10. Mechanizm mocowania oparcia do ramy wózka

### Montaż oparcia do ramy

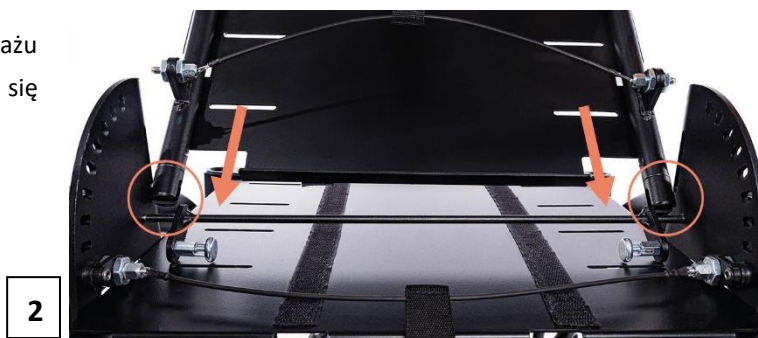

Wsuń oparcie



Odblokowany mechanizm ustaw na wysokości otworów po obu stronach



Wsuń bolce w otwory po obu stronach



5



Zablokuj mechanizm mocowania oparcia



6




Pociągnij uchwyt do góry i ustaw kąt oparcia

**Demontaż oparcia z ramy**

1



2

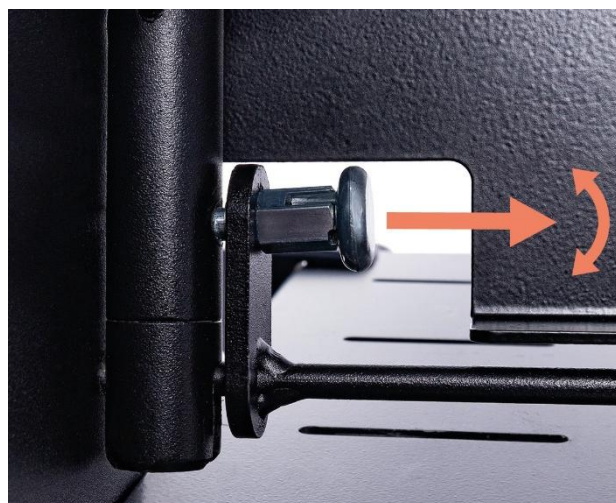


Odblokuj mechanizm mocowania oparcia



3

Opuść mechanizm w dół

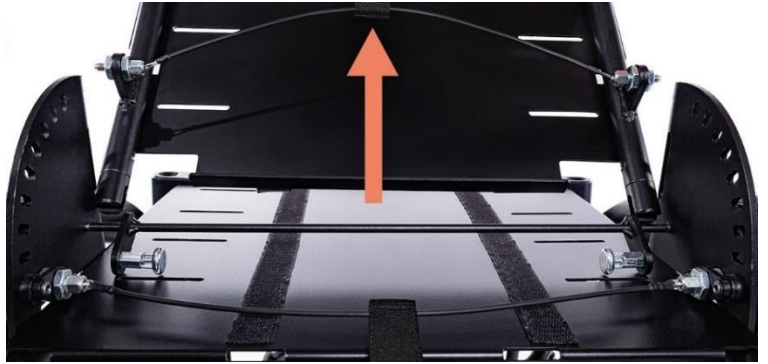

4

Wyciągnij oparcie

### 6.11. Regulacja głębokości siedziska



Minimalna głębokość siedziska




Maksymalna głębokość siedziska

Pociągnij do siebie lub  
wsuń siedzisko.


**UWAGA!** Do regulacji głębokości siedziska należy użyć klucza imbusowego (w zestawie).

## 6.12. Regulacja ramy w zakresie zmiany kąta siedziska

### Mechanizm regulacji kąta siedziska

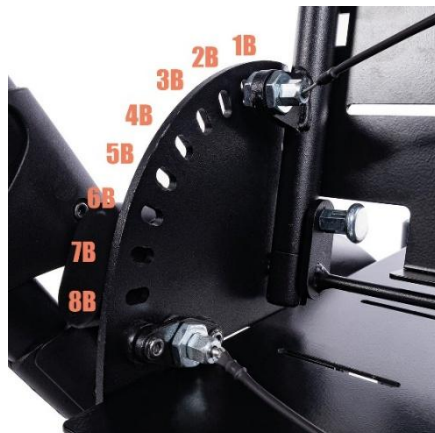

Upewnij się, że bolce zaskoczyły po obu stronach wózka.

### Regulacja kąta siedziska



## 6.13. Regulacja wysokości



Minimalne ustawienie  
wysokości oparcia



Maksymalne ustawienie  
wysokości oparcia




Przycisk wskazujący najwyższą  
wysokość oparcia



**UWAGA!** Do regulacji wysokości oparcia należy użyć klucza imbusowego (w zestawie).

#### 6.14. Regulacja ramy w zakresie kąta pochylenia oparcia

##### Mechanizm regulacji kątowej oparcia

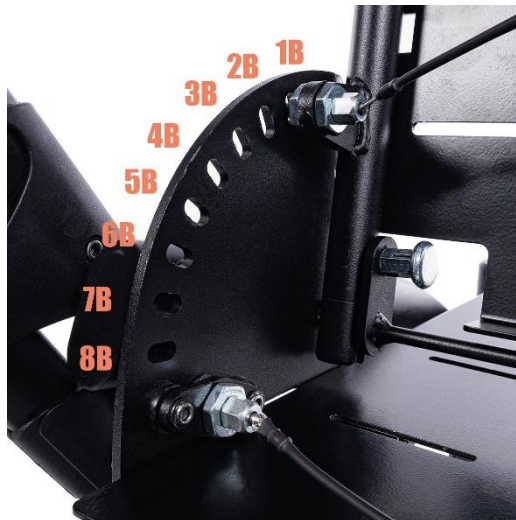

Upewnij się, że bolce zaskoczyły po obu stronach wózka.

##### Regulacja kątowa oparcia



**Uwaga!** Każdorazowa zmiana kąta pochylenia oparcia na plecy wymaga ponownej regulacji kamizelki.

## 6.15. Podnóżek

### Regulacja wysokości podnóżka



Minimalna wysokość



Maksymalna wysokość

### Regulacja kąta pochylenia podnóżka



Wciśnij przyciski po obu stronach i zmień kąt podnóżka.



**Uwaga!** W czasie transportu, przechowywania, rehabilitacji, wsiadania i wysiadania z wózka, płyta podnóżka musi być złożona.

## 6.16. Kamizelka zabezpieczająca



**Uwaga!** Przy demontażu oparcia odepnij kamizelkę.

**Pamiętaj o zapięciu kamizelki przy montażu oparcia.**

### Montaż kamizelki do wózka



**Uwaga!** Każdorazowa zmiana kąta pochylenia oparcia na plecy wymaga ponownej regulacji kamizelki.

### Miejsce montażu kamizelki na oparciu



### Miejsce montażu kamizelki do ramy



Przeciagnij pasy przez otwory i przewiąż przez klamrę na pasie.

## 6.17. Regulowana pelota zagłówka




### Regulacja wysokości peloty



## 6.18. Regulowane peloty piersiowo-lędźwiowe




### Regulacja szerokości oparcia

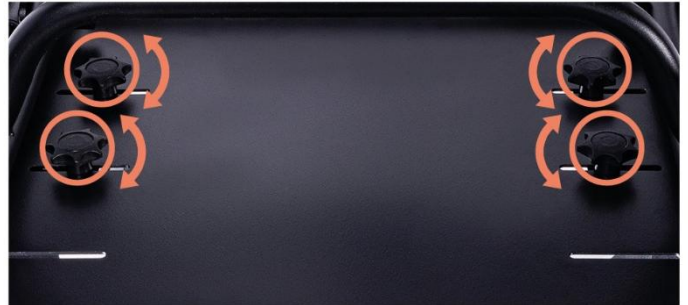


### 6.19. Regulowane peloty biodrowe



### Regulacja szerokości siedziska

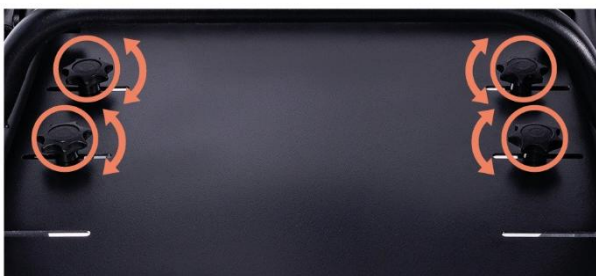

## Regulacja głębokości siedziska

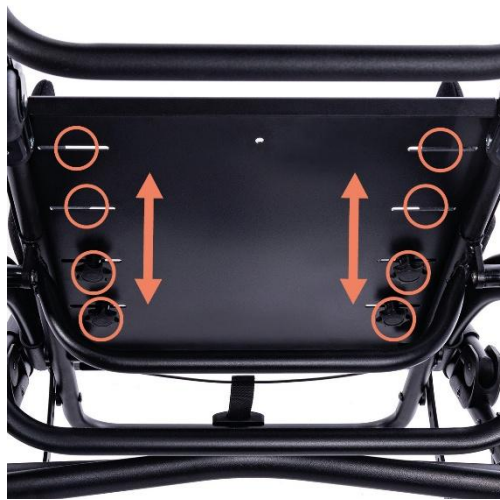

## 6.20. Pasy odwodząco-stabilizujące



Mocowanie pasów do siedziska



Mocowanie pasów do ramy wózka

### 6.21. Bariierka zabezpieczająca



Wciśnij przycisk po obu stronach i wsuń lub wysuń barierkę.

### 6.22. Regulowany daszek z okienkiem

#### Mechanizm montażu daszka do ramy wózka



Wsuń mocowanie na daszku do mocowania na ramie wózka.

Demontaż za pomocą czerwonego przycisku wewnątrz mocowania na daszku po obu stronach.

#### Zmiana wielkości powierzchni daszka




## Okienko z moskitierą



## 6.23. Uchwyt na kubek



## 6.24. Siedzisko z klinem i bocznymi pelotami stabilizujące całą miednicę STABILO

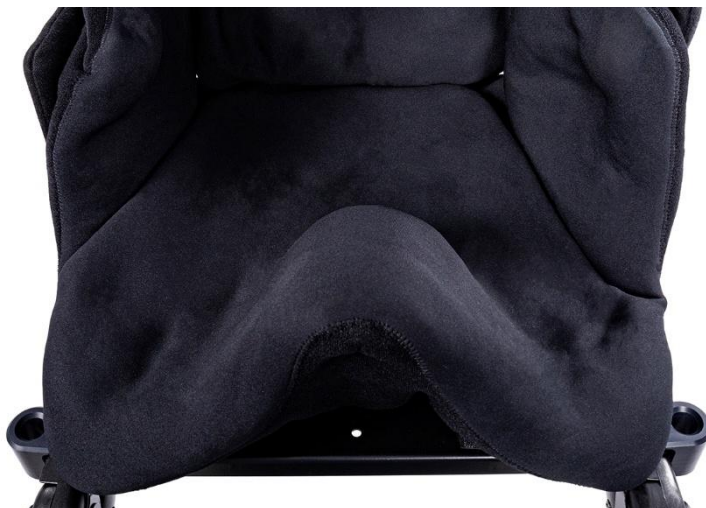

## Formowanie siedziska za pomocą pompki ręcznej



Uformuj siedzisko i odessij pompką powietrze do momentu uzyskania żądanej twardości.

Aby zmienić kształt wkręć sam wężyk do zaworka i poczekaj aż siedzisko zmięknie.

**UWAGA!** Zmiana temperatury wpływa na twardość siedziska (wzrost temperatury – poduszka mięknie, spadek temperatury – poduszka twardnieje).

**UWAGA!** Naturalnym zjawiskiem jest zmniejszenie grubości poduszki w początkowym okresie użytkowania o 5%.

## 6.25. Oparcie gorsetowe STABILO



## Formowanie oparcia za pomocą pompki ręcznej



Uformuj oparcie i odessij pompką powietrze do momentu uzyskania żądanej twardości.

Aby zmienić kształt wkręć sam wężyk do zaworki i poczekaj aż oparcie zmięknie.

**UWAGA!** Zmiana temperatury wpływa na twardość oparcia (wzrost temperatury – poduszka mięknie, spadek temperatury – poduszka twardnieje).

**UWAGA!** Naturalnym zjawiskiem jest zmniejszenie grubości poduszki w początkowym okresie użytkowania o 5%.

### 6.26. Poduszka zagłówek STABILO



## Formowanie zagłówka za pomocą pompki ręcznej



Uformuj zagłówek i odessij pompką powietrze do momentu uzyskania żądanej twardości.

Aby zmienić kształt wkręć sam wężyk do zaworka i poczekaj aż oparcie zmięknie.

**UWAGA!** Zmiana temperatury wpływa na twardość zagłówka (wzrost temperatury – poduszka mięknie, spadek temperatury – poduszka twardnieje).

**UWAGA!** Naturalnym zjawiskiem jest zmniejszenie grubości poduszki w początkowym okresie użytkowania o 5%.

## 6.27. Pas stabilizujący STABILO



## 7. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### 7.1. Regulowany stolik terapeutyczny (zakładany w miejsce barierki zabezpieczającej)



Maksymalne obciążenie wynosi 3kg.

### 7.2. Plecak



Maksymalne obciążenie plecaka wynosi 2kg.

### 7.3. Kosz na zakupy



Maksymalne obciążenie kosza na zakupy wynosi 3kg.

#### 7.4. Rękawice zimowe



#### 7.5. Folia przeciwdeszczowa (zakładana na regulowanym daszku z okienkiem)



#### 7.6. Śpiwór na nogi (zakładany na barierce zabezpieczającej)



### 7.7. Moskitiera (zakładana na regulowany daszek z okienkiem)



### 7.8. Parasolka przeciwsłoneczna



## 8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WÓZKA ALFA flex

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| długość wózka                                     | 100-145 cm               |
| szerokość wózka                                   | 66 cm                    |
| wysokość wózka                                    | 94-147 cm                |
| masa całkowita                                    | 26 kg                    |
| efektywna głębokość siedziska                     | 30-37 cm*                |
| szerokość siedziska                               | 20-33 cm*                |
| wysokość oparcia                                  | 63-72 cm*                |
| szerokość oparcia                                 | 20-33 cm*                |
| odległość podnóżka od siedziska / ilość regulacji | 33-43 cm/ 6 pozycji      |
| długość wózka złożonego do transportu             | 107 cm                   |
| szerokość wózka złożonego do transportu           | 66 cm                    |
| wysokość wózka złożonego do transportu            | 57 cm**                  |
| nośność kosza                                     | 3 kg                     |
| nośność plecaka                                   | 2 kg                     |
| max. waga pacjenta                                | 55 kg                    |
| wzrost pacjenta                                   | 100-150 cm               |
| kąt płaszczyzny siedziska / ilość regulacji       | ok 0°-34° / 6 pozycji    |
| kąt pochylenia oparcia / ilość regulacji          | ok -8,5°-62° / 8 pozycji |
| kąt podnóżka / ilość regulacji                    | ok 73°-195° / 8 pozycji  |

UWAGI: \*) wartości podane z poduszkami STABILO, \*\*) wartość podana z pelotami

Tolerancja wartości pomiarów +/- 20mm, +/- 1,5kg, +/- 1°

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych.

### 8.1. Skład surowcowy wózka

Skład surowcowy wózka: stal i aluminium malowane proszkowo, tkaniny 100% poliester oraz tworzywo sztuczne (PP, PE).

## 9. DOSTAWA I NARZĘDZIA

W oryginalnym opakowaniu powinny znaleźć się następujące elementy:

- Złożona rama wózka i oparcie, podnózek, koła, budka, peloty, uchwyt na kubek, barierka zabezpieczająca, poduszki STABILO,
- Instrukcja używania wraz z kartą gwarancyjną,
- Wyposażenie dodatkowe zgodne z zamówieniem,
- Klucz imbusowy 4mm,

Przed użyciem:

- a. sprawdź czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu (w przypadku uszkodzenia opakowania należy w obecności dostawcy rozpakować i sprawdzić czy żaden z elementów nie został uszkodzony),
- b. sprawdzić zgodnie ze specyfikacją zawartość przesyłki (w przypadku braku jakiegoś z komponentów należy skontaktować się ze Sprzedawcą).

Do montażu i demontażu wózka inwalidzkiego Alfa flex nie są wymagane żadne narzędzia.

Do regulacji wysokości oparcia i głębokości siedziska należy użyć klucza imbusowego 4mm dołączonego do opakowania.

## 10. MONTAŻ I DEMONTAŻ WÓZKA

Produkt fabrycznie zapakowany w oryginalnym kartonie jest już wstępnie zmontowany.

- Należy dokończyć montaż poprzez wykonanie następujących czynności:
  - rozłożyć ramę wózka i zamontować oparcie regulując następujące parametry:
  - załączyć / wyłączyć blokadę kierunku jazdy przednich kół,
  - wyregulować wysokość i kąt rączki do pchania wózka,
  - ustawić kąt pochylenia oparcia na plecy,
  - ustawić głębokość siedziska,
  - wyregulować długość kamizelki zabezpieczającej,
  - ustawić podnóżek na wybranej wysokości,
  - założyć barierkę bezpieczeństwa,
  - zamontować daszek z okienkiem,
  - wyregulować pasy odwodząco-stabilizujące,
  - zamontować i wyregulować: pelotę zagłówka, peloty piersiowo-lędźwiowe, peloty biodrowe,
  - zamontować i uformować: poduszkę zagłówka STABILO, oparcie gorsetowe STABILO, siedzisko z klinem STABILO,
  - zamontować odpowiednie wyposażenie dodatkowe:
    - plecak,
    - kosz na zakupy,
    - śpiwór na nogi,
    - moskitiera,
    - folia przeciwdeszczowa,
    - parasolka
    - rękawice zimowe.
- W celu demontażu wózka należy:
  - a) zdemontować wyposażenie dodatkowe,
  - b) zdemontować oparcie od ramy wózka (patrz punkt 6.10),
  - c) zdemontować koła tylne od ramy wózka,
  - d) złożyć ramę wózka.

## 11. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

- Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy zadbać, żeby obuwie użytkownika było wygodne i dobrze stabilizowało staw skokowy.
- Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy zadbać, żeby użytkownik nie był umieszczony w wózku bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką wózka. Ma to na celu przeciwdziałanie otarciom ciała użytkownika oraz względy higieniczne.
- W przypadku użytkowników mających problem z trzymaniem moczu, należy położyć na siedzisko wózka specjalną ceratę, którą można nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.

- W przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp. należy zadbać, żeby były one dobrze zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem oraz nie przeszkadzały podczas użytkowania wózka.

W celu rozpoczęcia prawidłowego użytkowania wózka należy wykonać wszystkie wymienione poniżej czynności:

- Umieścić wózek na płaskiej i bezpiecznej powierzchni.
- Prawidłowo rozłożyć wózek (patrz punkt 6.1).
- Załączyć hamulec centralny.
- Wykonać wszystkie regulacje wózka (patrz rozdział 6. Funkcje wózka):
  - a) załączyć / wyłączyć blokadę kierunku jazdy przednich kół,
  - b) wyregulować wysokość rączki do pchania wózka,
  - c) wyregulować głębokość siedziska,
  - d) wyregulować szerokość użytkową siedziska,
  - e) ustawić kąt pochylenia siedziska,
  - f) wyregulować wysokość oparcia na plecy,
  - g) ustawić kąt pochylenia oparcia na plecy,
  - h) wyregulować długość kamizelki zabezpieczającej,
  - i) wyregulować wysokość podnóżka,
  - j) ustawić kąt pochylenia podnóżka,
  - k) wyregulować pelotę zagłówka,
  - l) wyregulować peloty piersiowo-lędźwiowe,
  - m) wyregulować peloty biodrowe,
  - n) uformować poduszkę zagłówka STABILO,
  - o) uformować oparcie gorsetowe STABILO,
  - p) uformować siedzisko z klinem STABILO,
  - r) wyregulować pasy odwodząco-stabilizujące,
  - s) wyregulować daszek z okienkiem,
  - Zdemontować barierkę zabezpieczającą i stolik terapeutyczny, o ile te wyposażenia są dostępne i zamontowane na wózku.
  - Przygotować do założenia kamizelkę zabezpieczającą, taśmy na podnóżku oraz pasy odwodząco-stabilizujące.
  - Umieścić użytkownika w wózku i upewnić się, że wykonane wcześniej wszystkie regulacje są dla użytkownika odpowiednie i bezpieczne.
  - Założyć użytkownikowi kamizelkę zabezpieczającą i taśmy na podnóżku.
  - Założyć użytkownikowi inne niezbędne wyposażenie wózka, o ile jest dostępne.

## 12. PRZENOSZENIE WÓZKA

Najlepszym sposobem przenoszenia wózka inwalidzkiego jest prowadzenie go z wykorzystaniem jego kół.

W przypadkach, kiedy nie jest to możliwe (np. w celu transportu wózka w samochodzie), to ze względów bezpieczeństwa, wózek można podnosić i przenosić oburącz po uprzednim demontażu wyposażenia dodatkowego w celu zmniejszenia ciężaru do przenoszenia i złożeniu go.

Podczas przenoszenia lub podnoszenia ramy wózka należy zachować szczególną ostrożność. Ramę należy przenosić po złożeniu i założeniu blokady transportowej.

Nie należy używać do przenoszenia wózka wyposażenia dodatkowego – grozi jego uszkodzeniem.

### 13. WSIADANIE I ZSIADANIE Z WÓZKA INWALIDZKIEGO

Przy wsiadaniu i zsiadaniu z wózka inwalidzkiego należy umieścić wózek jak najbliżej stabilnego i bezpiecznego miejsca, na które użytkownik będzie się przesiadał. Po upewnieniu się, że hamulec centralny jest załączony, a płyta podnóżka podniesiona jest do góry w celu uniknięcia stawania na niej, użytkownik może się przesiadać. Nie wolno stawać na płycie podnóżka, ponieważ istnieje ryzyko przewrócenia wózka, urazu użytkownika i ryzyko uszkodzenia produktu.

Należy zwrócić uwagę, aby podczas wsiadania lub wysiadania z wózka, użytkownik i żadna inna osoba nie stały na podnóżku, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem i urazem użytkownika!

### 14. PRAWIDŁOWA POZYCJA W WÓZKU INWALIDZKIM

Z powodów bezpieczeństwa i zdrowotnych zaleca się, żeby użytkownik miał ułożone miednicę i plecy jak najbliżej oparcia, na ile to możliwe, w celu równomiernego podparcia kręgosłupa (optymalne podparcie wszystkich części kręgosłupa, tak by nie powstawała wolna przestrzeń).

Uda powinny mieć zapewnione podparcie na jak największej powierzchni, na całej swojej długości, czemu służy dopasowanie głębokości siedziska wózka, a stopy należy oprzeć na płycie podnóżka, co zapobiega zsuwaniu się, utrzymuje optymalne napięcie mięśni nóg i przenosi część ciężaru z wyższych partii ciała.



**UWAGA!** Z uwagi na duże możliwości regulacyjne wózka, podczas regulacji kątowej siedziska i regulacji kątowej oparcia na plecy, istnieje możliwość ustawienia takiej pozycji, w której głowa użytkownika znajdzie się poniżej linii miednicy. **Zabronione jest stosowanie takiej pozycji**, gdyż mogłoby to doprowadzić do niebezpieczeństwa zachłyśnięcia lub zakrztuszenia się użytkownika.



**Zabronione ustawienie wózka**

### 15. UŻYTKOWANIE WÓZKA

Podczas użytkowania wózek zawsze należy trzymać za rączkę do pchania wózka, aby nie dopuścić do bezwładnego toczenia się wózka.

Zwolnij hamulec centralny jednocześnie trzymając rączkę do pchania wózka i popychaj wózek w bezpiecznym kierunku.

## 16. PORUSZANIE SIĘ PO POWIERZCHNIACH POCHYŁYCH

Podczas pokonywania wzniesień lub podjazdów zawsze należy ustawiać wózek przodem do kierunku jazdy.

Ogranicz prędkość na powierzchniach pochyłych i poruszaj się jak najwolniej.

Osoba prowadząca wózek musi dysponować odpowiednią siłą pozwalającą kontrolować stabilność wózka inwalidzkiego.

Zawsze należy pamiętać o tym, że położenie środka ciężkości wózka ulega zmianie przy pokonywaniu nierówności lub pochyłości w terenie. W takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność i asekurować wózek.

Podczas korzystania z podjazdów należy upewnić się, że podjazd jest odpowiedni, że koła wózka są wystarczająco wysokie do pokonania podjazdu, że rama wózka nie będzie się stykała z podjazdem oraz należy zapewnić pomoc drugiej osoby, ponieważ istnieje ryzyko przewrócenia wózka, uszkodzenia produktu i urazu użytkownika.

## 17. POKONYWANIE PROGÓW LUB KRAWĘŻNIKÓW

Podczas pokonywania małych przeszkód (niewielkie progi, małe krawężniki itp.), należy nacisnąć stopą stopkę przechyłową oraz rączkę do pchania wózka w kierunku w dół i do siebie, żeby unieść przednie koła wózka i ostrożnie wjechać przednimi kołami na przeszkodę. Następnie powoli pociągnąć rączkę do pchania wózka do góry, w kierunku od podłoża, żeby unieść tylne koła wózka i ostrożnie wjechać tylnymi kołami na przeszkodę.

## 18. TRANSPORT W SAMOCHODZIE I W INNYCH POJAZDACH

- Zdemontuj z wózka wszystkie akcesoria i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Złóż wózek i umieść go w bagażniku.

Jeśli zdemontowany wózek nie znajduje się w bagażniku samochodu oddzielonym od kabiny pasażerów, to należy dokładnie umocować ramę wózka inwalidzkiego do pojazdu. W tym celu można skorzystać z nieużywanych pasów bezpieczeństwa.

- W celu przewiezienia wózka inwalidzkiego w innych pojazdach, takich jak np. pociągi, tramwaje, autobusy, samoloty, statki, itp. należy zapytać osoby odpowiedzialne za transport w tych środkach komunikacji, o warunki bezpiecznej podróży do miejsca docelowego z wózkiem inwalidzkim oraz o stosowne wymagania.



**Wózka ALFA flex nie należy używać jako siedziska do przewożenia użytkownika w pojeździe.**

## 19. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Poduszki STABILO można prać w pralce w temperaturze do 40°C. Nie ma potrzeby używania proszku do prania, wystarczy płyn do płukania. Zakaz wirowania.

Kosz na zakupy należy prać ręcznie (plamę na koszu należy przetrzeć zwilżoną szmatką).

Plamy powinny być usunięte natychmiast po powstaniu na powierzchni wózka.

**UWAGA!** Nie wolno czyścić środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze. Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czystości Producent nie ponosi odpowiedzialności.

Upewnij się, że produkt jest zawsze suchy przed użyciem.

W przypadku stosowania detergentów dedykowanych do tego typu materiału – postępować zgodnie z instrukcją stosowanego środka.



Prać w temp. 40°



Nie wybielać



Nie suszyć w  
suszarce bębnowej



Nie prasować

## 20. PRZECHOWYWANIE WÓZKA

Wózek czysty należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej w temp 0-35°C. W przypadku przechowywania długotrwałego należy dodatkowo wykonać czynności opisane w pkt. 21 „co każdy jeden miesiąc”.

## 21. SERWIS I PRZEGLĄDY OKRESOWE

W celu bezpiecznego i bezawaryjnego korzystania z wózka należy regularnie i dokładnie poddawać go niżej opisanym przeglądom i czynnościom serwisowym.

W sytuacji, gdy użytkownik wózka nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić wymienionych czynności, powinien oddać wózek do specjalistycznego punktu serwisującego wózki inwalidzkie lub bezpośrednio do Producenta, który we właściwy sposób dokona przeglądu i niezbędnych czynności serwisowych. Czynności te mogą być dodatkowo płatne.

**UWAGA!** Producent odpowiada za wady lub uszkodzenia techniczne wózka powstałe wyłącznie przy prawidłowej eksploatacji wózka. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wózka spoczywa na Producencie tylko w przypadku ścisłego stosowania się do wszystkich zaleceń Producenta.

**UWAGA!** Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie wózka wyłącznie w przypadku zastosowania w nim oryginalnych części i oryginalnego wyposażenia dodatkowego.

Wszelkie naprawy należy przeprowadzać w wyspecjalizowanych, autoryzowanych Serwisach (patrz pkt 24) lub bezpośrednio u Producenta. Naprawy wózka wykonywane przez osoby inne niż autoryzowany Serwis lub Producenta spowodują utratę gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia ciała lub zniszczenie produktu jakie mogą być konsekwencją naprawy wykonywanej przez osoby inne niż autoryzowany Serwis lub Producent.

**Czynności serwisowe należy wykonywać:****• Każdorazowo przed użyciem wózka**

- Kontrola sprawności hamulca centralnego - Po załączeniu hamulca centralnego oba tylne koła wózka powinny być zablokowane i nie mogą się obracać.
- Kontrola zamocowania elementów konstrukcyjnych - Należy skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, a w szczególności należy zwrócić uwagę na: prawidłowe zamontowanie oparcia do ramy wózka, prawidłowe zamontowanie kół, prawidłowe funkcjonowanie kamizelki zabezpieczającej, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji kątowej siedziska, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji kątowej oparcia oraz prawidłowe zamontowanie podnóżka.
- Kontrola stanu ogumienia - Należy sprawdzić czy ogumienie wszystkich czterech kół nie jest uszkodzone lub zużyte.
- Kontrola stałych elementów ramy, siedziska z oparciem i stelaża podnóżka - Należy wzrokowo skontrolować stan profili konstrukcyjnych. Elementy te nie mogą być uszkodzone lub pęknięte.
- Kontrola poduszek STABILO pod kątem pęknięć i rozpruć.

**• Co każdy jeden miesiąc**

- Czyszczenie wózka.
- Kontrola wizualna elementów ruchomych, łożysk, mechanizmy regulacyjne - nasmarować smarem silikonowym.
- Kontrola wszystkich połączeń śrubowych pod kątem luzów.

**22.UTYLIZACJA**

Utylizacja i recykling: zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

**23.ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI WYROBÓW MEDYCZNYCH**

Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności, która znajduje się na stronie [www.mywam.eu](http://www.mywam.eu)

**24.LISTA AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH**

POLSKA

MyWam Sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 91, 40-373 Katowice, Polska

tel: +48 32 733 11 31

strona internetowa: [www.mywam.eu](http://www.mywam.eu)adres e-mail: [mywam@mywam.eu](mailto:mywam@mywam.eu)

## 25. KARTA GWARANCYJNA

Seria i numer: .....

Data zakupu: ..... - ..... - .....

Pieczętka i podpis Sprzedawcy:

.....  
.....  
.....

### Warunki gwarancji

- Producent (Gwarant) udziela Kupującemu na zakupiony wózek gwarancji, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zakupu.
- Kupujący reklamujący wózek powinien dostarczyć wózek do Sprzedawcy w opakowaniu, **czysty (wolny od plam, dodatkowego wyposażenia nienależącego do wózka, wilgoci, sierści itp.)** wraz z zabezpieczonymi przed uszkodzeniem elementami wózka.
- Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem przesyłki wózka i jego elementów nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
- Reklamujący (Kupujący) nie może żądać od Producenta naprawienia szkody w przypadku uszkodzenia przesyłki, jeżeli niewłaściwie oznakuje lub nieprawidłowo ubezpieczy przesyłkę wózka i jego elementów.
- Okres gwarancji w przypadku uznania reklamacji wydłuża się o czas naprawy wózka, który liczony jest od momentu przekazania wózka Sprzedawcy w ramach gwarancji do dnia, w którym odbiór wózek był gotowy do odbioru.
- Czynności przewidziane w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik wózka we własnym zakresie i na własny koszt, nie mogą być wykonane w ramach naprawy gwarancyjnej.
- Użytkowanie wózka niezgodne z przeznaczeniem, niezgodne z instrukcją używania lub niezgodne z zasadami prawidłowej eksploatacji powoduje utratę gwarancji.
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wózka powoduje utratę gwarancji (w danym obszarze zmian lub całości).
- Uszkodzenia wózka powstałe na skutek: niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowego przechowywania wózka, uszkodzeń mechanicznych oraz naturalnego ścierania i zużywania się części (np. tapicerka, koła) nie podlegają gwarancji.
- Producent przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnej przeróbki wózka powoduje utratę gwarancji.
- **Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że posiada: wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową Sprzedającego, podpis Sprzedającego, rodzaj i numer fabryczny wózka.**
- Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że nie zawiera skreśleń i poprawek.
- Producent wózka prowadzi w jego siedzibie odpłatny serwis pogwarancyjny.
- Producent określa przewidywany czas użytkowania wyrobu na 4 lata. Dalsze użytkowanie po upływie tego okresu jest możliwe, natomiast biorąc pod uwagę dbałość o bezpieczeństwo i komfort użytkowania rekomendujemy przeprowadzenie przeglądu technicznego przez producenta lub autoryzowany serwis. Usługa przeglądu jest odpłatna i obejmuje ocenę stanu technicznego urządzenia, weryfikację bezpieczeństwa oraz ewentualne niezbędne czynności konserwacyjne.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Polska).
- Wszelkie sprawy związane z roszczeniami z tytułu gwarancji lub rękojmi wózka należy kierować do Sprzedawcy.

**26.NOTATKI**