

Mewa



POLSKI PRODUCENT WÓZKÓW INWALIDZKICH SPECJALNYCH DLA DZIECI

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Wózek inwalidzki specjalny MEWA jest przeznaczony dla dzieci, które nie są w stanie chodzić lub siedzieć w właściwej pozycji z powodu kontuzji lub innego schorzenia. Ten wózek jest odpowiedni dla dzieci o wzroście od 90 do 125 cm i wadze do 40 kg.

Dzięki regulowanym pelotom na wysokości głowy i tułowia można zoptymalizować ułożenie dziecka w wózku, zapewniając mu stabilizację i bezpieczeństwo. Ponadto regulacja siedziska (funkcja KOŁYSKI) oraz oparcia pozwala na dostosowanie pozycji wózka do potrzeb dziecka, co znacznie wpływa na komfort podróżowania

Duże żelowe koła z amortyzacją oraz stopką przechyłową do unoszenia przedniej części wózka ułatwiają pokonywanie drobnych przeszkód, jak niskie schody czy krawężniki. Dodatkowym atutem wózka jest nowoczesny design.

WSKAZANIA:

paraliż i niedowład kończyn dolnych różnego pochodzenia, paraliż i niedowład tułowia, osłabienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała, najczęściej spowodowane takimi stanami jak porażenie mózgowie lub przepuklina oponowo-rdzeniowa.


PRZECIWWSKAZANIA:

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.



wersje kolorystyczne.

 **TAPICERKA**
syntetyczna


 **RAMA**
lakierowana / błysk

 **TAPICERKA**
syntetyczna

 **RAMA**
lakierowana / połmat



 **TAPICERKA**
syntetyczna

 **RAMA**
lakierowana/błysk

 **TAPICERKA**
syntetyczna

 **RAMA**
lakierowana/błysk

 **TAPICERKA**
syntetyczna

 **RAMA**
lakierowana/błysk




UWAGA: Wybór wyrobu medycznego właściwego dla konkretnego schorzenia i stanu pacjenta i musi zostać dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

UWAGA: Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.

funkcje . *bezpieczeństwo i komfort*

FUNKCJA KOŁYSKI

łatwe dopasowanie

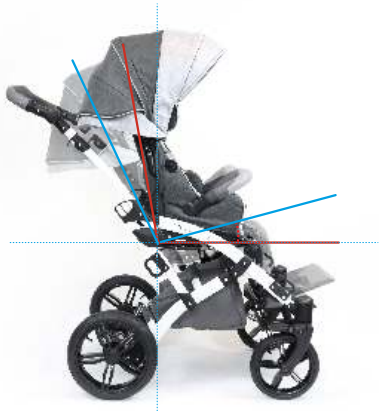

5,5°-21,5°

4 pozycje

REGULACJA OPARCIA

szeroki zakres dopasowania



8° - 86°

4 pozycje

REGULACJA PODNÓŻKA

szybkie i łatwe dopasowanie



64° - 180°

5 pozycji

REGULACJA PARAMETRÓW

zestaw wkładek



Wózek MEWA można doposażyć w zestaw wkładek splecających i zwężających, które pozwalają na zredukowanie wewnętrznych parametrów wózka - w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Dzięki takiemu rozwiązaniu wózek posłuży Wam jeszcze dłużej.

INDYWIDUALNA STABILIZACJA

regulowane peloty



Dwie pary pelot (na poziomie głowa i tułowia) o szerokim zakresie regulacji zapewniają dodatkową stabilizację dziecka w wózku. Dzięki niezależnej regulacji wysokości, szerokości i kąta pochylenia każdej z pelot możemy sprawić, że spacerówka stanie się wygodnym i bezpiecznym środkiem transportu dla dziecka.

POZYCJA LEŻĄCA

zastosowanie wielu regulacji



Dzięki możliwości dostosowania kąta pochylenia siedziska, oparcia oraz podnóżka możliwe jest ustawienie wózka w pozycji leżącej. Dzięki temu krótka drzemka dziecka jest możliwa niemal w każdym miejscu i sytuacji.

ODWRACANE SIEDZISKO

przygotuj wózek do spaceru



Konstrukcja wózka MEWA pozwala na obrócenie siedziska względem kierunku jazdy, dzięki czemu możesz mieć pod kontrolą stan zdrowia i samopoczucie małego podopiecznego.

KOMPAKTOWA RAMA

łatwe składanie i transport



Konstrukcja wózka specjalnego MEWA umożliwia jego szybkie składanie i rozkładanie, a niewielkie wymiary elementów po złożeniu ułatwiają jego transport i przechowywanie.

WSPARCIE JAZDY

kompleksowy układ jezdny



Wózek posiada wiele udogodnień w prowadzeniu, takich jak blokada kierunku jazdy na przednich kołach, centralny hamulec, amortyzacja na wszystkich kołach, a także stopka przechyłowa.

funkcjonalne akcesoria *w praktyce*



Regulowane peloty

Budka z okienkiem

pasy 5-punktowe

Wkładki zwięzające i splycające

Regulowany podnózek

Klin

Łatwy system montażu kół

Blokada kierunku jazdy

akcesoria. *bogate możliwości wyposażenia*



wkładka splotająca



wkładki zwężające



wkładka splotająca



regulowane peloty



pasy odwodząco - stabilizujące



klin



barierka zabezpieczająca



stolik terapeutyczny



torba turystyczna



kosz na zakupy



parasolka przeciwsłoneczna



rękawice zimowe



śpiwór na nogi



moskitiera



folia przeciwdeszczowa

parametry.

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA



szerokość siedziska 25* / 32 cm



głębokość siedziska 24* / 28 cm



wysokość oparcia 62 cm



regulacja podnóżka 17 - 32 cm



wymiary po złożeniu: rama L 84 x W 64 x H 26 cm / siedzisko L 88 x W 43 x H 42 cm



waga wózka 20 - 28 kg



długość wózka 94 - 126 cm



wysokość wózka 124 - 129 cm



szerokość wózka 65 cm

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA



wzrost 90 - 125 cm



max waga 40 kg

* z wkładkami zwężającymi / splotającymi