



HERSTELLER MEDIZINISCHER GERÄTE /  
Werbeunternehmen:  
**MyWam Kupiec, Bartold, Angres Sp.J.**

# POLNISCHER HERSTELLER VON SPEZIALROLLSTÜHLEN FÜR KINDER

[www.mywam.eu](http://www.mywam.eu)



ACHTUNG: Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen dienen nur zu Illustrations- und Aufklärungszwecken, daher: 1) sie stellen kein kommerzielles Angebot im Sinne des Handelsrechts dar, 2) sie können nicht als Entscheidungsgrundlage für die Annahme oder Nichtannahme verwendet werden Behandlung oder andere medizinische Verfahren. Die Interpretation sollte von einem Facharzt vorgenommen werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten vorzunehmen.

**Dies ist ein medizinisches Gerät.  
Verwenden Sie es gemäß der Gebrauchsanweisung oder dem Etikett.**

Der Spezialrollstuhl GRIZZLY ist für Kinder mit motorischen Störungen und Erkrankungen gedacht, die ihre Bewegung erheblich erschweren oder unmöglich machen. Er ist für Kinder mit einer Körpergröße von 85 bis 140 cm und einem Gewicht von bis zu 45 kg geeignet.

GRIZZLY ist mit einem komplexen Stabilisierungssystem auf Kopf-, Rumpf- und Hüftenebene ausgestattet, das aus in Höhe, Breite, Tiefe und Winkel verstellbaren Stützpolstern besteht. Außerdem ermöglicht das "ICH WACHSE MIT DIR"-System eine präzise Einstellung der Sitztiefe und der Rückenlehnenhöhe. In Kombination mit der höhenverstellbaren Fußstütze erhalten Sie einen Spezialrollstuhl, der ideal auf die Bedürfnisse Ihres Kindes abgestimmt ist und Ihnen viele Jahre lang gute Dienste leisten wird.

Neben vielen nützlichen Funktionen, wie der WIEGE oder der Wendefunktion des Sitzes (in oder entgegen der Fahrtrichtung), kann der GRIZZLY-Rollstuhl auch ein positives Ergebnis des ISO 7176-19 Crashtests vorweisen, wodurch er für den Transport von Kindern in dafür geeigneten Fahrzeugen verwendet werden kann.

### INDIKATIONEN:

Lähmungen und Paresen der unteren Gliedmaßen verschiedenen Ursprungs, Lähmungen und Paresen des Rumpfes, Schwäche der Haltungsmuskeln, die für die Aufrechterhaltung der korrekten Körperhaltung verantwortlich sind, am häufigsten verursacht durch Erkrankungen wie zerebrale Lähmung oder Meningospinalhernie.

### KONTRAINDIKATIONEN:

Im Falle einer Kontraindikation für das Sitzen und/oder passive Aufrichten sollte die Einstellung des Rollstuhls mit dem Physiotherapeuten oder dem behandelnden Arzt abgesprachen werden.



## Farbversionen.

**POLSTERUNG**  
Leinenimitation

**RAHMEN**  
lackiert / glänzend

**POLSTERUNG**  
Leinenimitation

**RAHMEN**  
lackiert / glänzend



**POLSTERUNG**  
Leinenimitation

**RAHMEN**  
lackiert / glänzend



**Dies ist ein medizinisches Gerät.  
Verwenden Sie es gemäß der Gebrauchsanweisung oder dem Etikett.**

# Funktionen. *Sicherheit und Komfort*

## WIEGE-FUNKTION

*Einfache Einstellung*



0°-30°

4 Positionen

## RÜCKENLEHNENEINSTELLUNG

*Großer Verstellbereich*



0°- 81°

6 Positionen

## FUSSSTÜTZENEINSTELLUNG

*Schnell und einfach verstellbar*



55°- 180°

5 Positionen

## ICH WACHSE MIT DIR


*Einstellbare Parameter*



Der GRIZZLY Rollstuhl zeichnet sich durch sein "ICH WACHSE MIT DIR"-System aus. Die Möglichkeit, die Sitztiefe auf 37 cm, die Höhe der Rückenlehne auf 70 cm und die Fußstütze auf 40,5 cm unterhalb der Sitzebene einzustellen, vergrößert seinen Verstellbereich erheblich, so dass der Rollstuhl Ihnen über viele Jahre dienen wird.

## UMFASSENDE STABILISATION

*Einstellbare Polsterstützen*

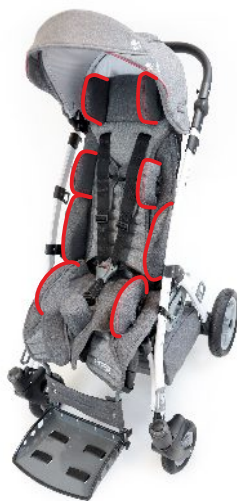

Drei Paar Polsterstützen auf Kopf-, Brust- und Hüfthöhe mit einer breiten Palette an vertikalen, horizontalen, Tiefen- und Winkeleinstellungen bieten außergewöhnliche Stabilität, Sicherheit und Komfort für Ihr Kind. Die Seitenteile des Sitzes bieten zusätzlichen Schutz.

## POSITION IM LIEGEN

*Verwendung von mehreren Einstellungen*



Dank der Möglichkeit, den Neigungswinkel des Sitzes, der Rückenlehne und der Fußstütze zu verstellen, können Sie den Rollstuhl in eine zurückgelehnte Position bringen. So ist ein kurzer Mittagsschlaf für Ihr Kind fast überall und in jeder Situation möglich.



## WENDBARE SITZFLÄCHE

Bereiten Sie den Rollstuhl für einen Spaziergang vor



Die Konstruktion des GRIZZLY Rollstuhls ermöglicht es Ihnen, den Sitz entgegen der Fahrtrichtung zu drehen, damit Sie das Wohlbefinden Ihres Kindes im Auge behalten können.

## KOMPAKTER RAHMEN

Leicht zusammenzulegen und zu transportieren



Die Konstruktion des GRIZZLY Spezialrollstuhls ermöglicht ein schnelles Zusammen- und Aufklappen. Zudem erleichtern die geringen Abmessungen der einzelnen Komponenten im zusammengeklappten Zustand den Transport und die Aufbewahrung des Rollstuhls.

## FAHRUNTERSTÜTZUNG

Komplexes Fahrwerk



Der Rollstuhl verfügt über eine Vielzahl an Fahrhilfen, wie etwa Richtungsfeststeller an den Vorderrädern, Zentralbremse, Stoßdämpfung an allen Rädern sowie eine Kippfußstütze.

# Funktionelles Zubehör. *In der Praxis*




Vordach mit Lüftungspaneel



Verstellbare Polsterstützen

Höhen- und winkelverstellbare Fußstütze

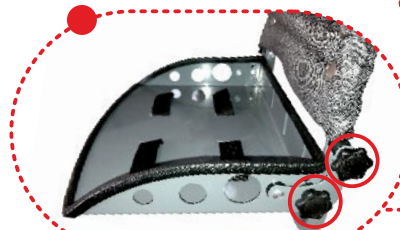

Sicherheitsbügel



Fahrtrichtungssperre

Einfaches Radmontagesystem



# Zubehör. *Vielseitige Ausstattungsoptionen*



Verstellbare Polsterstützen



Seitenelemente der Rückenlehne



Abduktions- und Stabilisierungsurte



Keil



Vordach mit Lüftungspaneel



Sicherheitsbügel



Einkaufskorb



Tasche



Therapietisch



Sonnenschirm



Winter-Handschuhe



Set GRIZZLY BÄR



Regenschutzfolie



Fußsack







Moskitonetz







Set GRIZZLY BÄR

## Parameter.

### TECHNISCHE DATEN DES ROLLSTUHL

-  Sitzflächenbreite 18\* - 40 cm
-  Sitzflächentiefe 25 - 37 cm
-  Höhe der Rückenlehne 57 - 70 cm
-  Einstellung der Fußstütze 23 - 40,5 cm

-  Gewicht des Rollstuhls 20 - 28 kg
-  Länge des Rollstuhls 97 - 115 cm
-  Höhe des Rollstuhls 108 - 123 cm
-  Breite des Rollstuhls 65 cm

### BENUTZERPARAMETER

-  Körpergröße 85 - 140 cm
-  maximales Gewicht 45 kg

 Maße nach dem Zusammenklappen: Rahmen L 80 x B 64 x H 35 cm / Sitzfläche L 72 x B 43 x H 47 cm

\* mit Polsterstützen