



ПОЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКИХ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

www.mywam.eu



ПРИМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в настоящей брошюре, предназначена только для ознакомления и образовательных целей, и поэтому: 1) не является коммерческим предложением согласно коммерческому праву, 2) не может служить основой для принятия решений, касающихся принятия или непринятия лечения, или других медицинских процедур. Интерпретация должна быть произведена врачом специалистом. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию.

Это медицинский прибор.
Используйте их в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

MeWa



ПОЛЬСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКИХ
ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК

CE MD MEDICAL DEVICE - CLASS I

Специальная инвалидная коляска MEWA предназначена для детей, которые не могут ходить или сидеть в правильном положении из-за травмы или другого заболевания. Эта коляска подходит для детей ростом от 90 до 125 см и весом до 40 кг.

Благодаря регулируемым боковинам по высоте головы и туловища можно оптимизировать положение ребенка в коляске, обеспечивая его устойчивость и безопасность. Кроме того, регулировка сиденья (функция люльки) и спинки позволяет регулировать положение коляски под нужды ребенка, что существенно влияет на комфорт путешествия.

Большие гелевые колеса с амортизацией и регулируемая ножка для подъема передней части коляски облегчают преодоление небольших препятствий, таких как низкие лестницы или бордюры. Дополнительным преимуществом коляски является современный дизайн.

ПОКАЗАНИЯ:

параличи и парезы нижних конечностей различного происхождения, параличи и парезы туловища, ослабление постуральных мышц, отвечающих за поддержание правильного положения тела, чаще всего вызванные такими состояниями, как церебральный паралич или менингеальная грыжа.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

В случае противопоказаний к сидячему и/или пассивному вертикальному положению регулировку коляски следует согласовать с физиотерапевтом или лечащим врачом.



ЦВЕТОВЫЕ ВЕРСИИ.

ОБИВКА
синтетическая

РАМА
лакированная / глянцевая

ОБИВКА
синтетическая

РАМА
лакированная / глянцевая



ОБИВКА
синтетическая


РАМА
лакированная / глянцевая

ОБИВКА
синтетическая

РАМА
лакированная / глянцевая

ОБИВКА
синтетическая

РАМА
лакированная / глянцевая

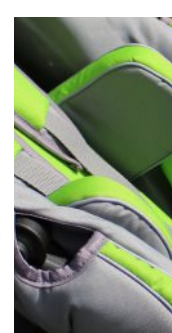

Это медицинский прибор.
Используйте их в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

функции. *безопасности и комфорта*

ФУНКЦИЯ КОЛЫБЕЛИ

легкая посадка



5,5°-21,5°

4 позиции

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

широкий спектр



8° - 86°

4 позиции

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ

быстро и легко



64° - 180°

5 позиций

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ

набор вставок



Коляска MEWA может быть укомплектована набором сужающих подушек и вставок, позволяющих уменьшить внутренние параметры коляски - в зависимости от индивидуальных потребностей ребенка. Благодаря такому решению коляска прослужит вам еще дольше.

СТАБИЛИЗАЦИЯ

регулируемые боковины



Две пары боковин с широким диапазоном регулировок обеспечивают дополнительную стабилизацию ребенка в коляске. Благодаря независимой регулировке высоты, ширины и угла наклона каждой коляски мы можем сделать коляску удобным и безопасным средством передвижения для ребенка.

ЛЕЖАЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

возможности регулировок



Благодаря возможности регулировки угла наклона сиденья, спинки и подставки для ног можно установить коляску в лежачем положении. Благодаря этому короткий сон возможен практически в любом месте и ситуации.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ

по мере необходимости



Конструкция коляски MEWA позволяет поворачивать сиденье по отношению к направлению движения, благодаря чему вы можете контролировать здоровье и самочувствие ребенка.

КОМПАКТНАЯ РАМА

легкое складывание



Конструкция специальной коляски MEWA позволяет быстро складывать и раскладывать, а небольшие размеры элементов после складывания облегчают транспортировку и хранение.

ПОДДЕРЖКА ВОЖДЕНИЯ

комплексная ходовая часть



Коляска имеет множество функций вождения, таких как блокировка направления на передних колесах, центральный тормоз, амортизация всех колес и регулируемая ножка.

функциональные аксессуары.



регулируемый капюшон с окном



регулируемые боковины

пятиточечные ремни



сужающиеся подушки и вставки



регулируемая подставка для ног



клин



удобная система крепления колес



блокировка направления



аксессуары. *большой выбор*



сужающая подушка



сужающие вставки



сужающая подушка



регулируемые боковины



ремни для удержания
и стабилизации



клин с регулировкой



барьерка безопасности



терапевтический столик



туристическая сумка



корзина для покупок



зонтик



зимние перчатки



спальный мешок



москитная сетка



дождевик

параметры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОЛЯСКИ

 ширина сиденья 25* / 32 см

 глубина сиденья 24* / 28 см

 высота спинки 62 см

 регулировка подножки 17-32 см

 вес коляски 20 - 28 кг

 длина коляски 94 - 126 см

 высота коляски 124-129 см

 ширина коляски 65 см

ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 высота 90-125 см

 максимальный вес 40 кг

 Размеры в сложенном виде: рама L 84 x W 64 x H 26 см / сиденье L 88 x W 43 x H 42 см

* с сужающими / смельчающими вставками