



HERSTELLER MEDIZINISCHER GERÄTE /
Werbeunternehmen:
MyWam Kupiec, Bartold, Angres Sp.J.

POLNISCHER HERSTELLER VON SPEZIALROLLSTÜHLEN FÜR KINDER

www.mywam.eu



ACHTUNG: Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen dienen nur zu Illustrations- und Aufklärungszwecken, daher: 1) sie stellen kein kommerzielles Angebot im Sinne des Handelsrechts dar, 2) sie können nicht als Entscheidungsgrundlage für die Annahme oder Nichtannahme verwendet werden Behandlung oder andere medizinische Verfahren. Die Interpretation sollte von einem Facharzt vorgenommen werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten vorzunehmen.

**Dies ist ein medizinisches Gerät.
Verwenden Sie es gemäß der Gebrauchsanweisung oder dem Etikett.**



POLNISCHER HERSTELLER VON SPEZIALROLLSTÜHLEN FÜR KINDER

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Der Spezialrollstuhl YETI wurde als Antwort auf die besonderen Bedürfnisse von älteren Kindern mit einem Gewicht von bis zu 80 kg und einer Körpergröße von bis zu 175 cm konzipiert. Dank seiner soliden Konstruktion und einer breiten Palette von Parametereinstellungen kann er die Benutzerbedürfnisse auf höchstem Niveau erfüllen. Mit dem ICH WACHSE MIT DIR-System können Sie die Größe des Rollstuhls an die Größe Ihres Kindes anpassen, so dass er Ihnen viele Jahre lang dienen wird.

Die Winkelverstellung von Sitz und Rückenlehne ermöglicht es Ihnen, die optimale Position des Rollstuhls an die Bedürfnisse Ihres Kindes anzupassen. Darüber hinaus erleichtern eine Vielzahl von praktischem Zubehör und ein schneller Klappmechanismus den täglichen Gebrauch.

Die YETI-Federung mit Vollgel-Rädern, die Zentralbremse, die Stoßdämpfung an den Hinterrädern, der Kippfuß sowie der Richtungsfeststeller garantieren eine leichte und sanfte Fahrt. Ein weiterer Vorteil des Rollstuhls ist sein modernes und praktisches Design.

INDIKATIONEN:

Lähmungen und Paresen der unteren Gliedmaßen verschiedenen Ursprungs, Lähmungen und Paresen des Rumpfes, Schwäche der Haltungsmuskeln, die für die Aufrechterhaltung der korrekten Körperhaltung verantwortlich sind, am häufigsten verursacht durch Erkrankungen wie zerebrale Lähmung oder Meningospinalhernie.

KONTRAINDIKATIONEN:

Im Falle einer Kontraindikation für das Sitzen und/oder passive Aufrichten sollte die Einstellung des Rollstuhls mit dem Physiotherapeuten oder dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.



Farbversionen.

POLSTERUNG
synthetisch

RAHMEN
lackiert / glänzend

POLSTERUNG
synthetisch

RAHMEN
lackiert / glänzend



**Dies ist ein medizinisches Gerät.
Verwenden Sie es gemäß der Gebrauchsanweisung oder dem Etikett.**

Funktionen. *Sicherheit und Komfort*

WIEGE-FUNKTION

Einfache Einstellung



9,5°-29°

5 Positionen

RÜCKENLEHNENEINSTELLUNG

Großer Verstellbereich



3°- 99°

8 Positionen

FUSSSTÜTZENEINSTELLUNG

Schnell und einfach verstellbar



80°- 180°

6 Positionen

EINSTELLUNG DER PARAMETER

Verengende Einlagen



Das Set aus verengenden Einlagen besteht aus vier unabhängigen Einlagen, die mit Klettverschluss versehen sind. Dank der Möglichkeit, sie in jeder Höhe und jedem Winkel zu montieren, können Sie eine optimale Position im Rollstuhl und eine bequeme Fahrt für Ihr Kind gewährleisten.

ICH WACHSE MIT DIR

Einstellbare Parameter



Der YETI Rollstuhl zeichnet sich durch sein "ICH WACHSE MIT DIR"-System aus. Die Möglichkeit, die Sitztiefe auf 45 cm, die Höhe der Rückenlehne auf 85 cm und die Fußstütze auf 43,5 cm unterhalb der Sitzebene einzustellen, vergrößert den Verstellbereich erheblich, so dass der Rollstuhl Ihnen über viele Jahre dienen wird.

POSITION IM LIEGEN

Verwendung von mehreren Einstellungen



Dank der Möglichkeit, den Neigungswinkel des Sitzes, der Rückenlehne und der Fußstütze zu verstellen, können Sie den Rollstuhl in eine zurückgelehnte Position bringen. So ist ein kurzer Mittagsschlaf für Ihr Kind fast überall und in jeder Situation möglich.

WINDKLAPPEN

Multifunktionale Polsterung



YETI verfügt über verstellbare seitliche Windklappen für zusätzlichen Schutz bei widrigen Wetterbedingungen.

ZUSAMMENKLAPPBARER RAHMEN

Für einfachen Transport und Lagerung



Die Konstruktion des Rollstuhlrahmens ermöglicht ein schnelles Zusammenklappen des Rollstuhls, um ihn für den Transport oder die Lagerung vorzubereiten.

FAHRUNTERSTÜTZUNG

Komplexes Fahrwerk



Der YETI Rollstuhl verfügt über eine Vielzahl an Fahrhilfen, wie etwa Richtungsfeststeller an den Vorderrädern, Zentralbremse, Hinterradfederung und Kippfußstütze.

Funktionelles Zubehör. *In der Praxis*



Vordach mit Belüftungspaneel



5-Punkt-Gurte



Kopfstütze

Verengende Einlagen



Keil

Abduktions- und Stabilisierungsgurte



Fahrrichtungssperre

Einfaches Radmontagesystem




Zubehör. *Vielseitige Ausstattungsoptionen*



Verengende Einlagen



Kopfstütze

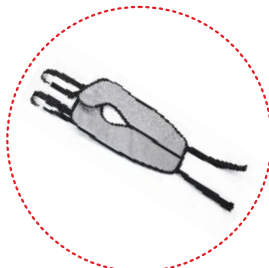

Abduktions-
und Stabilisierungsgurte



Keil



Vordach mit Lüftungspaneel



Sicherheitsbügel



Einkaufskorb



Tasche



Sonnenschirm



Winter-Handschuhe



Therapietisch



Fußsack



Moskitonetz



Regenschutzfolie

Parameter.

TECHNISCHE DATEN DES ROLLSTUHL



Sitzflächenbreite 28* / 43 cm



Sitzflächentiefe 31 - 45 cm



Höhe der Rückenlehne 65 - 85 cm



Einstellung der Fußstütze 28,5 - 43,5 cm



Gewicht des Rollstuhls 24 - 28,6 kg



Länge des Rollstuhls 114,5 - 146 cm



Höhe des Rollstuhls 117 - 138 cm



Breite des Rollstuhls 66 cm



Abmessungen nach dem Zusammenlegen: L 110 x B 66 x H 50 cm

BENUTZERPARAMETER



Körpergröße 130 - 175 cm



maximales Gewicht 80 kg

*mit Verengungseinlagen