



**POLSKI PRODUCENT
SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
DLA DZIECI**

PRODUCENT / PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:
MyWam Kupiec Bartold Angres sp.j.

delfi

leżak kąpielowy

Leżak kąpielowy **DELFI** przeznaczony jest dla młodych pacjentów o masie ciała do 30 kg. Jego podstawowym zadaniem jest umożliwienie opiekunowi swobodnego wykonywania czynności kąpielowych oraz higienicznych na umieszczonym na nim użytkowniku, przy odpowiednim jego zabezpieczeniu i w optymalnej dla niego pozycji. Stosunkowo duża powierzchnia leżaka umożliwia opiekunowi wykonywanie swobodnych ruchów. Leżak kąpielowy **DELFI** przeznaczony jest do stosowania w wannie lub pod prysznicem.

Szereg niezbędnych zabezpieczeń, takich jak regulowany zagłówek stabilizujący, pas stabilizujący tułów oraz pasy stabilizujące nogi istotnie wpływają na bezpieczeństwo użytkownika w trakcie kąpieli. Podpory leżaka owinięte są pianką, zapewniającą przyczepność oraz chroniącą powierzchnie przed zarysowaniem.

Możliwości regulowania poszczególnych segmentów leżaka – kąt odchylenia zagłówka, kąt odchylenia oparcia oraz podnóżka w połączeniu z możliwością dostosowania wysokości oparcia oraz głębokości siedziska pozwala na zoptymalizowanie pozycji pacjenta oraz dostosowanie wyrobu do indywidualnych parametrów użytkownika we wskazanym zakresie.



zdjęcia poglądowe

WSKAZANIA

Wskazania kliniczne to m.in. mózgowie porażenie dziecięce, przepuklina oponowa – rdzeniowa, dystrofia, niedowład, uszkodzenia kończyn itp.

PRZECIWSKAZANIA / RYZYKO

Nieprawidłowe ułożenie i długotrwałe utrzymywanie osoby w jednej pozycji może nieść ze sobą negatywne skutki.

WAŻNE

Użytkownik może korzystać z leżaka wyłącznie z pomocą opiekuna. Stosowanie wyrobu inne niż opisane w instrukcji użytkownika jest zakazane.

Wyrób powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego lub fizjoterapeuty.

KONSTRUKCJA

Leżak kąpielowy **DELFI** posiada lekką, aluminiową konstrukcję stanowiącą szkielet o ruchomych segmentach z regulacją na wysokości szyi, bioder oraz ud. Posiada także regulację wysokości oparcia oraz głębokości siedziska, co umożliwia dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Lekki stelaż został wykonany z aluminiowych rurek wypełnionych pianką poliuretanową, zapobiegającą dostawaniu się wody do ich wnętrza. Naciągnięta na niego perforowana tapicerka wykonana z tkaniny syntetycznej jest obojętna na działanie wody, a jej struktura wpływa na krótki czas schnięcia leżaka.

MODYFIKACJA PARAMETRÓW

Leżak kąpielowy **DELFI** posiada określony zakres regulacji głębokości siedziska oraz wysokości oparcia. W połączeniu z elastyczną tapicerką zyskujemy urządzenie dostosowane do indywidualnych potrzeb małego pacjenta.



CE MD

**To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**

funkcjonalności leżaka kąpielowego


REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA ZAGŁÓWKA

Funkcja regulacji kąta odchylenia zagłówka pomaga w dostosowaniu bezpiecznej i wygodnej pozycji głowy dziecka podczas kąpieli, dzięki czemu woda nie wpada do oczu dziecka np. podczas mycia włosów.




REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA OPARCIA PLECÓW

Regulacja kąta odchylenia oparcia pleców daje możliwość usadowania podopiecznego w optymalnej dla niego pozycji, co gwarantuje komfort oraz bezpieczeństwo podczas kąpieli.

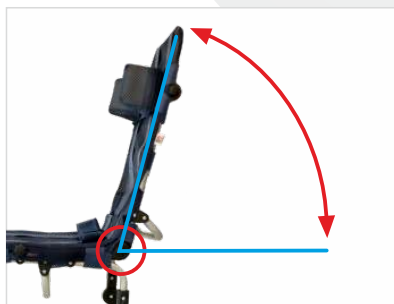

REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA OPARCIA NÓG

Regulacja kąta odchylenia oparcia nóg pozwala na dostosowanie optymalnej pozycji nóg dziecka podczas kąpieli, umożliwiając opiekunowi swobodne wykonanie czynności higienicznych w możliwie dogodnej pozycji.

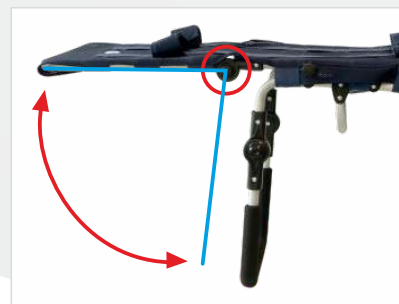

niezbędne akcesoria

ZAGŁÓWEK

Regulowany zagłówek zabezpiecza i stabilizuje głowę dziecka podczas kąpieli, uniemożliwiając jej niekontrolowane opadanie.



PAS STABILIZUJĄCY TUŁÓW

Elastyczny pas stabilizujący tułów stabilizuje użytkownika podczas kąpieli uniemożliwiając zsuniecie się dziecka z leżaka.



PASY STABILIZUJĄCE NOGI

Dwa indywidualne pasy stabilizujące nogi pozwalają na zabezpieczenie i unieruchomienie nóg użytkownika podczas czynności higienicznych, a w razie potrzeby na szybkie ich wypięcie.



zdjęcia poglądowe

PARAMETRY

DŁUGOŚĆ LEŻAKA	136,8 - 148,8 cm
SZEROKOŚĆ LEŻAKA	41,8 cm
WYSOKOŚĆ LEŻAKA	98 cm
MASA CAŁKOWITA	4,9 kg
GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA	38 - 42 cm
SZEROKOŚĆ SIEDZISKA	40 cm
WYSOKOŚĆ OPARCIA	60,5 - 68,5 cm
SZEROKOŚĆ OPARCIA	40 cm
DŁUGOŚĆ PODNÓŻKA	38 cm
KĄT SIEDZISKA	4,5 °
KĄT ODCHYLENIA OPARCIA	10 - 65 °
KĄT USTAWIENIA PODNÓŻKA	+2 - 52 °
KĄT MIĘDZY OPARCIEM A SIEDZISKIEM	105 - 166 °
MAKSYMALNA WAGA PACJENTA	30 kg



MyWam Kupiec Bartold Angres sp.j.
41-516 Chorzów, ul. Szczecińska 10
NIP: 627 273 67 93
e-mail: mywam@mywam.pl



delfi

www.mywam.eu

UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie poglądowy oraz edukacyjny w związku z czym: 1) nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów prawa handlowego, 2) nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia lub innych procedur medycznych. Interpretacji powinien dokonać lekarz specjalista. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyrobach.