

Alfa flex

WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY DLA DZIECI

INFORMACJE OGÓLNE

ALFA FLEX – specjalny wózek inwalidzki z siedziskiem i oparciem **wyposażonym w wyjmowane poduszki ortopedyczne Stabilo**. Dedykowany jest dzieciom w przedziale wzrostu **100 – 150 cm** i maksymalnej wadze **55 kg**.

Ten innowacyjny wózek inwalidzki został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie i indywidualnym dopasowaniu do potrzeb użytkownika. Zarówno siedzisko, jak i oparcie wózka składają się z wyjmowanych poduszek ortopedycznych Stabilo, które zapewniają doskonałe podparcie ciała oraz stabilizację postawy użytkownika.

W połączeniu z możliwością dopasowania **kąta pochylecia** w obrębie oparcia, siedziska i podnóżka oraz zainstalowania **regulowanych pelot** do podtrzymania poduszek, otrzymujemy kompleksowy sprzęt zapewniający maksymalne bezpieczeństwo i funkcjonalność na lata.

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA LUB ETYKIETĄ.**



REGULACJA POCHYLENIA OPARCIA



FUNKCJA KOŁYSKI



REGULACJA PODNÓŻKA

WSKAZANIA

- porażenia i niedowłady kończyn dolnych różnego pochodzenia
- porażenia i niedowłady tułowia
- osłabienie mięśni posturalnych, odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała
- mózgowe porażenie dziecięce
- przepuklina oponowa – rdzeniowa
- dystrofie mięśniowe

PRZECIWWSKAZANIA

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej, regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutką lub lekarzem prowadzącym.

KONSTRUKCJA

Konstrukcja wózka specjalnego **ALFA FLEX** złożona jest z dwóch elementów: ramy z siedziskiem oraz oparcia. Oparcie mocujemy do ramy z siedziskiem, dzięki prostemu mechanizmowi mocowania (szczegóły zawarte w instrukcji).

Dodatkowo do zestawu dołożone są 3 rodzaje poduszek – **poduszka na zagłówek (1)**, **oparcie stabilizujące plecy (2)** oraz **siedzisko z klinem i bocznymi pelotami (3)**. Specjalna konstrukcja poduszek wspomaga prawidłowe ułożenie kręgosłupa oraz zmniejsza nacisk na wrażliwe punkty ciała, zapobiegając odleżynom i dyskomfortowi.



UWAGA! Przed posadzeniem dziecka w wózku należy upewnić się, że mechanizm został prawidłowo zablokowany po obu stronach wózka chwytając za oparcie i delikatnie potrząsając nim. Poprawnie zamontowane oparcie pozostanie na swojej pozycji.

MODYFIKACJA PARAMETRÓW

Poduszki **Stabilo** można swobodnie kształtować i dopasowywać do anatomii użytkownika dzięki **dołączonej do zestawu pompki**. Regulacja odbywa się w prosty sposób, pozwalając na precyzyjne ustawienie kształtu siedziska i oparcia, co zwiększa komfort oraz poprawia ergonomię siedzenia.

Wózek posiada również możliwość dostosowania wysokości **peloty zagłówka (1)**, **wysokości oparcia (2)**, jak również **możliwość wydłużenia siedziska (3)** oraz **dostosowanie podnóżka (4)** pod indywidualne potrzeby dziecka.

1.



REGULACJA ZAGŁÓWKA

2a.



2b.



REGULACJA WYSOKOŚCI OPARCIA

3a.




3b.



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA

4a.

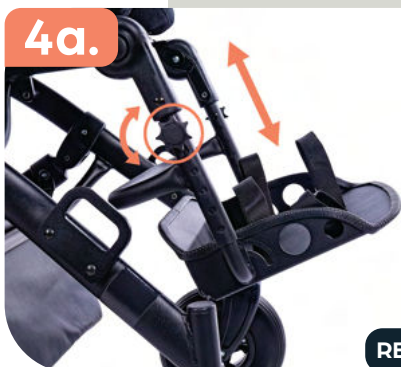

4b.



REGULACJA WYSOKOŚCI PODNÓŻKA

AKCESORIA



**KAMIZELKA
ZABEZPIEZAJĄCA**



**REGULOWANE
PELOTY**



BARIERKA



**PASY ODWODZĄCO-
STABILIZUJĄCE**



KOSZ NA ZAKUPY



RĘKAWICE ZIMOWE



**STOLIK
TERAPEUTYCZNY**



**REGULOWANA
BUDKA Z OKIENKIEM**



**PLECAK
TURYSTYCZNY**



**PARASOLKA
PRZECIWSŁONECZNA**



**PODUSZKA
ZAGŁÓWKA**



PODUSZKA OPARCIA



**PODUSZKA
SIEDZISKA Z KLINEM**



**FOLIA
PRZECIWDESZCZOWA**



ŚPIWÓR



MOSKITIERA

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA

szerokość siedziska: 20 – 33 cm*

głębokość siedziska: 30 – 37 cm*

wysokość oparcia: 63 – 72 cm*

szerokość oparcia: 20 – 33 cm**

odległość podnóżka od siedziska/ilość regulacji: 33 – 43 cm, 6 pozycji

* wartość podana z zastosowaniem poduszek Stabilo

** wartość podana z zastosowaniem pelot

masa całkowita: 26 kg

długość wózka: 100 – 145 cm

wysokość wózka: 94 – 147 cm

szerokość wózka: 66 cm

WAŻNE! Wybór wsparcia ortopedycznego właściwego dla konkretnego schorzenia i stanu pacjenta musi zostać dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykiety, bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.