



delfi

BATH CHAIR



PIEŁĘGNACJA HIGIENY KOMFORTOWA I BEZPIECZNA

NEW

Podstawową funkcją **leżaka kąpielowego DELFI** jest zapewnienie opiekunom możliwości łatwego wykonywania czynności kąpielowych i higienicznych przy jednoczesnym zapewnieniu **maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu** użytkownika. Jego przestronna konstrukcja pozwala na nieograniczony ruch, dzięki czemu rutynowe czynności higieniczne są wygodniejsze. **Leżak nadaje się do stosowania zarówno w wannach, jak i pod prysznicem.**

Leżak kąpielowy DELFI jest dostępny w trzech rozmiarach, aby pomieścić pacjentów o różnej wadze i potrzebach:

Wersja S – dla pacjentów o wadze do **30 kg**

Wersja M – dla pacjentów o wadze do **50 kg**

Wersja L – dla pacjentów o wadze do **70 kg**

Leżak kąpielowy DELFI wyposażony jest w szereg niezbędnych funkcji bezpieczeństwa, takich jak **regulowany zagłówek, pas stabilizujący tułów oraz pasy na nogi**, które znacznie zwiększają poziom bezpieczeństwa podczas kąpieli. Dodatkowo podpory fotela pokryte są pianką, która nie tylko zapewnia doskonałą przyczepność, ale również chroni powierzchnie przed zarysowaniem.

Możliwości regulacji poszczególnych segmentów fotela – **kąta zagłówka, kąta oparcia i kąta podnóżka** w połączeniu z możliwością regulacji głębokości siedziska pozwalają na optymalizację pozycji pacjenta i dostosowanie produktu do indywidualnych parametrów użytkownika w podanym zakresie.

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA LUB ETYKIETĄ.**

WSKAZANIA

- mózgowe porażenie dziecięce
- przepuklina oponowo-rdzeniowa,
- dystrofie,
- niedowłady,
- uszkodzenia kończyn itp.

PRZECIWWSKAZANIA

Nieprawidłowe ułożenie i długotrwałe utrzymanie osoby w jednej pozycji może nieść ze sobą negatywne skutki.

KONSTRUKCJA


Leżak kąpielowy DELFI ma aluminiową konstrukcję, która jest szkieletem z ruchomymi segmentami z regulacją **na wysokości szyi (1), bioder (2) i ud (3)**. Posiada również **regulowaną głębokość siedziska**, co pozwala na dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Lekka rama wykonana jest z uszczelnionych rurek aluminiowych, co zapobiega przedostawaniu się wody do środka. Perforowana **tapicerka z tkaniny syntetycznej naciągnięta na nią jest obojętna na działanie wody**, a jej struktura wpływa na krótki czas schnięcia leżaka.



MODYFIKACJA PARAMETRÓW

Leżak kąpielowy DELFI ma określony zakres regulacji głębokości siedziska. W połączeniu z elastyczną tapicerką uzyskujemy urządzenie dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

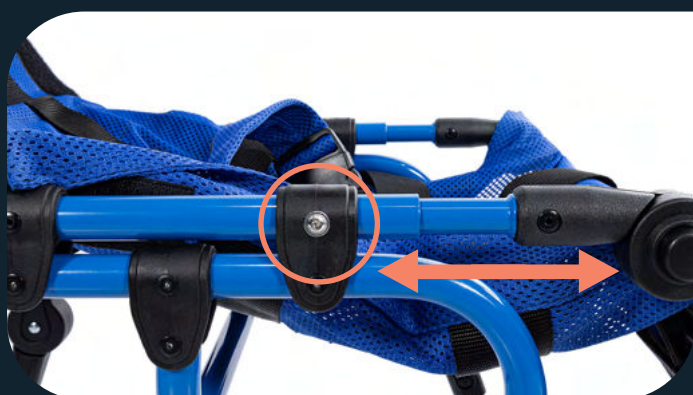

REGULACJE

REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA ZAGŁÓWKA

Funkcja regulacji kąta odchylenia zagłówka pomaga w dostosowaniu bezpiecznej i wygodnej pozycji głowy dziecka podczas kąpieli, dzięki czemu woda nie wpada do oczu dziecka.

REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA OPARCIA PLECÓW

Regulacja kąta odchylenia oparcia pleców daje możliwość usadowienia podopiecznego w optymalnej dla niego pozycji, co gwarantuje komfort oraz bezpieczeństwo podczas kąpieli.

REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA OPARCIA NÓG

Regulacja kąta odchylenia oparcia nóg pozwala na dostosowanie optymalnej pozycji nóg dziecka podczas kąpieli, umożliwiając opiekunowi swobodne wykonanie czynności higienicznych w możliwie dogodnej pozycji.



LEŻAK KĄPIELOWY KOLORY



NIEBIESKA tapicerka



POMARAŃCZOWA tapicerka



ZIELONA tapicerka

AKCESORIA



PELOTY ZAGŁÓWKA



PAS BIODROWY



STABILIZUJĄCE
PASY NA NOGI



PAS STABILIZUJĄCY



PELOTY BIODROWE

TRZY WERSJE / TRZY ROZMIARY



PARAMETRY TECHNICZNE LEŻAKA

długość leżaka: 138 – 142 cm
szerokość leżaka: 39 cm
masa całkowita leżaka: 5,4 kg

głębokość siedziska: 38 – 42 cm
wysokość oparcia: 45 cm
długość podnóżka: 37 cm

max. waga pacjenta: 30 kg

długość leżaka: 157 – 161 cm
szerokość leżaka: 44 cm
masa całkowita leżaka: 5,8 kg

głębokość siedziska: 38 – 42 cm
wysokość oparcia: 51 cm
długość podnóżka: 47 cm

max. waga pacjenta: 50 kg

długość leżaka: 174 – 182 cm
szerokość leżaka: 49 cm
masa całkowita leżaka: 6,7 kg

głębokość siedziska: 40 – 50 cm
wysokość oparcia: 56 cm
długość podnóżka: 51 cm

max. waga pacjenta: 70 kg

WAŻNE! Wybór wsparcia ortopedycznego właściwego dla konkretnego schorzenia i stanu pacjenta musi zostać dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.