HERSTELLER / MARKETING UND WERBUNG: MyWam Sp. z o.o.

CE

MyWam®

alfa flex

ILLUSTRATIVES FOTO



Gebrauchsanweisung

Ausgabe 5 / 20.10.2026

Kinderwagen für besondere Bedürfnisse ALFA flex

HIERBEI HANDELT ES SICH UM EIN MEDIZINPRODUKT.

VERWENDEN SIE ES GEMÄSS DER GEBRAUCHSANWEISUNG ODER DEM ETIKETT.

ZWECK DER UNTERWEISUNG

Die Gebrauchsanweisung richtet sich an Personen, die sich direkt um behinderte Menschen kümmern (Betreuer - Eltern, Erziehungsberechtigte), die in einem Kinderwagen transportiert werden. Er ist auch für Ärzte und Physiotherapeuten gedacht, die den Kinderwagen bedienen.

BEMERKUNG! Bevor jeder Benutzer mit der Nutzung des Kinderwagens beginnt, ist er verpflichtet, den Inhalt dieser Anleitung zu lesen und zu befolgen.

BEMERKUNG! Im Falle eines medizinischen Zwischenfalls im Zusammenhang mit dem Vorhandensein eines ALFA flex Kinderwagens müssen der Hersteller und die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer oder Patient seinen Wohnsitz hat, unverzüglich schriftlich per Einschreiben oder E-Mail mit Rückschein benachrichtigt werden.

Kontaktdaten des Herstellers:

- Postanschrift: MyWam Sp. z o.o., Plebiscytowa 3, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polen
- Kontakt-Telefonnummer: +48 32 733 11 31
- E-Mail-Adresse: mywam@mywam.eu

Version der Gebrauchsanweisung: DE, **Ausgabe 5 / 2026-10-20**
Die Anleitung wurde mit Microsoft Translator übersetzt.

MyWam Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische und kommerzielle Änderungen am Inhalt der Gebrauchsanweisung vorzunehmen. Jede Änderung wird durch das Datum bestimmt, an dem die Anweisung zuletzt aktualisiert wurde.
Die elektronische Version der Anleitung wird auf der Website von www.mywam.eu

BEMERKUNG! Die Fotos in der Gebrauchsanweisung dienen nur als Referenz und können vom gekauften Produkt abweichen.

MyWam Sp. z o.o. hat ein Qualitätsmanagementsystem gemäß ISO 13485 im Bereich der Entwicklung, Produktion und des Verkaufs von Medizinprodukten der Klasse I eingeführt.

ISO 13485
LL-C (Certification)

Der ALFA flex Kinderwagen wurde in Zusammenarbeit mit STABILO system

INHALTSVERZEICHNIS

1. ZWECK UND ANWENDUNGSHINWEISE 5
2. PLATTEN 5
3. BEZEICHNUNG DER SYMBOLE 5
4. WICHTIGE HINWEISE UND SICHERHEITSREGELN 6
5. ALLGEMEINE KONSTRUKTION DES KINDERWAGENS 7
6. FUNKTIONEN DES KINDERWAGENS 9
6.1. Aufklappen des Kinderwagengestells 9
6.2. Zusammenklappen des Kinderwagengestells 11
6.3. Transportsicherung. Auf- und Absetzen der Transportsicherung 12
6.4. Schwenkbare Räder vorne. Richtungssperre der Vorderräder 12
6.5. Hinterräder. Montage und Demontage der Hinterräder an der Achse 13
6.6. Amortisationssystem für Hinterräder 14
6.7. Schiebegriff für den Kinderwagen 14
6.8. Zentrale Bremse 15
6.9. Kippfuß 15
6.10. Mechanismus zur Befestigung der Rückenlehne am Kinderwagengestell 16
6.11. Sitztiefenverstellung 18
6.12. Rahmenverstellung zur Veränderung des Sitzwinkels 19
6.13. Höhenverstellung der Rückenlehne 19
6.14. Rahmenverstellung des Neigungswinkels der Rückenlehne 20
6.15. Fußstütze 21
6.16. Warnweste 22
6.17. Verstellbares Kopfstützenpolster 23
6.18. Verstellbare thorakolumbale Polster 23
6.19. Verstellbare Hüftpolster 24
6.20. Abduktions- und Stabilisierungsgurte 25
6.21. Sicherheitsbarriere 26
6.22. Verstellbares Vordach mit Fenster 26
6.23. Getränkehalter 27
6.24. Sitz mit Zwickel und Seitenpolstern zur Stabilisierung des gesamten Beckens STABILO 27
6.25. Korsett-Rückenlehne STABILO 28
6.26. STABILO Kopfstützen-Kissen 29
6.27. STABILO Stabilisierungsgurt 30
7. ZUBEHÖR 31
7.1. Verstellbare therapeutische Liege (anstelle einer Sicherheitsbarriere) 31
7.2. Rucksack 31
7.3. Einkaufskorb 31
7.4. Winterhandschuhe 32
7.5. Regenschutz (auf ein verstellbares Verdeck mit Fenster aufsetzen) 32
7.6. Schlafsack für die Beine (auf die Sicherheitsbarriere legen) 32
7.7. Moskitonetz (befestigt an einem verstellbaren Baldachin mit Fenster) 33
7.8. Sonnenschirm 33

8. TECHNISCHE DATEN DES ALFA flex KINDERWAGENS 34
8.1. Materialzusammensetzung des Kinderwagens 34
9. LIEFERUNG UND WERKZEUGE....34
10. AUF- UND ABBAU DES KINDERWAGENS....35
11. VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH 35
12. BEWEGEN DES KINDERWAGENS 36
13. EIN- UND AUSSTEIGEN AUS DEM KINDERWAGEN 37
14. RICHTIGE POSITION IM KINDERWAGEN....37
15. VERWENDUNG DES KINDERWAGENS 38
16. BEWEGEN AUF GENEIGTEN FLÄCHEN....38
17. ÜBERWINDUNG VON SCHWELLEN ODER BORDSTEINEN 38
18. TRANSPORT IM AUTO UND IN ANDEREN FAHRZEUGEN 39
19. REINIGUNG UND PFLEGE....39
20. AUFBEWAHRUNG IHRES KINDERWAGENS....40
21. SERVICE UND REGELMÄSSIGE INSPEKTIONEN....40
22. BESEITIGUNG....41
23. EINHALTUNG DER ANFORDERUNGEN AN MEDIZINPRODUKTE....41
24. LISTE DER AUTORISIERTEN SERVICESTELLEN 42
25. GARANTIEKARTE....43
26. NOTIZEN 44

1. ZWECK UND ANWENDUNGSHINWEISE


Der Kinderwagen für besondere Bedürfnisse ALFA flex ist ein Medizinprodukt der Klasse I, das für Menschen mit Behinderungen zugelassen ist, die aufgrund ihres Zustands nicht selbstständig gehen, stehen oder sitzen können. Das Produkt ist für den Transport und die Bewegung der oben genannten Personen in sitzender oder liegender Position sowie für die Haltungskorrektur bestimmt.
Klinische Indikationen sind m.in, Zerebralparese, Myelomeningozele, Dystrophien, Paresen usw.
Das Produkt ist für Benutzer mit einer Körpergröße von 100-150 cm und einem Gewicht von bis zu 55 kg bestimmt. Das Gerät sollte gemäß den Empfehlungen des behandelnden Arztes oder Physiotherapeuten verwendet werden.

Kontraindikationen:


Bei Kontraindikationen für die Sitzposition und/oder die passive aufrechte Position sollte die Einstellung des Kinderwagens mit einem Physiotherapeuten oder behandelnden Arzt besprochen werden.

2. PLATTEN

Typenschild

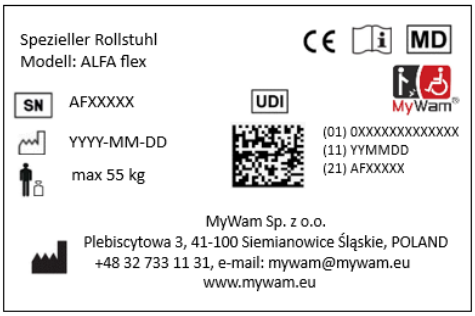

Warnschild

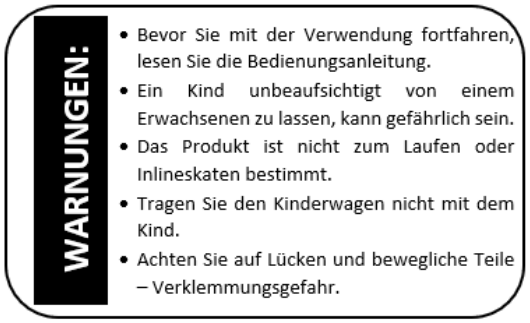

3. BEZEICHNUNG DER SYMBOLE

SN	Seriennummer des Produkts		Name des Herstellers
	Zulässiges Gesamtgewicht des Benutzers	MD	Bei dem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt
	Produktionsdatum	⚠	BESCHREIBUNG "**WARNUNG!**" und das Symbol in dieser Anleitung werden verwendet, um die Aufmerksamkeit des Lesers auf den mit diesem Zeichen gekennzeichneten Inhalt zu lenken. Die Nichtbeachtung der mit dieser Beschreibung gekennzeichneten Inhalte kann ein Risiko für die Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und seiner Begleiter darstellen und auch zu Schäden am Produkt führen.
CE	Konformitätsbewertungszeichen gemäß den geltenden europäischen Verordnungen und Richtlinien		
	Warnung vor dem Verfahren in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung des Produkts		

4. WICHTIGE HINWEISE UND SICHERHEITSREGELN

- Es ist verboten, den Kinderwagen in einer Weise zu verwenden, für die der Kinderwagen nicht bestimmt ist.
- Das Produkt enthält Kleinteile, die gefährlich sein können, wenn sie von einem Kind verschluckt werden!
- **Aufgrund der hohen Verstellbarkeit des Kinderwagens ist es möglich, während der Winkelverstellung des Sitzes und der Winkelverstellung der Rückenlehne eine solche Position einzustellen, in der sich der Kopf des Benutzers unter der Peloviklinie befindet. Es ist verboten, eine solche Position einzunehmen, da dies zu der Gefahr führen kann, dass der Benutzer schluckt oder erstickt.**
- Es ist verboten, zusätzliches Gewicht auf den Kinderwagen zu legen, was insbesondere für das Aufbringen von zusätzlichem Gewicht auf die Rückseite der Rückenlehne, z.B. eines Rucksacks oder einer Tasche, gilt. Dies kann dazu führen, dass der Kinderwagen umkippt und der Benutzer verletzt wird! Gilt nicht für originales Zusatzzubehör für den ALFA flex Kinderwagen, das die zulässige Belastung nicht überschreitet. Alle zusätzlichen Elemente, die am Kinderwagen befestigt sind, beeinflussen seine Stabilität.
- **AUFMERKSAMKEIT!** Einstellungen werden ohne Last (Benutzer) vorgenommen. Beim Gebrauch, Falten und Einstellen von Kinderwagenmechanismen kann die Gefahr bestehen, dass einige Teile des Körpers/der Betreuungsperson des Benutzers in Löchern/Lücken zwischen den Teilen eingeklemmt und/oder gequetscht werden.
- **AUFMERKSAMKEIT!** Abhängig von den vorgenommenen Einstellungen – gilt für die Einstellung des Schiebegriffs des Kinderwagens, die Höhenverstellung der Rückenlehne, die Einstellung des Rückenlehnenwinkels, die Sitztiefenverstellung, die Sitzwinkelverstellung, die Fußstützenwinkelverstellung und die Fußstützenverstellung – kann dieser Kinderwagen die empfohlenen Höchstmaße überschreiten.
- **AUFMERKSAMKEIT!** Wenn Sie durch Türen oder ähnliche Einschränkungen gehen, die die Fahrtrichtung des Kinderwagens einschränken, achten Sie darauf, dass auf beiden Seiten des Kinderwagens genügend Platz vorhanden ist, um zu verhindern, dass Hände oder andere Körperteile eingeklemmt werden, u.a. um Schäden am Kinderwagen zu vermeiden.
- **AUFMERKSAMKEIT!** Die Temperatur des Kinderwagens kann ansteigen, wenn der Kinderwagen Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- **AUFMERKSAMKEIT!** Es ist untersagt, mit einem Kinderwagen Treppen hinauf- oder hinabzugehen – unabhängig davon, ob sich ein Kind darin befindet oder nicht.

WARNUNG!



- Lassen Sie den Benutzer niemals unbeaufsichtigt in einem Kinderwagen, da dies gefährlich ist!
- Dieses Produkt ist nicht zum Laufen, Skaten oder Inlineskaten geeignet.
- Vorsicht vor Lücken und beweglichen Teilen – Gefahr des Verklemmens.
- Tragen Sie den Kinderwagen nicht mit dem Benutzer darin.
- Der Kinderwagen ist in einer Plastiktüte verpackt. Halten Sie es von Säuglingen und Kleinkindern fern.

- **AUFMERKSAMKEIT!** Es ist verboten, den Kinderwagen zu benutzen, wenn der technische Zustand des Kinderwagens oder eines einzelnen Bauteils beim Benutzer Zweifel aufkommen lässt oder eindeutig anormal ist, und er darf nicht verwendet werden. In einer solchen Situation wird empfohlen, sich dringend mit dem Verkäufer in Verbindung zu setzen, um sich beraten zu lassen.

5. ALLGEMEINE KONSTRUKTION DES KINDERWAGENS

Grundausstattung



1- Vordach mit Fenster
2- STABILO Kopfstützen-Kissen
3- Korsett-Rückenlehne STABILO
4- Warnweste
5- Sicherheitsbarriere
6- Abduktions- und Stabilisierungsgurte
7- Sitz mit Zwickel und Seitenpolstern zur Stabilisierung des gesamten Beckens STABILO
8- Verstellbare Fußstütze mit Gurten
9- Kopfstützen-Polster
10- Getränkehalter
11- Klappmechanismus des Rahmens
12- Transportsicherung
13- Sitztiefenverstellung
14- Richtungssperre der Vorderräder
15- Vordere Schwenkräder
16- Thoracillolumbale Polster
17- Höhenverstellung der Rückenlehne
18- Hüftpolster
19- Winkelverstellung für die gesamte Fußstütze
20- Längenverstellung der Fußstütze
21- Zentrale Bremse
22- Hinterräder
23- Schiebegriff für den Kinderwagen
24- Winkelverstellmechanismus des Schiebegriffs
25- Schloss des Rahmen-Klappmechanismus
26- Einstellung des Rückenlehnenwinkels
27- Mechanismus zur Einstellung des Rückenlehnenwinkels
28- Sitzwinkelverstellung
29- Amortisationssystem für Hinterräder
30- Kippfuß
31- Schnellspannmechanismus am Hinterrad

Zubehör



1- Sonnenschirm
2- Therapeutische Liege
3- Schlafsack für die Beine
4- Moskitonetz
5- Regenhülle
6- Winterhandschuhe
7- Rucksack
8- Einkaufskorb

6. FUNKTIONEN DES KINDERWAGENS

6.1. Aufklappen des Kinderwagengestells

1



Transportsicherung nach unten ziehen

2



3



4



Der Montagemechanismus der Rückenlehne befindet sich an der Rückseite des Sitzes.

5



Schieben Sie die Rückenlehne ein Entriegelter


6



Mechanismus, der auf der Höhe der Löcher auf beiden Seiten eingestellt ist

7



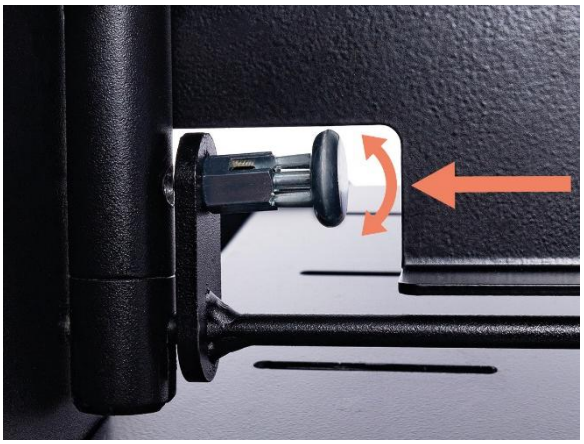

Schieben Sie die Stifte auf beiden Seiten in die Löcher

8





Verriegeln Sie den Befestigungsmechanismus der Rückenlehne

9



10




Ziehen Sie den Griff nach oben und stellen Sie den Rückenlehnenwinkel ein

6.2. **Zusammenklappen des Kinderwagengestells**

1



2

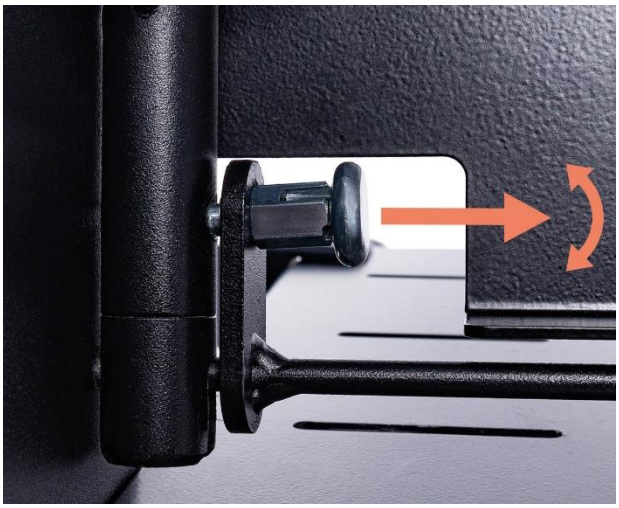


Entriegeln Sie den Befestigungsmechanismus für die Rückenlehne

3



4

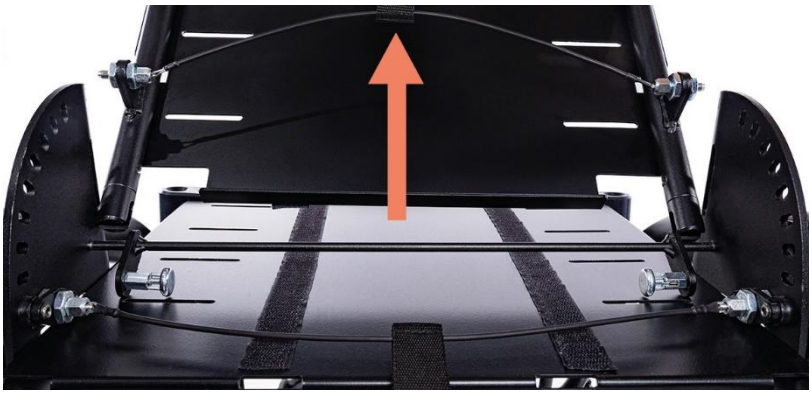

Mechanismus absenken Entfernen Sie die Rückenlehne

5



Drücken Sie den roten Knopf

6



Ziehen Sie gleichzeitig die Griffe an beiden Seiten des Rahmens nach oben



7



8

Transportsicherung anbringen

6.3. Transportsicherung. Auf- und Absetzen der Transportsicherung



Sperre angewendet



Sperre entfernt

6.4. Schwenkbare Räder vorne. Richtungssperre der Vorderräder

Blockieren der Vorderräder







Entriegelung der Vorderräder







6.5. Hinterräder. Montage und Demontage der Hinterräder an der Achse

Montage der Räder

1



2




In der Aussparung eindrücken

3



Ausbau der Räder

1

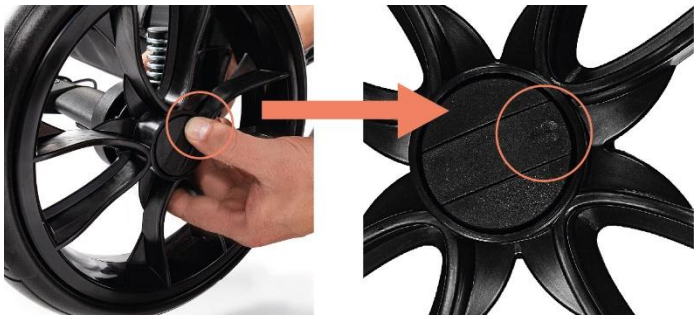

2



6.6. Amortisationssystem für Hinterräder



Harte Federung



Weiche Federung

6.7. Drücken Griff für den Kinderwagen

Winkelverstellmechanismus des Schiebegriffs



Drücken Sie die Tasten auf beiden Seiten und ändern Sie den Winkel des Schiebegriffs.

Winkelverstellung des Schiebegriffs





6.8. Zentrale Bremse





Die Zentralbremse dient nur dazu, die Räder komplett zu blockieren – eine dynamische Bremsfunktion gibt es nicht.

BEMERKUNG! Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Bremse und entfernen Sie Schmutz und Schlamm.

6.9. Kippfuß



Die Verwendung eines Kippfußes erleichtert das Hochfahren des Kinderwagens über kleine Schwellen oder Bordsteine.

6.10. Mechanismus zur Befestigung der Rückenlehne am Kinderwagengestell

Montieren Sie die Rückenlehne am Rahmen

1



Der Montagemechanismus der Rückenlehne befindet sich an der Rückseite des Sitzes.

2



Schieben Sie die Rückenlehne ein

3




Entriegelter Mechanismus, der auf der Höhe der Löcher eingestellt ist auf beiden Seiten

4



Schieben Sie die Stifte auf beiden Seiten in die Löcher

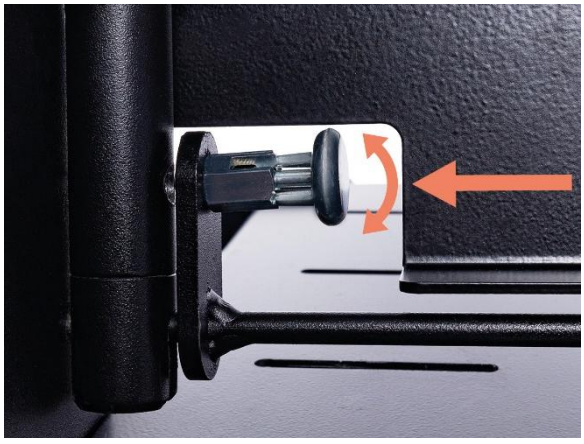



5



Verriegeln Sie den Befestigungsmechanismus der Rückenlehne




6

Ziehen Sie den Griff nach oben und stellen Sie den Rückenlehnenwinkel ein

Entfernen der Rückenlehne vom Gestell



1

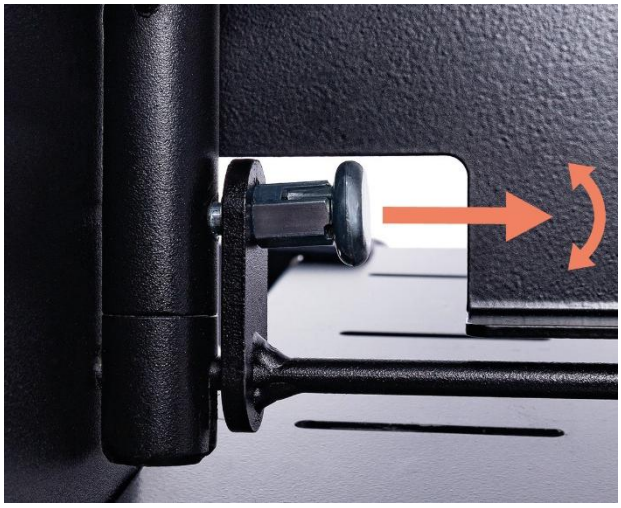

2


Entriegeln Sie den Befestigungsmechanismus für die Rückenlehne

3



Mechanismus absenken

4

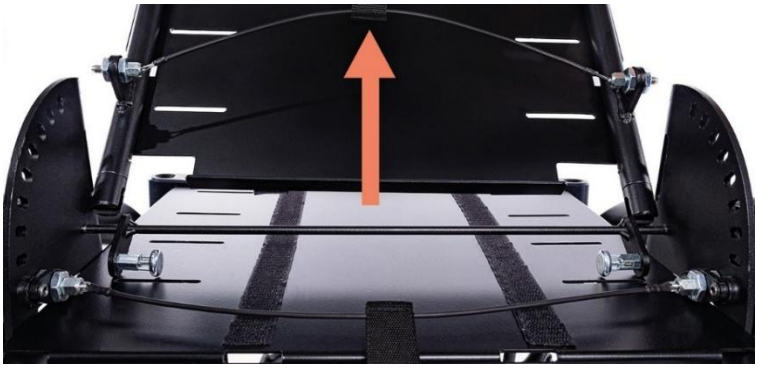

Entfernen Sie die Rückenlehne

6.11. Sitztiefenverstellung



Minimale Sitztiefe



Maximale Sitztiefe

Ziehen Sie den Sitz in Ihre Richtung oder schieben Sie ihn hinein.




BEMERKUNG! Um die Sitztiefe einzustellen, verwenden Sie einen Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten).

6.12. Rahmenverstellung zur Veränderung des Sitzwinkels

Mechanismus zur Einstellung des Sitzwinkels



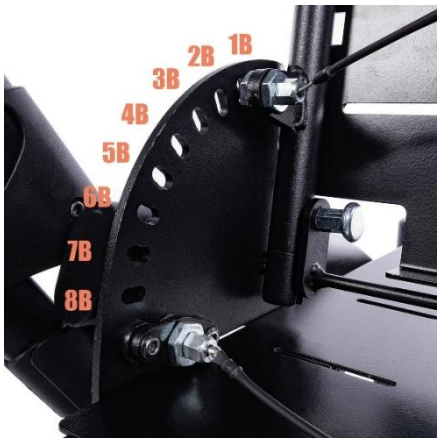

Stellen Sie sicher, dass die Stifte auf beiden Seiten des Kinderwagens eingerastet sind.

Sitzwinkelverstellung





6.13. Höhenverstellung der Rückenlehne



Minimale Einstellung
Höhe der Rückenlehne



Maximale Einstellung
Höhe der Rückenlehne



Schaltfläche mit der Angabe der höchsten
Höhe der Rückenlehne




BEMERKUNG! Um die Höhe der Rückenlehne einzustellen, verwenden Sie einen Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten).

6.14. Rahmenverstellung des Neigungswinkels der Rückenlehne

Mechanismus zur Einstellung des Rückenlehnenwinkels



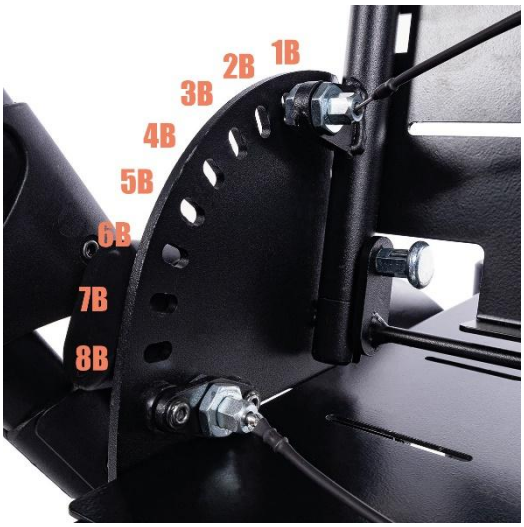

Stellen Sie sicher, dass die Stifte auf beiden Seiten des Kinderwagens eingerastet sind.

Einstellung des Rückenlehnenwinkels





Bemerkung! Jedes Mal, wenn Sie den Winkel der Rückenlehne ändern, müssen Sie die Weste neu einstellen.

6.15. Fußstütze

Höhenverstellung der Fußstütze



Minimale Höhe



Maximale Höhe

Einstellung des Fußrastenwinkels





Drücken Sie die Tasten auf beiden Seiten und ändern Sie den Winkel der Fußstütze.



Bemerkung! Während des Transports, der Lagerung, der Rehabilitation, des Ein- und Aussteigens aus dem Kinderwagen muss die Fußrastenplatte eingeklappt werden.

6.16. Warnweste



Bemerkung! Wenn Sie die Rückenlehne abnehmen, lösen Sie die Weste.

Denken Sie daran, die Weste bei der Montage der Rückenlehne zu befestigen.

Montage der Weste am Kinderwagen



Bemerkung! Jedes Mal, wenn Sie den Neigungswinkel der Rückenlehne ändern, müssen Sie die Weste neu einstellen.

Montageort der Weste an der Rückenlehne



Montage der Weste am Rahmen




Ziehe die Träger durch die Löcher und binde sie durch die Schnalle am Gürtel.

6.17. Verstellbares Kopfstützenpolster



Höhenverstellung des Polsters



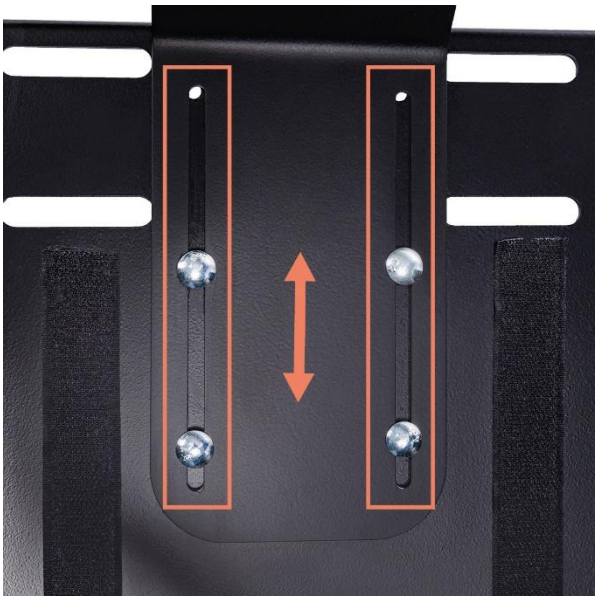

6.18. Verstellbare thorakolumbale Polster



Breitenverstellung der Rückenlehne





6.19. Verstellbare Hüftpolster




Sitzbreitenverstellung





Sitztiefenverstellung



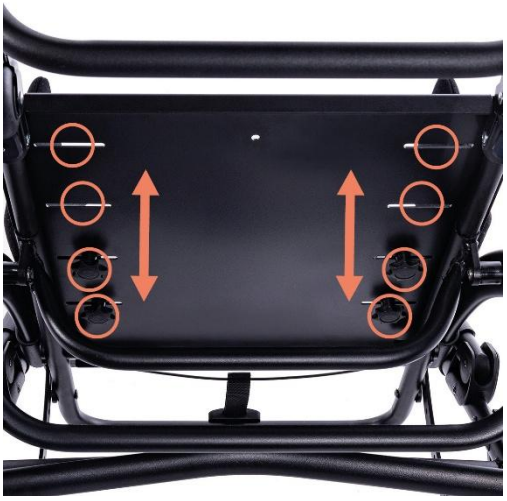

6.20. Abduktions- und Stabilisierungsgurte





Befestigen der Gurte am Sitz





Befestigen der Gurte am Kinderwagengestell

6.21. Sicherheitsbarriere





Drücken Sie den Knopf auf beiden Seiten und schieben Sie die Schranke hinein oder heraus.

6.22. Verstellbares Vordach mit Fenster

Mechanismus zur Montage des Verdecks am Kinderwagengestell



Schieben Sie die Halterung am Verdeck in die Halterung am Kinderwagengestell.

Abnehmbar mit dem roten Knopf in der Kabinenhaubenhalterung auf beiden Seiten.

Ändern der Größe des Blätterdachbereichs





Fenster mit Moskitonetz



6.23. Getränkehalter



6.24. Sitz mit Zwickel und Seitenpolstern zur Stabilisierung des gesamten Beckens STABILO





Formen des Sitzes mit einer Handpumpe









Formen Sie den Sitz und saugen Sie die Luft mit der Pumpe ab, bis die gewünschte Festigkeit erreicht ist.

Um die Form zu ändern, schrauben Sie den Schlauch selbst in das Ventil und warten Sie, bis der Sitz weich geworden ist.

BEMERKUNG! Temperaturänderungen beeinflussen die Härte des Sitzes (Temperaturanstieg – das Kissen wird weich, Temperaturabfall – das Kissen härtet aus).

BEMERKUNG! Es ist natürlich, die Dicke des Kissens in der ersten Nutzungszeit um 5% zu reduzieren.

6.25. Korsett-Rückenlehne STABILO





Formen der Rückenlehne mit einer Handpumpe









Formen Sie eine Rückenlehne und pumpen Sie die Luft ab, bis die gewünschte Härte erreicht ist.

Um die Form zu ändern, schrauben Sie den Schlauch selbst in das Ventil und warten Sie, bis die Rückenlehne weich geworden ist.

BEMERKUNG! Temperaturänderungen beeinflussen die Härte der Rückenlehne (Temperaturanstieg – das Kissen wird weich, Temperaturabfall – das Kissen härtet aus).

BEMERKUNG! Es ist natürlich, die Dicke des Kissens in der ersten Nutzungszeit um 5% zu reduzieren.

6.26. STABILO Kopfstützen-Kissen





Formen der Kopfstütze mit einer Handpumpe







Formen Sie eine Kopfstütze und pumpen Sie die Luft aus, bis die gewünschte Härte erreicht ist.

Um die Form zu ändern, schrauben Sie den Schlauch selbst in das Ventil und warten Sie, bis die Rückenlehne weich geworden ist.

BEMERKUNG! Die Temperaturänderung wirkt sich auf die Härte der Kopfstütze aus (Temperaturanstieg – das Kissen wird weich, Temperaturabfall – das Kissen härtet aus).

BEMERKUNG! Es ist natürlich, die Dicke des Kissens in der ersten Nutzungszeit um 5% zu reduzieren.

6.27. STABILO Stabilisierungsgurt





7. ZUBEHÖR

7.1. Verstellbare therapeutische Liege (anstelle einer Sicherheitsbarriere)





Die maximale Belastung beträgt 3 kg.

7.2. Rucksack





Die maximale Belastung des Rucksacks beträgt 2kg.

7.3. Einkaufskorb





Die maximale Belastung des Einkaufskorbs beträgt 3kg.

7.4. Winterhandschuhe





7.5. Regenschutz (auf ein verstellbares Verdeck mit Fenster aufsetzen)



7.6. Schlafsack für die Beine (auf die Sicherheitsbarriere legen)



7.7. **Moskitonetz (befestigt an einem verstellbaren Baldachin mit Fenster)**



7.8. **Sonnenschirm**





8. TECHNISCHE DATEN DES ALFA flex KINDERWAGENS

Länge des Kinderwagens	ca. 100-145 cm
Breite des Kinderwagens	66 cm
Höhe des Kinderwagens	94-147 cm
Gesamtgewicht	26 kg
effektive Sitztiefe	30-37 cm*
Sitzbreite	ca. 20-33 cm*
Höhe der Rückenlehne	63-72 cm*
Breite der Rückenlehne	ca. 20-33 cm*
Abstand zwischen Fußstütze und Sitz / Anzahl der Verstellungen	33-43 cm/ 6 Stück
Länge des Kinderwagens für den Transport zusammengeklappt	ca. 107 cm
Breite des Kinderwagens für den Transport zusammengeklappt	66 cm
Höhe des Kinderwagens für den Transport zusammengeklappt	57 cm**
Fassungsvermögen des Einkaufskorbs	3 kg
Tragfähigkeit eines BackPKK	2 kg
maximales Gewicht des Benutzers	55 kg
Maximale Körpergröße des Benutzers	ca. 100-150 cm
Winkel der Sitzfläche / Anzahl der Einstellungen	ca. 0°-34° / 6 Positionen
Neigungswinkel der Rückenlehne / Anzahl der Einstellungen	ca. -8,5°-62° / 8 Positionen
Winkel der Fußstütze / Anzahl der Einstellungen	ca. 73°-195° / 8 Positionen

HINWEISE: *) Werte mit den STABILO Kissen, **) Wert mit Polstern

Messtoleranz +/- 20mm, +/- 1,5kg, +/- 1°

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Parametern vorzunehmen.

8.1. Materialzusammensetzung des Kinderwagens

Materialzusammensetzung des Kinderwagens: pulverbeschichteter Stahl und Aluminium, 100% Polyestergewebe und Kunststoff (PP, PE).

9. LIEFERUNG UND WERKZEUGE

Die Originalverpackung sollte folgende Punkte enthalten:

- Zusammengeklapptes Kinderwagengestell und Rückenlehne, Fußstütze, Räder, Verdeck, Polster, Getränkehalter, Sicherheitsbarriere, STABILO-Kissen,
- Anweisungen zur Verwendung mit Garantiekarte,
- Zusätzliche Ausrüstung nach Bestellung,
- 4mm Inbusschlüssel,

Vor dem Gebrauch:

a. Stellen Sie sicher, dass die Verpackung nicht beschädigt wurde. Wenn festgestellt wird, dass das Paket beschädigt ist, packen Sie die Ware in Anwesenheit des Kuriers aus und prüfen Sie, ob keines der Kinderwagenelemente beschädigt wurde.
b. Überprüfen Sie auf der Grundlage der Spezifikation den Inhalt der Verpackung (falls Elemente fehlen, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer).

Für den Auf- und Abbau des ALFA flex Kinderwagens ist kein Werkzeug erforderlich.
Um die Höhe der Rückenlehne und die Tiefe des Sitzes einzustellen, verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen 4-mm-Inbusschlüssel.

10. AUF- UND ABBAU DES KINDERWAGENS

Das im Originalkarton vorverpackte Produkt ist bereits vormontiert.

- Schließen Sie die Installation ab, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

➢ Klappen Sie das Gestell des Kinderwagens auf und montieren Sie die Rückenlehne, indem Sie die folgenden Parameter einstellen:
➢ Aktivieren/Deaktivieren der Richtungssperre des Vorderrads,
➢ Passen Sie die Höhe und den Winkel des Griffs an, um den Kinderwagen zu schieben,
➢ Stellen Sie den Winkel der Rückenlehne ein,
➢ Stellen Sie die Sitztiefe ein.
➢ die Länge der Warnweste anpassen,
➢ Stellen Sie die Fußstütze auf die gewünschte Höhe ein,
➢ Installieren Sie eine Sicherheitsbarriere,
➢ Installieren Sie ein Vordach mit Fenster,
➢ Einstellen der Abduktions- und Stabilisierungsgurte,
➢ Installieren und Einstellen: Kopfstützenpolster, Thorakolumbolenpolster, Hüftpolster,
➢ Einbau und Form: STABILO Kopfstützenkissen, STABILO Korsett-Rückenlehne, Sitz mit Keil STABILO,
➢ Installieren Sie das passende Zubehör:
    - Rucksack
    - Einkaufskorb
    - Schlafsack für die Beine,
    - Moskitonetz
    - Regenschutz,
    - Sonnenschirm,
    - Winterhandschuhe.

- So zerlegen Sie den Kinderwagen:

a) zusätzliche Ausrüstung zu entfernen,
b) Entfernen Sie die Rückenlehne vom Kinderwagengestell (siehe Abschnitt 6.10),
c) Entfernen Sie die Hinterräder vom Kinderwagenrahmen,
d) Falten Sie das Gestell des Kinderwagens zusammen.

11. VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

- Bevor Sie mit der Benutzung des Kinderwagens beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Schuhwerk des Benutzers bequem ist und das Sprunggelenk gut stabilisiert.

- Bevor Sie mit der Verwendung des Kinderwagens beginnen, stellen Sie sicher, dass der Benutzer an den Stellen, an denen er mit der Polsterung des Kinderwagens in Berührung kommt, nicht ohne Kleidung in den Kinderwagen gesetzt wird, die den Körper bedeckt. Dies dient der Vermeidung von Abschürfungen am Körper des Benutzers und aus hygienischen Gründen.
- Bei Anwendern mit Harninkontinenzproblemen sollte ein spezielles Wachstuch auf den Sitz des Kinderwagens gelegt werden, das in Apotheken oder Sanitätshäusern erworben werden kann.
- Bei der Verwendung von zusätzlichen Hilfsmitteln wie Kanülen, Drainagen, Beuteln, Kathetern usw. ist darauf zu achten, dass diese gut gegen Herausfallen, Herausziehen, Einklemmen geschützt sind und die Nutzung des Kinderwagens nicht beeinträchtigen.

Um den Kinderwagen richtig zu benutzen, müssen alle folgenden Schritte durchgeführt werden:

- Stellen Sie den Kinderwagen auf eine ebene und sichere Fläche.
- Klappen Sie den Kinderwagen richtig auf (siehe Abschnitt 6.1).
- Die Zentralbremse betätigen.
- Nehmen Sie alle Einstellungen am Kinderwagen vor (siehe Abschnitt 6. Kinderwagen-Funktionen):

a) die Richtungssperre des Vorderrads aktivieren/deaktivieren,
b) Stellen Sie die Höhe des Schiebegriffs des Kinderwagens ein,
c) die Sitztiefe einstellen,
d) die nutzbare Breite des Sitzes einzustellen,
e) den Neigungswinkel des Sitzes einstellen,
f) die Höhe der Rückenlehne einstellen,
g) den Neigungswinkel der Rückenlehne einstellen,
h) die Länge der Warnweste anpassen,
i) die Höhe der Fußstütze einstellen,
j) den Neigungswinkel der Fußstütze einstellen,
k) Stellen Sie das Kopfstützenpolster ein,
l) Passen Sie die thorakolumbalen Polster an,
m) die Hüftpolster einstellen,
n) bilden das STABILO Kopfstützenkissen,
o) die Rückenlehne des Korsetts STABILO bilden,
p) den Sitz mit dem Keil STABILO bilden,
r) die Abduktions- und Stabilisierungsgurte einstellen,
s) Passen Sie das Vordach mit dem Fenster an,

- Entfernen Sie die Sicherheitsbarriere und die therapeutische Liege, wenn diese Geräte verfügbar und am Kinderwagen montiert sind.
- Bereiten Sie eine Sicherheitsweste, Gurte an der Fußstütze und Abduktions- und Stabilisierungsgurte zum Anlegen vor.
- Setzen Sie den Benutzer in den Kinderwagen und stellen Sie sicher, dass alle zuvor vorgenommenen Einstellungen für den Benutzer geeignet und sicher sind.
- Ziehen Sie dem Benutzer eine Sicherheitsweste an und schnallen Sie die Fußstütze an.
- Ziehen Sie dem Benutzer andere notwendige Ausrüstungsgegenstände für den Kinderwagen an, falls vorhanden.

12. BEWEGEN DES KINDERWAGENS

Die beste Art, einen Kinderwagen zu bewegen, besteht darin, ihn mit seinen Rädern zu fahren.

In Fällen, in denen dies nicht möglich ist (z. B. um den Kinderwagen in einem Auto zu transportieren), kann der Kinderwagen aus Sicherheitsgründen angehoben und mit beiden Händen getragen werden, nachdem das Zubehör zerlegt wurde, um das zu tragende Gewicht zu reduzieren und ihn zusammenzuklappen.
Beim Bewegen oder Anheben des Kinderwagengestells ist äußerste Vorsicht geboten. Der Rahmen muss nach dem Zusammenklappen und Anbringen der Transportsicherung bewegt werden.
Verwenden Sie keine zusätzliche Ausrüstung, um den Kinderwagen zu transportieren – diese kann ihn beschädigen.

13. EIN- UND AUSSTEIGEN AUS DEM KINDERWAGEN

Stellen Sie den Kinderwagen beim Ein- und Aussteigen so nah wie möglich an einen stabilen und sicheren Ort, an den sich der Benutzer begibt. Nachdem er sich vergewissert hat, dass die Zentralbremse aktiv ist und die Fußplatte angehoben ist, um nicht darauf zu stehen, kann der Benutzer seine Position ändern.
Stellen Sie sich nicht auf die Fußrastenplatte, da die Gefahr besteht, dass der Kinderwagen umkippt, der Benutzer verletzt wird und das Produkt beschädigt wird.
Achten Sie darauf, dass beim Ein- und Aussteigen der Benutzer und keine andere Person auf der Fußstütze steht, da dies diese beschädigen und den Benutzer verletzen kann!

14. RICHTIGE POSITION IM KINDERWAGEN

Aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen wird empfohlen, dass der Benutzer sein Becken und seinen Rücken so nah wie möglich an der Rückenlehne hat, um die Wirbelsäule gleichmäßig zu stützen (optimale Unterstützung für alle Teile der Wirbelsäule, damit kein Freiraum entsteht).
Die Oberschenkel sollten auf einer möglichst großen Fläche über ihre gesamte Länge abgestützt werden, was durch die Einstellung der Tiefe des Kinderwagensitzes erreicht wird, und die Füße sollten auf der Fußstützenplatte ruhen, die ein Verrutschen verhindert, eine optimale Spannung der Beinmuskulatur aufrechterhält und einen Teil des Gewichts von den höheren Körperteilen überträgt.



BEMERKUNG! Aufgrund der hohen Verstellbarkeit des Kinderwagens ist es möglich, während der Winkelverstellung des Sitzes und der Winkelverstellung der Rückenlehne eine solche Position einzustellen, in der sich der Kopf des Benutzers unter der Peloviklinie befindet. **Es ist verboten, eine solche Position einzunehmen**, da dies zu der Gefahr führen kann, dass der Benutzer schluckt oder erstickt.



Verbotenes Positionieren des Kinderwagens

15. VERWENDUNG DES KINDERWAGENS

Halten Sie bei der Verwendung des Kinderwagens immer den Griff fest, um den Kinderwagen zu schieben, um zu verhindern, dass der Kinderwagen träge rollt.
Lösen Sie die Zentralbremse, während Sie den Schiebegriff des Kinderwagens festhalten, und schieben Sie den Kinderwagen in eine sichere Richtung.

16. BEWEGEN AUF GENEIGTEN FLÄCHEN

Positionieren Sie den Kinderwagen immer nach vorne, wenn Sie Hügel oder Rampen erklimmen. Begrenzen Sie Ihre Geschwindigkeit auf geneigten Flächen und bewegen Sie sich so langsam wie möglich.
Die Person, die den Kinderwagen schiebt, muss über eine angemessene Kraft verfügen, um die Stabilität des Kinderwagens zu kontrollieren.
Denken Sie immer daran, dass sich die Position des Schwerpunkts des Kinderwagens ändert, wenn Sie unebenes oder abschüssiges Gelände durchqueren. Seien Sie in einem solchen Fall sehr vorsichtig und sichern Sie den Kinderwagen.
Achten Sie bei der Verwendung von Rampen darauf, dass die Rampe geeignet ist und die Räder des Kinderwagens hoch genug sind, um die Rampe zu überwinden, dass der Rahmen des Kinderwagens nicht mit der Rampe in Berührung kommt und dass eine zweite Person zur Unterstützung zur Verfügung steht, da die Gefahr besteht, dass der Kinderwagen umkippt. das Produkt zu beschädigen und den Benutzer zu verletzen.

17. ÜBERWINDUNG VON SCHWELLEN ODER BORDSTEINEN

Wenn Sie kleine Hindernisse (kleine Schwellen, kleine Bordsteine usw.) überwinden, drücken Sie den Kippfuß und den Schiebegriff des Kinderwagens mit dem Fuß nach unten und in Ihre Richtung, um die Vorderräder des Kinderwagens anzuheben und die Vorderräder vorsichtig auf das Hindernis zu treiben. Ziehen Sie dann langsam den Schiebegriff des Kinderwagens vom Boden nach oben, um die Hinterräder des Kinderwagens anzuheben und die Hinterräder vorsichtig auf das Hindernis zu fahren.

18.TRANSPORT IM AUTO UND IN ANDEREN FAHRZEUGEN

- Entfernen Sie alle Zubehörteile aus dem Kinderwagen und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Falten Sie den Kinderwagen zusammen und legen Sie ihn in den Kofferraum.
Befindet sich der zerlegte Kinderwagen nicht getrennt vom Fahrgastraum im Kofferraum des Fahrzeugs, muss das Kinderwagengestell sorgfältig am Fahrzeug befestigt werden. Zu diesem Zweck können Sie unbenutzte Sicherheitsgurte verwenden.

- Um einen Kinderwagen in anderen Fahrzeugen wie Zügen, Straßenbahnen, Bussen, Flugzeugen, Schiffen usw. zu transportieren, ist es notwendig, die für den Transport in diesen Verkehrsmitteln verantwortlichen Personen nach den Bedingungen für eine sichere Reise mit einem Kinderwagen und den entsprechenden Anforderungen zu fragen.



Der ALFA flex Kinderwagen sollte nicht als Sitz für den Transport eines Benutzers in einem Fahrzeug verwendet werden.

19. REINIGUNG UND PFLEGE

STABILO Kissen können in der Waschmaschine bei einer Temperatur von bis zu 40°C gewaschen werden. Es ist nicht erforderlich, Waschpulver zu verwenden, sondern nur einen Weichspüler. Kein Schleudern.
Der Einkaufskorb sollte von Hand gewaschen werden (der Fleck auf dem Korb sollte mit einem feuchten Tuch abgewischt werden).
Flecken sollten sofort entfernt werden, nachdem sie auf der Oberfläche des Kinderwagens erschienen sind.

BEMERKUNG! Nicht mit Chemikalien reinigen, die Lösungsmittel und Bleichmittel enthalten. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel verursacht werden.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor Gebrauch immer trocken ist.

Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden, die speziell für diese Art von Material bestimmt sind, befolgen Sie die Anweisungen des verwendeten Mittels.



Waschen bei 40°



Nicht bleichen



Nicht im Trockner trocknen



Nicht bügeln

20. AUFBEWAHRUNG IHRES KINDERWAGENS

Der saubere Kinderwagen sollte in einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Raum gelagert werden, vorzugsweise bei einer Temperatur von 0-35°C. Bei der Langzeitlagerung sollten zusätzlich die unter Punkt 21 "monatlich" beschriebenen Schritte durchgeführt werden.

21. SERVICE UND REGELMÄSSIGE INSPEKTIONEN

Für eine sichere und störungsfreie Nutzung des Kinderwagens ist es notwendig, ihn regelmäßig und gründlich den nachfolgend beschriebenen Inspektionen und Wartungen zu unterziehen.
In einer Situation, in der der Kinderwagenbenutzer nicht in der Lage ist, die oben genannten Tätigkeiten selbst auszuführen, sollte er den Kinderwagen an eine spezialisierte Kinderwagen-Servicestelle oder direkt an den Hersteller zurückgeben, der die Inspektion und die erforderlichen Wartungsarbeiten ordnungsgemäß durchführt. Für diese Aktivitäten kann eine zusätzliche Gebühr erhoben werden.
HINWEIS: Der Hersteller haftet für Defekte oder technische Schäden am Kinderwagen, die nur bei korrekter Bedienung des Kinderwagens verursacht werden. Die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb des Kinderwagens liegt nur dann beim Hersteller, wenn alle Empfehlungen des Herstellers strikt befolgt werden.

HINWEIS: Der Hersteller ist nur dann für die einwandfreie Funktion des Kinderwagens verantwortlich, wenn Originalteile und Originalzubehör darin verwendet werden.

Alle Reparaturen sollten in spezialisierten autorisierten Servicediensten (siehe Punkt 24) oder direkt beim Hersteller durchgeführt werden. Reparaturen am Kinderwagen, die von einer anderen Person als einem autorisierten Service oder dem Hersteller durchgeführt werden, führen zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die eine Folge von Reparaturen sein können, die von anderen Personen als dem autorisierten Service oder dem Hersteller durchgeführt wurden.

Der Service sollte wie folgt durchgeführt werden:

- **Jedes Mal vor der Benutzung des Kinderwagens**
  - Überprüfen Sie die Wirksamkeit der Zentralbremse - Nach dem Aktivieren der Zentralbremse sollten beide Hinterräder des Kinderwagens blockiert sein und können sich nicht drehen.
  - Überprüfen Sie die Befestigung der Strukturkomponenten - Überprüfen Sie alle Mechanismen des Kinderwagens und seiner beweglichen Teile und achten Sie insbesondere auf: korrekte Montage der Rückenlehne am Rahmen des Kinderwagens, ordnungsgemäße Montage der Räder, ordnungsgemäße Funktion der Fünfpunktgurte, korrekte Funktion des Sitzwinkelverstellmechanismus, korrekte Funktion des Rückenlehnen-Liegemechanismus und ordnungsgemäße Montage der Fußstütze.
  - Überprüfen Sie den Zustand der Reifen - Vergewissern Sie sich, dass die Reifen an allen vier Rädern nicht beschädigt oder abgenutzt sind.
  - Inspektion von massiven Rahmenteilen, Sitz mit Rückenlehne und Fußstützenrahmen - Sichtprüfung des Zustands der Strukturprofile. Diese Bauteile dürfen nicht beschädigt oder gerissen sein.
- **Alle einen Monat**
  - Reinigung des Kinderwagens

- Sichtprüfung aller beweglichen Elemente, Lager, Verstellmechanismen – mit Silikonfett schmieren.
- Alle Schraubverbindungen auf Lockerheit prüfen.

22.BESEITIGUNG

Entsorgung und Recycling: gemäß den im jeweiligen Land geltenden Vorschriften.

23.EINHALTUNG DER ANFORDERUNGEN AN MEDIZINPRODUKTE

Medizinprodukt der Klasse I, das der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte entspricht. Der Hersteller hat eine entsprechende Konformitätserklärung für das Produkt ausgestellt, die auf der Website www.mywam.eu

24.LISTE DER AUTORISIERTEN SERVICESTELLEN

POLEN
MyWam Sp. z o.o.
Wiosny Ludów 91, 40-373 Katowice, Polen
Telefon: +48 32 733 11 31
Webseite: www.mywam.eu
E-Mail-Adresse: mywam@mywam.eu

25. GARANTIEKARTE

Serie und Nummer: .....

Kaufdatum: ..... - ..... - .....

Stempel und Unterschrift des Verkäufers:

.....

.....

....

Garantiebedingungen

- Der Hersteller (Garant) gewährt dem Käufer eine Garantie auf den gekauften Kinderwagen für einen Zeitraum von 24 Monaten, gerechnet ab dem Kaufdatum.
- **Der Käufer, der sich über den Kinderwagen beschwert, sollte den Kinderwagen in einem sauberen Paket an den Verkäufer liefern (frei von Flecken, zusätzlicher Ausrüstung, die nicht zum Kinderwagen gehört, Feuchtigkeit, Haaren usw.) zusammen mit den Elementen des Kinderwagens, die vor Beschädigungen geschützt sind.**
- **Schäden, die durch unzureichenden Schutz des Kinderwagentransports und seiner Komponenten verursacht werden, unterliegen nicht der Garantiereparatur.**
- Der Beschwerdeführer (Käufer) kann im Falle einer Beschädigung der Sendung nicht verlangen, dass der Hersteller den Schaden behebt, wenn er die Sendung des Kinderwagens und seiner Komponenten falsch etikettiert oder falsch versichert.
- Die Gewährleistungsfrist im Falle der Annahme der Reklamation verlängert sich um die Zeit der Reparatur des Kinderwagens, die ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Kinderwagens an den Verkäufer im Rahmen der Garantie bis zu dem Tag, an dem der Kinderwagen zur Abholung bereit war, gezählt wird.
- Die in der Anleitung vorgesehenen Tätigkeiten, zu denen der Kinderwagenbenutzer verpflichtet ist, sie selbst und auf eigene Kosten durchzuführen, können nicht im Rahmen der Garantiereparatur durchgeführt werden.
- Wenn der Kinderwagen nicht in Übereinstimmung mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch, nicht in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung oder nicht mit den Grundsätzen des ordnungsgemäßen Betriebs verwendet wird, erlischt die Garantie.
- Bei baulichen Veränderungen am Lkw erlischt die Gewährleistung (im Bereich der Änderung oder in vollem Umfang).
- Schäden am Kinderwagen, die verursacht wurden durch: unsachgemäße Bedienung, unsachgemäße Wartung, unsachgemäße Lagerung des Kinderwagens, mechanische Beschädigungen und natürlicher Abrieb und Verschleiß von Teilen (z. B. Polster, Räder) fallen nicht unter die Garantie.
- Der Hersteller warnt vor Garantiereparaturen in nicht autorisierten Servicebetrieben. Wenn Sie eine solche Reparatur oder eine nicht autorisierte Modifikation des Kinderwagens feststellen, erlischt die Garantie.
- **Die Garantiekarte ist gültig, wenn sie Folgendes enthält: das Verkaufsdatum, das durch den Firmenstempel des Verkäufers bestätigt wird, die Unterschrift des Verkäufers, den Typ und die Seriennummer des LKWs.**
- Die Garantiekarte ist gültig, sofern sie keine Streichungen oder Korrekturen enthält.
- Der Hersteller des Kinderwagens führt in seinem Hauptsitz einen kostenpflichtigen Nachgarantieservice durch.
- Der Hersteller gibt die zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit 4 Jahren an. Eine weitere Verwendung nach diesem Zeitraum ist möglich, aber unter Berücksichtigung der Sicherheit und des Bedienkomforts empfehlen wir, dass der Hersteller oder ein autorisiertes Servicecenter eine technische Inspektion durchführt. Der Inspektionsservice ist kostenpflichtig und umfasst die Beurteilung des technischen Zustands des Gerätes, die Sicherheitsüberprüfung und alle erforderlichen Wartungsarbeiten.
- In Angelegenheiten, die nicht durch diese Garantiekarte abgedeckt sind, gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (Polen).
- Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Ansprüchen aus der Garantie oder Garantie des Kinderwagens sind an den Verkäufer zu richten.

26. NOTIZEN