MANUFAKTURER / MARKETING UND WERBUNG: MyWam Sp. z o.o.

CE

MyWam®



ILLUSTRATIVES FOTO

αlfα

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ausgabe 6 / 20.10.2026

Kinderwagen für besondere Bedürfnisse ALFA

DIES IST EIN MEDIZINISCHES GERÄT.

VERWENDEN SIE ES GEMÄSS DER GEBRAUCHSANWEISUNG ODER DEM ETIKETT.

ZWECK DER UNTERWEISUNG

Die Gebrauchsanweisung richtet sich an Personen, die sich direkt um Benutzer mit Behinderungen (Assistenten, Eltern, Erziehungsberechtigte) kümmern, die in einem Kinderwagen transportiert werden. Er ist auch für Ärzte und Physiotherapeuten gedacht, die den Kinderwagen bedienen.

AUFMERKSAMKEIT! Vor der Benutzung des Kinderwagens ist jeder Benutzer verpflichtet, die Gebrauchsanweisung zu lesen und gemäß den Richtlinien zu handeln.

AUFMERKSAMKEIT! Im Falle von medizinischen Zwischenfällen im Zusammenhang mit dem Vorhandensein des ALFA-Kinderwagens muss der Hersteller und die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie oder der Patient Ihren Wohnsitz haben, unverzüglich schriftlich per Einschreiben oder E-Mail mit Rückschein informiert werden.

Kontaktdaten des Herstellers:

- Postanschrift: MyWam Sp. z o.o., Plebiscytowa 3, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polen
- Kontakt-Telefonnummer: +48 32 733 11 31
- E-Mail-Adresse: mywam@mywam.eu

Gebrauchsanweisung Version: **DE, Ausgabe 6 / 2026-10-20**
Die Gebrauchsanweisung wurde mit dem Microsoft Translator übersetzt.

MyWam Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische und kommerzielle Änderungen am Inhalt der Gebrauchsanweisung vorzunehmen. Jede Änderung wird durch das Datum bestimmt, an dem die Anweisungen zuletzt aktualisiert wurden. Die elektronische Version der Gebrauchsanweisung ist unter www.mywam.eu

AUFMERKSAMKEIT! Die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Bilder dienen nur zur Referenz und können vom gekauften Modell abweichen.

MyWam Sp. z o.o. hat ein Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm ISO 13485 für die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Medizinprodukten der Klasse I eingeführt. System zertifiziert nach LL-C (Zertifizierung).

ISO 13485
LL-C (Certification)

INHALTSVERZEICHNIS

1. ZWECK UND ANWENDUNGSHINWEISE 5
2. PLATTEN 5
3. BEZEICHNUNG DER SYMBOLE 5
4. WICHTIGE HINWEISE UND SICHERHEITSREGELN 6
5. ALLGEMEINE KONSTRUKTION DES KINDERWAGENS 7
6. FUNKTIONEN DES KINDERWAGENS 9
6.1. Aufklappen des Kinderwagens 9
6.2. Falten des Rahmens des Kinderwagens 10
6.3. Transportsicherung. Auf- und Absetzen der Transportsicherung 11
6.4. Schwenkbare Räder vorne. Richtungssperre der Vorderräder 12
6.5. Hinterräder. Montage und Demontage von Hinterrädern an der Achse 12
6.6. Amortisationssystem für Hinterräder 13
6.7. Schiebegriff für den Kinderwagen 13
6.8. Zentrale Bremse 14
6.9. Kippfuß 14
6.10. Mechanismus zur Befestigung der Rückenlehne am Gestell des Kinderwagens 15
6.11. Sitztiefenverstellung 16
6.12. Rahmenverstellung zur Veränderung des Sitzwinkels 17
6.13. Höhenverstellung der Rückenlehne 18
6.14. Rahmenverstellung des Neigungswinkels der Rückenlehne 18
6.15. Fußstütze 19
6.16. Fünf-Punkt-Gurte 20
6.17. Kopfstütze 21
6.18. Verstellbare thorakolumbale Polster unterstützen 22
6.19. Verstellbare Hüftpolster 23
6.20. Seitenteile der Rückenlehne 23
6.21. Abduktions- und Stabilisierungsgurte 24
6.22. Sicherheitsbarriere 24
6.23. Verstellbares Vordach mit Fenster 25
6.24. Getränkehalter 25
7. ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG 26
7.1. Verstellbare Therapieliege (anstelle der Sicherheitsbarriere) 26
7.2. Rucksack 26
7.3. Einkaufskorb 26
7.4. Winterhandschuhe 27
7.5. Keil 27
7.6. Regenschutz (auf verstellbares Verdeck mit Fenster aufgesetzt) 27
7.7. Schlafsack für die Beine (auf der Sicherheitsbarriere getragen) 28
7.8. Moskitonetz (befestigt an verstellbarem Baldachin mit Fenster) 28
7.9. Sonnenschirm 28
8. TECHNISCHE DATEN DES ALFA KINDERWAGENS 29
8.1. Materialzusammensetzung des Kinderwagens 29

9. LIEFERUNG UND WERKZEUGE....29
10. AUF- UND ABBAU DES KINDERWAGENS....30
11. VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH....31
12. BEWEGEN DES KINDERWAGENS....32
13. EIN- UND AUSSTEIGEN IN EINEN KINDERWAGEN....32
14. RICHTIGE POSITION IM KINDERWAGEN....32
15. VERWENDUNG DES KINDERWAGENS....33
16. BEWEGEN AUF GENEIGTEN FLÄCHEN....33
17. ÜBERWINDUNG VON SCHWELLEN ODER BORDSTEINEN....33
18. TRANSPORT IM AUTO UND IN ANDEREN FAHRZEUGEN....34
19. REINIGUNG UND PFLEGE....34
20. AUFBEWAHRUNG DES KINDERWAGENS....34
21. SERVICE UND REGELMÄSSIGE INSPEKTIONEN....35
22. AUSNUTZUNG....35
23. EINHALTUNG DER ANFORDERUNGEN AN MEDIZINPRODUKTE....36
24. LISTE DER AUTORISIERTEN SERVICESTELLEN....37
25. GARANTIEKARTE....38
26. NOTIZEN....39

1. ZWECK UND ANWENDUNGSHINWEISE

Der behindertengerechte Kinderwagen ALFA ist ein Medizinprodukt der Klasse I, das für Menschen mit Behinderungen zugelassen ist, die aufgrund ihres Gesundheitszustands nicht selbstständig gehen, stehen oder sitzen können. Das Produkt ist für den Transport und die Bewegung der oben genannten Personen in sitzender oder liegender Position sowie für die Haltungskorrektur bestimmt und dies ist sein Verwendungszweck.

Klinische Indikationen sind Zerebralparese, Meningeushernie, Dystrophien, Paresen usw.


Das Produkt ist für Benutzer mit einer Körpergröße von 100-150 cm und einem Gewicht von bis zu 55 kg bestimmt. Das Produkt sollte gemäß den Empfehlungen des behandelnden Arztes oder Physiotherapeuten verwendet werden.

Kontraindikationen:


Im Falle einer Kontraindikation für die Sitzposition und/oder einer passiven aufrechten Haltung sollte die Einstellung des Kinderwagens mit einem Physiotherapeuten oder behandelnden Arzt besprochen werden.

2. PLATTEN

Typenschild

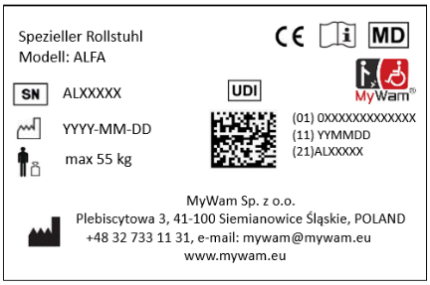

Warnschild

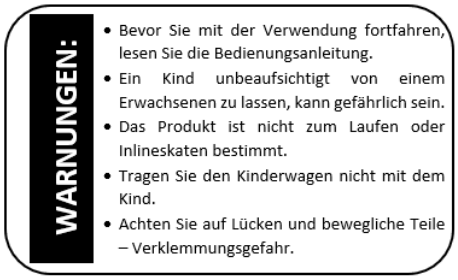

3. BEZEICHNUNG DER SYMBOLE

SN	Seriennummer des Produkts		Der Name des Herstellers
	Zulässiges Gesamtgewicht des Benutzers	MD	Bei dem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt
	Produktionsdatum		BESCHREIBUNG **"WARNUNG!"** und das Symbol in dieser Anleitung wird verwendet, um die Aufmerksamkeit des Lesers auf den mit diesem Zeichen gekennzeichneten Inhalt zu lenken. Die Nichtbeachtung von Inhalten, die mit dieser Beschreibung gekennzeichnet sind, kann die Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und der Begleitpersonen gefährden und auch das Produkt beschädigen.
CE	Konformitätsbewertungszeichen gemäß den geltenden europäischen Verordnungen und Richtlinien		
	Warnung vor dem Verfahren in Übereinstimmung mit dem Produkt Gebrauchsanweisung		

4. WICHTIGE HINWEISE UND SICHERHEITSREGELN

- Es ist verboten, den Kinderwagen in einer Weise zu verwenden, für die der Kinderwagen nicht bestimmt ist.
- Das Produkt enthält Kleinteile, die gefährlich sein können, wenn sie von einem Kind verschluckt werden!
- **Aufgrund der hohen Verstellbarkeit des Kinderwagens ist es möglich, während der Winkelverstellung des Sitzes und der Winkelverstellung der Rückenlehne eine solche Position einzustellen, in der sich der Kopf des Benutzers unterhalb der Peloviklinie befindet. Es ist verboten, eine solche Position einzunehmen, da dies zu der Gefahr führen kann, dass der Benutzer schluckt oder erstickt.**
- Es ist verboten, zusätzliches Gewicht auf den Kinderwagen zu legen, was insbesondere für das Aufbringen von zusätzlichem Gewicht auf die Rückseite der Rückenlehne, z.B. eines Rucksacks oder einer Tasche, gilt. Dies kann dazu führen, dass der Kinderwagen umkippt und der Benutzer verletzt wird! Gilt nicht für originales Zusatzzubehör für den ALFA-Kinderwagen, das die zulässige Belastung nicht überschreitet. Alle zusätzlichen Elemente, die am Kinderwagen befestigt sind, beeinflussen seine Stabilität.
- **AUFMERKSAMKEIT!** Einstellungen werden ohne Last (Benutzer) vorgenommen. Beim Gebrauch, Falten und Einstellen von Kinderwagenmechanismen kann die Gefahr bestehen, dass einige Teile des Körpers/der Betreuungsperson des Benutzers in Löchern/Lücken zwischen den Teilen eingeklemmt und/oder gequetscht werden.
- **AUFMERKSAMKEIT!** Abhängig von den vorgenommenen Einstellungen – gilt für die Einstellung des Schiebegriffs des Kinderwagens, die Höhenverstellung der Rückenlehne, die Einstellung des Rückenlehnenwinkels, die Sitztiefenverstellung, die Sitzwinkelverstellung, die Fußstützenwinkelverstellung und die Fußstützenverstellung – kann dieser Kinderwagen die empfohlenen Höchstmaße überschreiten.
- **AUFMERKSAMKEIT!** Wenn Sie durch Türen oder ähnliche Einschränkungen gehen, die die Fahrtrichtung des Kinderwagens einschränken, achten Sie darauf, dass auf beiden Seiten des Kinderwagens genügend Platz vorhanden ist, um zu verhindern, dass Hände oder andere Körperteile eingeklemmt werden, u.a. um Schäden am Kinderwagen zu vermeiden.
- **AUFMERKSAMKEIT!** Die Temperatur des Kinderwagens kann ansteigen, wenn der Kinderwagen Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- **AUFMERKSAMKEIT!** Es ist untersagt, mit einem Kinderwagen Treppen hinauf- oder hinabzugehen – unabhängig davon, ob sich ein Kind darin befindet oder nicht.

WARNUNG!



- Lassen Sie den Benutzer niemals unbeaufsichtigt in einem Kinderwagen, da dies gefährlich ist!
- Dieses Produkt ist nicht zum Laufen, Skaten oder Inlineskaten geeignet.
- Vorsicht vor Lücken und beweglichen Teilen – Gefahr des Verklemmens.
- Tragen Sie den Kinderwagen nicht mit dem Benutzer darin.
- Der Kinderwagen ist in einer Plastiktüte verpackt. Halten Sie es von Säuglingen und Kleinkindern fern.

- **AUFMERKSAMKEIT!** Es ist verboten, den Kinderwagen zu benutzen, wenn der technische Zustand des Kinderwagens oder eines einzelnen Bauteils beim Benutzer Zweifel aufkommen lässt oder eindeutig anormal ist, und er darf nicht verwendet werden. In einer solchen Situation wird empfohlen, sich dringend mit dem Verkäufer in Verbindung zu setzen, um sich beraten zu lassen.

5. ALLGEMEINE KONSTRUKTION DES KINDERWAGENS

Grundausstattung



1- Vordach mit Fenster
2- Verriegelung des Rahmenklappmechanismus
3- Getränkehalter
4- Sicherheitsbarriere
5- Winkelverstellmechanismus der gesamten Fußstütze
6- Längenverstellung der Fußstütze
7- Schnellspannmechanismus am Hinterrad
8- Richtungssperre der Vorderräder
9- Kopfstütze
10- Thorakolumbale Polster
11- Fünf-Punkt-Gurte
12- Hüftpolster
13- Abduktions- und Stabilisierungsgurte
14- Abnehmbare Rücken- und Sitzpolster
15- Verstellbare Fußstütze mit Gurten
16- Vordere Schwenkräder
17- Seitenteile der Rückenlehne
18- Höhenverstellung der Rückenlehne
19- Transportsicherung
20- Schiebegriff für den Kinderwagen
21- Winkelverstellmechanismus für den Schiebegriff
22- Einstellung des Rückenlehnenwinkels
23- Klappmechanismus des Rahmens
24- Mechanismus zur Einstellung des Rückenlehnenwinkels
25- Sitztiefenverstellung
26- Sitzwinkelverstellung
27- Amortisationssystem für Hinterräder
28- Kippfuß
29- Zentrale Bremse
30- Hinterräder

Anbaugerät



1- Sonnenschirm
2- Einkaufskorb
3- Schlafsack für die Beine
4- Regenhülle
5- Moskitonetz
6- Keil
7- Therapeutische Liege
8- Winterhandschuhe
9- Rucksack

6. FUNKTIONEN DES KINDERWAGENS

6.1. Aufklappen des Kinderwagens



1

Transportsicherung nach unten ziehen



2



3



4

Der Montagemechanismus der Rückenlehne befindet sich an der Rückseite des Sitzes.




5

Schieben Sie die Rückenlehne ein Stellen



6

Sie den entriegelten Mechanismus auf Höhe der Löcher auf beiden Seiten ein

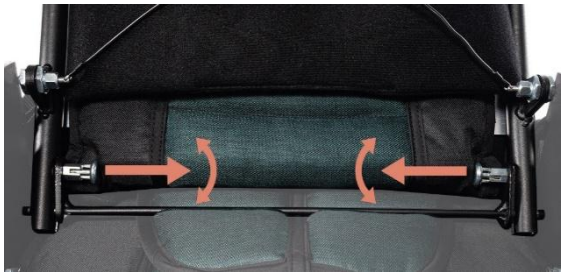

7

Schieben Sie die Stifte in die Löcher auf beiden Seiten



8

Verriegeln Sie den Befestigungsmechanismus der Rückenlehne



9

Ziehen Sie den Griff nach oben und stellen Sie den Rückenlehnenwinkel ein



10

6.2. **Falten des Rahmens des Kinderwagens**



1




2

Entriegeln Sie den Befestigungsmechanismus für die Rückenlehne



3

Mechanismus absenken

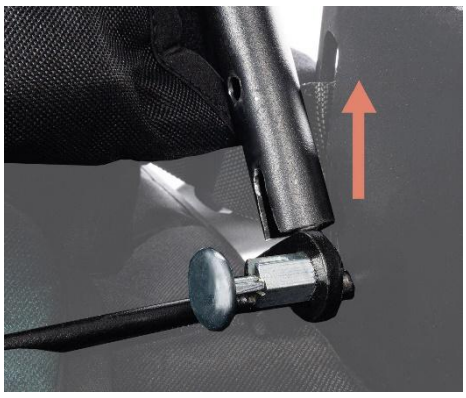

4

Entfernen Sie die Rückenlehne



5

Drücken Sie den roten



6

Knopf Ziehen Sie gleichzeitig die Griffe an beiden Seiten des Rahmens nach oben



7



8

Transportsicherung anbringen

6.3. **Transportsicherung. Auf- und Absetzen der Transportsicherung**



Sperre angewendet



Sperre entfernt

6.4. Schwenkbare Räder vorne. Richtungssperre der Vorderräder

Blockieren der Vorderräder





Entriegelung der Vorderräder





6.5. Hinterräder. Montage und Demontage von Hinterrädern an der Achse

Montage der Räder

1



2



3



Ausbau der Räder

1



2



6.6. Amortisationssystem für Hinterräder



Harte Federung



Weiche Federung

6.7. Schiebegriff für den Kinderwagen

Winkelverstellmechanismus für den Schiebegriff



Drücken Sie die Tasten auf beiden Seiten und ändern Sie den Winkel des Schiebegriffs.

Winkelverstellung des Schiebegriffs





6.8. **Zentrale Bremse**



Die Zentralbremse wird nur für die Vollsperre der Räder verwendet – eine dynamische Bremsfunktion gibt es nicht.

ANMERKUNG! Der Zustand der Bremse sollte regelmäßig überprüft und von Schmutz und Schlamm befreit werden.

6.9. **Kippfuß**



Die Verwendung eines Kippfußes erleichtert das Hochfahren des Kinderwagens über kleine Schwellen oder Bordsteine.

6.10. Mechanismus zur Befestigung der Rückenlehne am Gestell des Kinderwagens

Montieren Sie die Rückenlehne am Rahmen

1



Der Montagemechanismus der Rückenlehne befindet sich an der Rückseite des Sitzes.

2




Schieben Sie die Rückenlehne ein

3



Stellen Sie den entriegelten Mechanismus auf die Höhe der Löcher ein

4

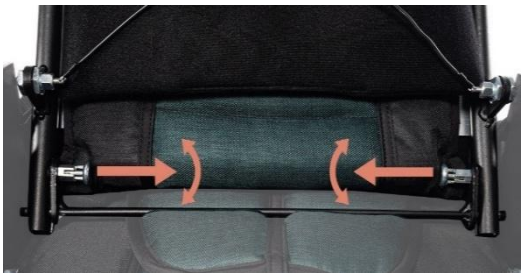

Stecken Sie die Stifte in die Löcher auf beiden Seiten beidseitig

5



Verriegeln Sie den Befestigungsmechanismus für die Rückenlehne

6



Ziehen Sie den Griff nach oben und stellen Sie den Rückenlehnenwinkel ein

Entfernen der Rückenlehne vom Gestell

1



2




Entriegeln Sie den Befestigungsmechanismus für die Rückenlehne

3



Mechanismus absenken

4

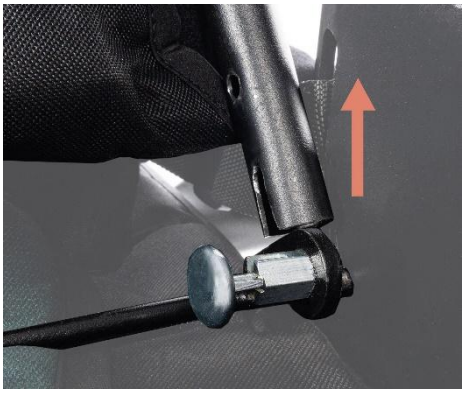

Entfernen Sie die Rückenlehne

6.11. Sitztiefenverstellung



Minimale Sitztiefe



Maximale Sitztiefe


Ziehen Sie den Sitz in Ihre Richtung oder schieben Sie ihn hinein.



AUFMERKSAMKEIT! Um die Sitztiefe einzustellen, verwenden Sie einen Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten).

6.12. Rahmenverstellung zur Veränderung des Sitzwinkels

Mechanismus zur Einstellung des Sitzwinkels

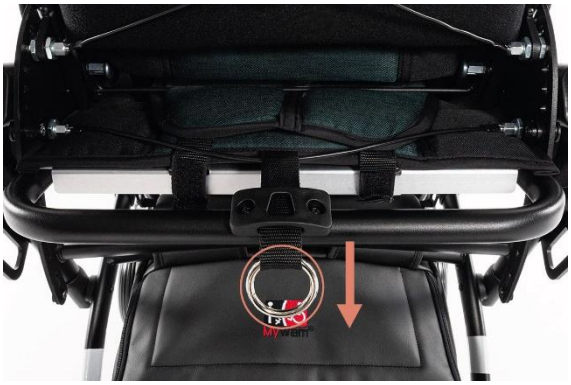



Stellen Sie sicher, dass die Stifte auf beiden Seiten des Kinderwagens eingerastet sind.

Sitzwinkelverstellung





6.13. Höhenverstellung der Rückenlehne



Minimale Einstellhöhen der Rückenlehne



Maximale Einstellhöhen der Rückenlehne



Schaltfläche zum Anpassen der Höhen der Rückenlehne



AUFMERKSAMKEIT! Um die Höhe der Rückenlehne zu verstellen, verwenden Sie einen Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten).

6.14. Rahmenverstellung des Neigungswinkels der Rückenlehne

Mechanismus zur Einstellung des Rückenlehnenwinkels





Aufmerksamkeit! Jedes Mal, wenn Sie den Winkel der Rückenlehne ändern, müssen Sie die Länge der Fünfpunktgurte neu einstellen.

Einstellung des Rückenlehnenwinkels





6.15. Fußstütze

Höhenverstellung der Fußstütze



Minimale Höhe



Maximale Höhe

Einstellung des Fußrastenwinkels





Drücken Sie die Tasten auf beiden Seiten und ändern Sie den Winkel der Fußstütze.



Aufmerksamkeit! Beim Transport, Lagern, Rehabilitieren, Ein- und Aussteigen aus dem Kinderwagen muss die Fußrastenplatte eingeklappt werden.

6.16. Fünf-Punkt-Gurte






Aufmerksamkeit! Beim Entfernen der Rückenlehne die Gurte an der markierten Stelle lösen.

Denken Sie daran, die Gurte bei der Montage der Rückenlehne zu befestigen.

Aufmerksamkeit! Jedes Mal, wenn Sie den Winkel der Rückenlehne ändern, müssen Sie die Länge der Fünfpunktgurte neu einstellen.

Montage der Gurte am Kinderwagen



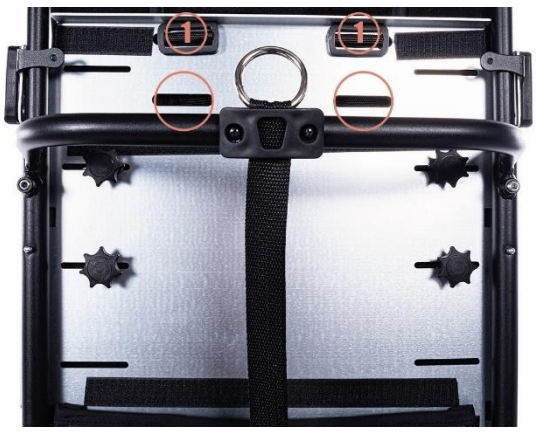

Ziehen Sie die Schnalle durch die Löcher in der Rückenlehne.

Anlegestelle der Sicherheitsgurte auf der Rückseite der Rückenlehne



Ziehen Sie die Gurte durch die Löcher und fädeln Sie sie durch die Schnalle am Gürtel.





Schraube zum Montieren von Sicherheitsgurten, wenn der Keil nicht montiert ist.

Die Stelle, an der die Gurte mit dem Sitz verbunden werden (wo der Keil montiert wird)

6.17. **Kopfstütze**





6.18. Verstellbare thorakolumbale Polster unterstützen

Längenverstellung der Beläge









Befestigen Sie nach dem Einbau der Beläge die Schrauben mit dem Material.

Breitenverstellung der Rückenlehne

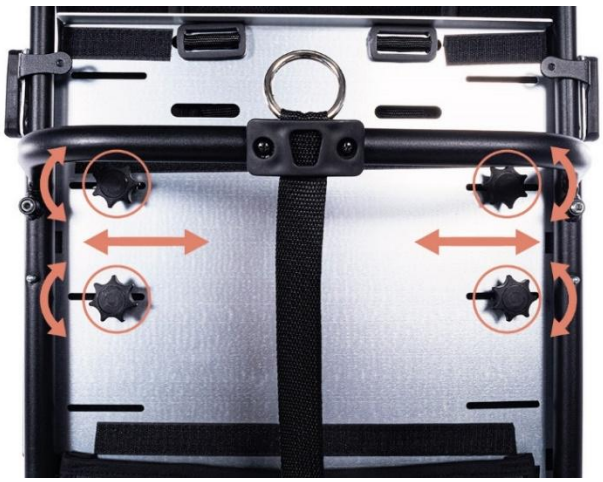

Höhenverstellung der Polster

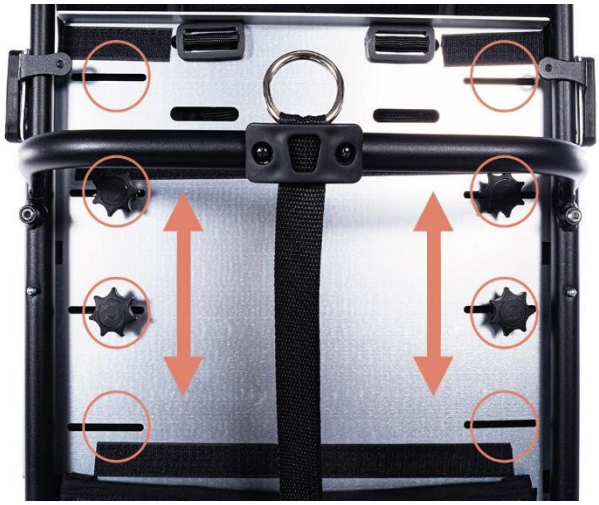

6.19. Verstellbare Hüftpolster

Höhenverstellung der Polster




Sitzbreitenverstellung




Sitztiefenverstellung



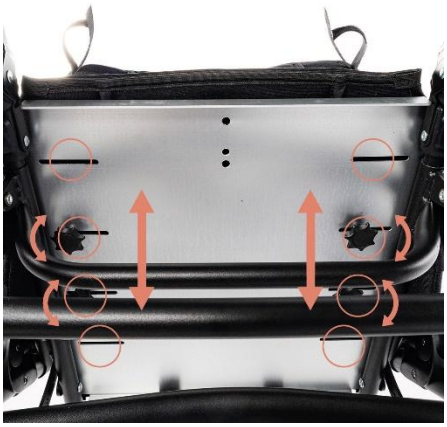

6.20. Seitenteile der Rückenlehne

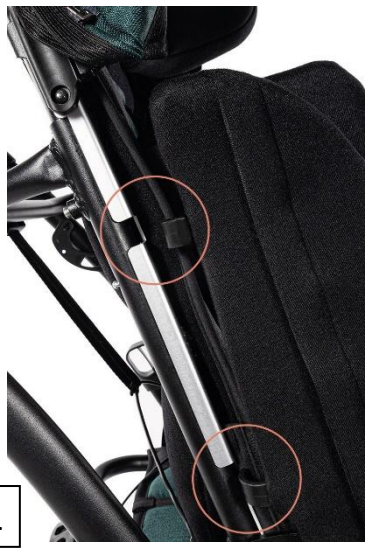

1



2



3

6.21. Abduktions- und Stabilisierungsgurte





Befestigen der Gurte am Sitz





Befestigung der Gurte am Rahmen

6.22. Sicherheitsbarriere





Drücken Sie das Buton auf beiden Seiten und schieben Sie die Schutzplanke ein oder aus.

6.23. Verstellbares Vordach mit Fenster

Mechanismus zur Montage des Verdecks am Rahmen des Kinderwagens



Verdeckbefestigung am Kinderwagengestell



Verdeckbefestigung

Schieben Sie die Halterung am Verdeck in die Halterung am Gestell des Kinderwagens.

Demontage mit dem roten Knopf im Inneren der Halterung an der Haube auf beiden Seiten.

Ändern der Größe des Blätterdachbereichs





6.24. Getränkehalter



7. ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG

7.1. Verstellbare Therapieliege (anstelle der Sicherheitsbarriere)





Die maximale Belastung beträgt 3 kg.

7.2. Rucksack





Die maximale Belastung des Rucksacks beträgt 2kg.

7.3. Einkaufskorb





Die maximale Belastung des Einkaufskorbs beträgt 3kg.

7.4. **Winterhandschuhe**





7.5. **Keil**







7.6. **Regenschutz (auf verstellbares Verdeck mit Fenster aufgesetzt)**



7.7. Schlafsack für die Beine (auf der Sicherheitsbarriere getragen)



7.8. Moskitonetz (befestigt an verstellbarem Baldachin mit Fenster)



7.9. Sonnenschirm





8. TECHNISCHE DATEN DES ALFA KINDERWAGENS

Länge des Kinderwagens	ca. 100-145 cm
Breite des Kinderwagens	66 cm
Höhe des Kinderwagens	ca. 107-128 cm
Gesamtgewicht	26 kg
effektive Sitztiefe	30-40 cm
Sitzbreite	27-32 cm*, 41 cm**
Höhe der Rückenlehne	59-74 cm
Breite der Rückenlehne	27-32 cm*, 40 cm**
Abstand zwischen Fußstütze und Sitz / Anzahl der Verstellungen	30-40 cm/ 6 Positionen
Länge des Kinderwagens für den Transport zusammengeklappt	ca. 103 cm
Breite des Kinderwagens für den Transport zusammengeklappt	66 cm
Höhe des Kinderwagens für den Transport zusammengeklappt	58 cm
Fassungsvermögen des Einkaufskorbs	3 kg
Tragfähigkeit eines BackPKK	2 kg
maximales Benutzergewicht	55 kg
Maximale Benutzerhöhe	ca. 100-150 cm
Winkel der Sitzfläche / Anzahl der Einstellungen	ok 5.7°-30.1° / 6 Positionen
Neigungswinkel der Rückenlehne / Anzahl der Einstellungen	ok -5.3°-91.1° / 8 Positionen
Winkel der Fußstütze / Anzahl der Einstellungen	ok 72°-193° / 8 Positionen

HINWEISE: *) Werte mit Pads, ** Werte ohne Pads

Toleranz der Messwerte +/- 20mm, +/- 1,5kg, +/- 1°

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Parametern vorzunehmen.

8.1. Materialzusammensetzung des Kinderwagens

Materialzusammensetzung des Kinderwagens: pulverbeschichteter Stahl und Aluminium, Stoffe 100% Polyester und Kunststoff (PP, PE).

9. LIEFERUNG UND WERKZEUGE

Die Originalverpackung sollte folgende Artikel enthalten:



- Gebrauchsanweisung mit Garantiekarte,
- Zusätzliche Ausrüstung nach Bestellung.

Vor dem Gebrauch:

a. Stellen Sie sicher, dass die Verpackung nicht beschädigt wurde. Wenn festgestellt wird, dass das Paket beschädigt ist, packen Sie die Ware in Anwesenheit des Kuriers aus und prüfen Sie, ob keines der Kinderwagenelemente beschädigt wurde.
b. Überprüfen Sie auf der Grundlage der Spezifikation den Inhalt der Verpackung (falls Elemente fehlen, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer).

Für den Auf- und Abbau des ALFA Kinderwagens ist kein Werkzeug erforderlich.
Um die Höhe und Sitztiefe der Rückenlehne einzustellen, verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen 4-mm-Inbusschlüssel.

10. AUF- UND ABBAU DES KINDERWAGENS

Das im Originalkarton vorverpackte Produkt ist bereits vormontiert.

- Schließen Sie die Installation ab, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

➢ Klappen Sie das Kinderwagengestell auf und montieren Sie die Rückenlehne, indem Sie die folgenden Parameter anpassen:
➢ Aktivieren / Deaktivieren der Richtungssperre der Vorderräder,
➢ Passen Sie die Höhe und den Winkel des Griffs an, um den Kinderwagen zu schieben,
➢ Stellen Sie den Winkel der Rückenlehne ein,
➢ Einstellen der Sitztiefe,
➢ die Länge der Fünfpunktgurte anpassen,
➢ Stellen Sie die Fußstütze auf die gewünschte Höhe ein,
➢ Installieren Sie eine Sicherheitsbarriere,
➢ Installieren Sie ein Vordach mit Fenster,
➢ Einstellen der Abduktions- und Stabilisierungsgurte,
➢ Installieren und Einstellen: Kopfstütze, Thorakolumbolenpolster, Hüftpolster, Seitenteile der Rückenlehne,
➢ Installieren Sie die entsprechende Zusatzausrüstung:
    - Keil
    - Rucksack
    - Einkaufskorb
    - Schlafsack für die Beine,
    - Moskitonetz
    - Regenschutz,
    - Sonnenschirm,
    - Getränkehalter.

- Um den Kinderwagen zu zerlegen, ist es notwendig:

➢ Entfernen Sie die Zusatzausrüstung,
➢ Entfernen Sie die Rückenlehne vom Kinderwagengestell (siehe Abschnitt 6.10),
➢ Entfernen Sie die Hinterräder vom Kinderwagenrahmen,
➢ Klappen Sie das Gestell des Kinderwagens zusammen.

11. VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Kinderwagens, dass das Schuhwerk bequem ist und das Sprunggelenk gut stabilisiert.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Kinderwagens, dass der Benutzer nicht ohne Kleidung in den Kinderwagen gesetzt wird, um den Körper in Bereichen zu bedecken, die mit der Polsterung des Kinderwagens in Berührung kommen. Dies dient der Vermeidung von Abschürfungen am Körper des Benutzers und aus hygienischen Gründen.
- Für Benutzer mit Inkontinenzproblemen legen Sie ein spezielles Wachstuch auf den Sitz des Kinderwagens, das in Apotheken oder medizinischen Geschäften gekauft werden kann.
- Bei der Verwendung zusätzlicher Hilfsmittel wie Belüftungsöffnungen, Drainagen, Beutel, Katheter usw. ist darauf zu achten, dass diese gut gegen Herausfallen, Herausziehen, Festziehen geschützt sind und die Benutzung des Kinderwagens nicht beeinträchtigen.

Um den Kinderwagen richtig zu benutzen, müssen Sie alle unten aufgeführten Schritte befolgen:

- Stellen Sie den Kinderwagen auf eine ebene und sichere Fläche.
- Klappen Sie den Kinderwagen richtig auf (siehe Abschnitt 6.1).
- Ziehen Sie die Zentralbremse an.
- Nehmen Sie alle Einstellungen am Kinderwagen vor (siehe Abschnitt 6. Kinderwagen-Funktionen):

a) die Richtungssperre der Vorderräder aktivieren / deaktivieren,
b) Stellen Sie die Höhe des Schiebegriffs des Kinderwagens ein,
c) die Sitztiefe einstellen,
d) die nutzbare Breite des Sitzes einzustellen,
e) den Neigungswinkel des Sitzes einstellen,
f) die Höhe der Rückenlehne einstellen,
g) den Winkel der Rückenlehne einstellen,
h) die Länge der Fünfpunktgurte anpassen,
i) die Höhe der Fußstütze einstellen,
j) den Neigungswinkel der Fußstütze einstellen,
k) Stellen Sie die Kopfstütze ein,
l) Passen Sie die thorakolumbalen Polster an,
m) die Hüftpolster einstellen,
n) die Abduktions- und Stabilisierungsgurte einstellen,
o) Passen Sie das Verdeck mit Fenster an,

- Entfernen Sie die Sicherheitsbarriere und die Therapieliege, falls dieses Gerät vorhanden und am Kinderwagen montiert ist.
- Bereiten Sie sich auf das Anlegen der Fünfpunktgurte, der Fußrastengurte sowie der Abduktions- und Stabilisierungsgurte vor.
- Setzen Sie den Benutzer in den Kinderwagen und stellen Sie sicher, dass alle zuvor vorgenommenen Einstellungen für den Benutzer angemessen und sicher sind.
- Setzen Sie dem Benutzer Fünfpunktgurte und Fußrastengurte an.
- Statten Sie den Benutzer mit anderen notwendigen Ausrüstungsgegenständen im Kinderwagen aus, falls verfügbar.

12. BEWEGEN DES KINDERWAGENS

Die beste Art, einen Kinderwagen zu bewegen, besteht darin, ihn mit seinen Rädern zu fahren.
In Fällen, in denen dies nicht möglich ist (z. B. um den Kinderwagen in einem Auto zu transportieren), kann der Kinderwagen aus Sicherheitsgründen angehoben und mit beiden Händen getragen werden, nachdem das Zubehör entfernt wurde, um das zu tragende Gewicht zu reduzieren und ihn zusammenzuklappen.
Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie das Gestell des Kinderwagens bewegen oder anheben. Der Rahmen sollte nach dem Zusammenklappen und Anbringen der Transportsicherung verschoben werden.
Verwenden Sie kein zusätzliches Zubehör, um den Kinderwagen zu bewegen – Sie riskieren, ihn zu beschädigen.

13. EIN- UND AUSSTEIGEN IN EINEN KINDERWAGEN

Stellen Sie den Kinderwagen beim Ein- und Aussteigen so nah wie möglich an einen stabilen und sicheren Ort, an den der Benutzer seine Position ändert. Sobald Sie sicher sind, dass die zentrale Bremse aktiv ist und die Fußplatte angehoben ist, um nicht darauf zu stehen, kann der Benutzer seine Position ändern.
Stellen Sie sich nicht auf die Fußstütze, da die Gefahr besteht, dass der Kinderwagen umkippt, den Benutzer verletzt und das Produkt beschädigt.
Achten Sie darauf, dass beim Ein- und Aussteigen aus dem Kinderwagen der Benutzer und andere Personen nicht auf der Fußstütze stehen sollten, da dies diese beschädigen und den Benutzer verletzen kann!

14. RICHTIGE POSITION IM KINDERWAGEN

Aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen wird empfohlen, die Hüfte und den Rücken so nah wie möglich an der Rückenlehne zu platzieren, um eine gleichmäßige Abstützung der Wirbelsäule zu gewährleisten (optimale Abstützung aller Teile der Wirbelsäule, damit kein Freiraum entsteht).
Die Oberschenkel sollten so weit wie möglich über ihre gesamte Länge gestützt werden, was durch die Einstellung der Tiefe des Kinderwagensitzes unterstützt wird, und die Füße sollten auf der Fußstützenplatte ruhen, die ein Verrutschen verhindert, eine optimale Spannung in der Beinmuskulatur aufrechterhält und einen Teil des Gewichts von den höheren Körperteilen verlagert.



AUFMERKSAMKEIT! Aufgrund der hohen Verstellbarkeit des Kinderwagens ist es möglich, während der Winkelverstellung des Sitzes und der Winkelverstellung der Rückenlehne eine solche Position einzustellen, in der sich der Kopf des Benutzers unterhalb der Beckenlinie befindet. **Es ist verboten, eine solche Position einzunehmen,** da dies zur Erstickungsgefahr oder zum Ersticken des Benutzers führen kann.



Verbotenes Positionieren des Kinderwagens

15. VERWENDUNG DES KINDERWAGENS

Halten Sie bei der Verwendung des Kinderwagens immer den Griff fest, um den Kinderwagen zu schieben, um zu verhindern, dass der Kinderwagen träge rollt.
Lösen Sie die Zentralbremse, während Sie den Schiebegriff des Kinderwagens festhalten, und schieben Sie den Kinderwagen in eine sichere Richtung.

16. BEWEGEN AUF GENEIGTEN FLÄCHEN

Positionieren Sie den Kinderwagen immer nach vorne, wenn Sie Hügel oder Rampen erklimmen. Begrenzen Sie Ihre Geschwindigkeit auf geneigten Flächen und bewegen Sie sich so langsam wie möglich.
Die Person, die den Kinderwagen schiebt, muss über eine angemessene Kraft verfügen, um die Stabilität des Kinderwagens zu kontrollieren.
Denken Sie immer daran, dass sich die Position des Schwerpunkts des Kinderwagens ändert, wenn Sie unebenes oder abschüssiges Gelände durchqueren. Seien Sie in einem solchen Fall sehr vorsichtig und sichern Sie den Kinderwagen.
Achten Sie bei der Verwendung von Rampen darauf, dass die Rampe geeignet ist und die Räder des Kinderwagens hoch genug sind, um die Rampe zu überwinden, dass der Rahmen des Kinderwagens nicht mit der Rampe in Berührung kommt und dass eine zweite Person zur Unterstützung zur Verfügung steht, da die Gefahr besteht, dass der Kinderwagen umkippt. das Produkt zu beschädigen und den Benutzer zu verletzen.

17. ÜBERWINDUNG VON SCHWELLEN ODER BORDSTEINEN

Wenn Sie kleine Hindernisse (kleine Schwellen, kleine Bordsteine usw.) überwinden, drücken Sie den Kippfuß und den Schiebegriff des Kinderwagens mit dem Fuß nach unten und in Ihre Richtung, um die Vorderräder des Kinderwagens anzuheben und die Vorderräder vorsichtig auf das Hindernis zu treiben. Ziehen Sie dann langsam den Schiebegriff des Kinderwagens vom Boden nach oben, um die Hinterräder des Kinderwagens anzuheben und die Hinterräder vorsichtig auf das Hindernis zu fahren.

18. TRANSPORT IM AUTO UND IN ANDEREN FAHRZEUGEN

- Entfernen Sie alle Zubehörteile aus dem Kinderwagen und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Falten Sie den Kinderwagen zusammen und legen Sie ihn in den Kofferraum.

Befindet sich der zerlegte Kinderwagen nicht getrennt vom Fahrgastraum im Kofferraum des Fahrzeugs, muss das Kinderwagengestell sorgfältig am Fahrzeug befestigt werden. Zu diesem Zweck können Sie unbenutzte Sicherheitsgurte verwenden.

- Um einen Kinderwagen in anderen Fahrzeugen wie Zügen, Straßenbahnen, Bussen, Flugzeugen, Schiffen usw. zu transportieren, ist es notwendig, die für den Transport in diesen Verkehrsmitteln verantwortlichen Personen nach den Bedingungen für eine sichere Reise mit einem Kinderwagen und den entsprechenden Anforderungen zu fragen.



Der ALFA-Kinderwagen sollte nicht als Sitz für den Transport eines Benutzers in einem Fahrzeug verwendet werden.

19. REINIGUNG UND PFLEGE

Die Polster sind bei bis zu 40°C in der Maschine waschbar. Verbot des Schleuderns. Die Polsterung sollte auf der Kinderwagenstruktur getrocknet werden.

Der Einkaufskorb sollte mit der Hand gewaschen werden (der Fleck des Kinderwagens sollte mit einem feuchten Tuch abgewischt werden).

Flecken sollten entfernt werden, sobald sie sich auf der Oberfläche des Einkaufsbaskers bilden.

AUFMERKSAMKEIT! Nicht mit Chemikalien reinigen, die Lösungsmittel und Bleichmittel enthalten. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel verursacht

Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor Gebrauch immer trocken ist.

Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden, die für diese Art von Material bestimmt sind, befolgen Sie die Anweisungen des verwendeten Reinigungsmittels.



Waschen bei 40°



Nicht bleichen



Nicht im Trockner trocknen



Nicht bügeln

20.AUFBEWAHRUNG DES KINDERWAGENS

Sauberer Kinderwagen sollte in einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Raum gelagert werden, vorzugsweise bei 0-35°C. Für die Langzeitlagerung befolgen Sie zusätzlich die unter Punkt 21 beschriebenen Schritte "jeden Monat".

21. SERVICE UND REGELMÄSSIGE INSPEKTIONEN

Für eine sichere und störungsfreie Nutzung des Kinderwagens ist es notwendig, ihn regelmäßig und gründlich den nachfolgend beschriebenen Inspektionen und Wartungen zu unterziehen.
In einer Situation, in der der Kinderwagenbenutzer nicht in der Lage ist, die oben genannten Tätigkeiten selbst auszuführen, sollte er den Kinderwagen an eine spezialisierte Kinderwagen-Servicestelle oder direkt an den Hersteller zurückgeben, der die Inspektion und die erforderlichen Wartungsarbeiten ordnungsgemäß durchführt. Für diese Aktivitäten kann eine zusätzliche Gebühr erhoben werden.
HINWEIS: Der Hersteller haftet für Defekte oder technische Schäden am Kinderwagen, die nur bei korrekter Bedienung des Kinderwagens verursacht werden. Die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb des Kinderwagens liegt nur dann beim Hersteller, wenn alle Empfehlungen des Herstellers strikt befolgt werden.

HINWEIS: Der Hersteller ist nur dann für die einwandfreie Funktion des Kinderwagens verantwortlich, wenn Originalteile und Originalzubehör darin verwendet werden.

Alle Reparaturen sollten in spezialisierten autorisierten Servicediensten (siehe Punkt 24) oder direkt beim Hersteller durchgeführt werden. Reparaturen am Kinderwagen, die von einer anderen Person als einem autorisierten Service oder dem Hersteller durchgeführt werden, führen zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die eine Folge von Reparaturen sein können, die von anderen Personen als dem autorisierten Service oder dem Hersteller durchgeführt wurden.

Der Service sollte wie folgt durchgeführt werden:

- **Jedes Mal vor der Benutzung des Kinderwagens**
  - Überprüfen Sie die Wirksamkeit der Zentralbremse - Nach dem Aktivieren der Zentralbremse sollten beide Hinterräder des Kinderwagens blockiert sein und können sich nicht drehen.
  - Überprüfen Sie die Befestigung der Strukturkomponenten - Überprüfen Sie alle Mechanismen des Kinderwagens und seiner beweglichen Teile und achten Sie insbesondere auf: korrekte Montage der Rückenlehne am Rahmen des Kinderwagens, ordnungsgemäße Montage der Räder, ordnungsgemäße Funktion der Fünfpunktgurte, korrekte Funktion des Sitzwinkelverstellmechanismus, korrekte Funktion des Rückenlehnen-Liegemechanismus und ordnungsgemäße Montage der Fußstütze.
  - Überprüfen Sie den Zustand der Reifen - Vergewissern Sie sich, dass die Reifen an allen vier Rädern nicht beschädigt oder abgenutzt sind.
  - Inspektion von massiven Rahmenteilen, Sitz mit Rückenlehne und Fußstützenrahmen - Sichtprüfung des Zustands der Strukturprofile. Diese Bauteile dürfen nicht beschädigt oder gerissen sein.
- **Alle einen Monat**
  - Reinigung des Kinderwagens
  - Sichtprüfung aller beweglichen Elemente, Lager, Verstellmechanismen – mit Silikonfett schmieren.
  - Alle Schraubverbindungen auf Lockerheit prüfen.

22. AUSNUTZUNG

Entsorgung und Recycling: gemäß den länderspezifischen Vorschriften.

23. EINHALTUNG DER ANFORDERUNGEN AN MEDIZINPRODUKTE

Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte. Der Hersteller hat eine entsprechende Konformitätserklärung für das Produkt ausgestellt, die unter www.mywam.eu

24. LISTE DER AUTORISIERTEN SERVICESTELLEN

POLEN
MyWam Sp. z o.o.
Wiosny Ludów 91, 40-373 Katowice, Polen
Tel: +48 32 733 11 31
Webseite: www.mywam.eu
E-Mail: mywam@mywam.eu

25. GARANTIEKARTE

Serie und Nummer: .....

Kaufdatum: ..... - ..... - .....

Stempel und Unterschrift des Verkäufers:

.....

.....

....

Garantiebedingungen

- Der Hersteller (Garant) gewährt dem Käufer eine Garantie auf den gekauften Kinderwagen für einen Zeitraum von 24 Monaten, gerechnet ab dem Kaufdatum.
- **Der Käufer, der sich über den Kinderwagen beschwert, sollte den Kinderwagen in einem sauberen Paket an den Verkäufer liefern (frei von Flecken, zusätzlicher Ausrüstung, die nicht zum Kinderwagen gehört, Feuchtigkeit, Haaren usw.) zusammen mit den Elementen des Kinderwagens, die vor Beschädigungen geschützt sind.**
- **Schäden, die durch unzureichenden Schutz des Kinderwagentransports und seiner Komponenten verursacht werden, unterliegen nicht der Garantiereparatur.**
- Der Beschwerdeführer (Käufer) kann im Falle einer Beschädigung der Sendung nicht verlangen, dass der Hersteller den Schaden behebt, wenn er die Sendung des Kinderwagens und seiner Komponenten falsch etikettiert oder falsch versichert.
- Die Gewährleistungsfrist im Falle der Annahme der Reklamation verlängert sich um die Zeit der Reparatur des Kinderwagens, die ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Kinderwagens an den Verkäufer im Rahmen der Garantie bis zu dem Tag, an dem der Kinderwagen zur Abholung bereit war, gezählt wird.
- Die in der Gebrauchsanweisung vorgesehenen Tätigkeiten, zu denen der Kinderwagenbenutzer verpflichtet ist, sie selbst und auf eigene Kosten durchzuführen, können nicht im Rahmen der Garantiereparatur durchgeführt werden.
- Wenn der Kinderwagen nicht in Übereinstimmung mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch, nicht in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung oder nicht mit den Grundsätzen des ordnungsgemäßen Betriebs verwendet wird, erlischt die Garantie.
- Bei baulichen Veränderungen am Lkw erlischt die Gewährleistung (im Bereich der Änderung oder in vollem Umfang).
- Schäden am Kinderwagen, die verursacht wurden durch: unsachgemäße Bedienung, unsachgemäße Wartung, unsachgemäße Lagerung des Kinderwagens, mechanische Beschädigungen und natürlicher Abrieb und Verschleiß von Teilen (z. B. Polster, Räder) fallen nicht unter die Garantie.
- Der Hersteller warnt vor Garantiereparaturen in nicht autorisierten Servicebetrieben. Wenn Sie eine solche Reparatur oder eine nicht autorisierte Modifikation des Kinderwagens feststellen, erlischt die Garantie.
- **Die Garantiekarte ist gültig, wenn sie Folgendes enthält: das Verkaufsdatum, das durch den Firmenstempel des Verkäufers bestätigt wird, die Unterschrift des Verkäufers, den Typ und die Seriennummer des LKWs.**
- Die Garantiekarte ist gültig, sofern sie keine Streichungen oder Korrekturen enthält.
- Der Hersteller des Kinderwagens führt in seinem Hauptsitz einen kostenpflichtigen Nachgarantieservice durch.
- Der Hersteller gibt die zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit 4 Jahren an. Eine weitere Verwendung nach diesem Zeitraum ist möglich, aber unter Berücksichtigung der Sicherheit und des Bedienkomforts empfehlen wir, dass der Hersteller oder ein autorisiertes Servicecenter eine technische Inspektion durchführt. Der Inspektionsservice ist kostenpflichtig und umfasst die Beurteilung des technischen Zustands des Gerätes, die Sicherheitsüberprüfung und alle erforderlichen Wartungsarbeiten.
- In Angelegenheiten, die nicht durch diese Garantiekarte abgedeckt sind, gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (Polen).
- Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Ansprüchen aus der Garantie oder Garantie des Kinderwagens sind an den Verkäufer zu richten.

26. NOTIZEN