PRODUZENT / WERBETREIBENDE: MyWam Sp. z o.o.

ILLUSTRATIONSFOTO



Anleitungen zur Anwendung

Ausgabe 3 / 2025-10-16

Orthopädischer Rollator go.spider

DAS IST EIN MEDIZINISCHES GERÄT.

VERWENDEN SIE ES GEMÄSS DEN ANLEITUNGEN ODER DEM ETIKETT.

BEABSICHTIGTE VERWENDUNG DER INSTRUKTION

Die Anleitungen sind für Personen gedacht, die direkte Betreuung für behinderte Menschen (Assistenten – Eltern, Erziehungsberechtigte) leisten, die den orthopädischen Rollator benutzen. Es ist auch für Ärzte und Physiotherapeuten gedacht, die einen Rollator bedienen.

BEMERKUNG! Vor der Nutzung des Rollators ist jeder Nutzer verpflichtet, diese Anweisung zu lesen und zu befolgen.

BEMERKUNG! Im Falle eines medizinischen Vorfalls im Zusammenhang mit dem go.spider orthopädischen Rollator müssen Sie den Hersteller und die zuständige Behörde des Mitgliedstaates, in dem Sie oder der Patient leben, schriftlich per Einschreiben oder E-Mail mit Bestätigung des Empfangs benachrichtigen.

Kontaktdaten des Herstellers:

- Postadresse: MyWam Sp. z o.o., Plebiscytowa 3, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polen
- Kontakttelefonnummer: +48 32 733 11 31
- E-Mail-Adresse: mywam@mywam.eu

Version der Anleitung: **DE Edition 3 / 2025-10-16**
Die Anweisung wurde mit Microsoft Translator übersetzt.

MyWam Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische und kommerzielle Änderungen am Inhalt der Nutzungsanleitung ohne vorherige Vorankündigung vorzunehmen. Jede Änderung wird durch das Datum festgelegt, an dem die Kontoausstellung zuletzt aktualisiert wurde**.** Die elektronische Version der Anweisung wird auf der Website von www.mywam.eu verfügbar sein.

BEMERKUNG! Die in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Fotos dienen nur als Referenz und können sich vom gekauften Produkt unterscheiden.

MyWam Sp. z o.o. hat ein Qualitätsmanagementsystem implementiert, das der ISO 13485-Norm entspricht, im Bereich der Konstruktion, Produktion und zum Verkauf von Medizinprodukten der Klasse I.

ISO 13485
LL-C (Certification)

INHALTSVERZEICHNIS

BEABSICHTIGTE VERWENDUNG DER INSTRUKTION 2
1. BEABSICHTIGTE VERWENDUNG UND HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG 4
2. DACHZIEGEL 4
3. SYMBOLMARKIERUNG 4
4. WICHTIGE SICHERHEITSTIPPS UND -VORSCHRIFTEN 5
5. ALLGEMEINE KONSTRUKTION 6
6. MERKMALE DES ORTHOPÄDISCHEN ROLLATORS 8
6.1. Das Entfalten des Walker-Rahmens 8
6.2. Falten des Walker-Rahmens 10
6.3. Vorderrad-Drehverriegelung 11
6.4. Hinterrad-Reibungsbremse 11
6.5. Revere-Roll-Schloss 12
6.6. Obere Verlängerung 12
6.7. Auffanggurt 13
6.8. Stützgriffe 14
6.9. Anti-Kipper 16
7. ZUBEHÖR 16
7.1. Begleiter-Führerbar 16
7.2. Unterarmunterstützung 17
7.3. Beckenstütze 18
7.4. Sitz 22
7.5. Bremsen 23
7.6. Gerade Griffe zur Unterstützung 25
7.7. Reisetasche 26
8. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DES ORTHOPÄDISCHEN ROLLATORS GO. SPIDER 26
8.1. Rohmaterialzusammensetzung des Rollators 26
9. LIEFERUNG UND WERKZEUGE 27
10. ZUSAMMENBAU UND AUSEINANDERBAU DES ROLLATORS 27
11. VORBEREITUNG FÜR DEN EINSATZ 27
12. DEN ROLLATOR BEWEGEN 28
13. KORREKTE LAUFPOSITION 28
14. BENUTZUNG DES ROLLATORS 28
15. TRANSPORT IM AUTO UND IN ANDEREN FAHRZEUGEN 28
16. REINIGUNG UND PFLEGE 29
17. LAGERUNG DES ROLLATORS 29
18. DIENST- UND PERIODISCHE INSPEKTIONEN 29
19. BESEITIGUNG 30
20. EINHALTUNG DER ANFORDERUNGEN AN MEDIZINISCHE GERÄTE 30
21. LISTE DER AUTORISIERTEN SERVICESTELLEN 31
22. GARANTIEKARTE 32
23. NOTIZEN 33

1. BEABSICHTIGTE VERWENDUNG UND HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG

Der go.spider orthopädische Rollator ist ein medizinisches Gerät der Klasse I, das für Menschen mit Behinderungen entwickelt wurde, die aufgrund ihrer Krankheiten nicht selbstständig gehen oder stehen bleiben können. Das Produkt dient als spezialisiertes therapeutisches System und unterstützt den Prozess des Erlernens und der Neuerziehung des Ganges. Sie ermöglicht es Menschen, die ihre Beine bewegen können, aktiv zu bewegen und Übungen mit den unteren Gliedmaßen durchzuführen.

Klinische Indikationen umfassen m.in Rehabilitation nach chirurgischen Eingriffen, bei Schwäche der unteren Gliedmaßen durch Gleichgewichtsstörungen, wenn der Nutzer sich mit Hilfe von Krücken nicht bewegen kann usw.

Das Produkt richtet sich an Nutzer:

- Größe 1 – mit einer maximalen Höhe von **100–135 cm** und einem Gewicht von bis zu **35 kg**,
- Größe 2 – mit einer maximalen Höhe von **130–150 cm** und einem Gewicht von bis zu **50 kg**,
- Größe 3 – mit einer maximalen Höhe von **150–170 cm** und einem Gewicht von bis zu **80 kg**.

Die Nutzer können den orthopädischen Rollator nicht allein benutzen, sondern nur mit Hilfe einer Betreuerin. Das Gerät sollte gemäß den Empfehlungen des behandelnden Arztes oder Physiotherapeuten verwendet werden.

Kontraindikationen:


Verletzungen an den oberen Gliedmaßen, die es unmöglich machen, sich auf einem Rollator zu stützen.

2. DACHZIEGEL

Namensschild



Warnschild

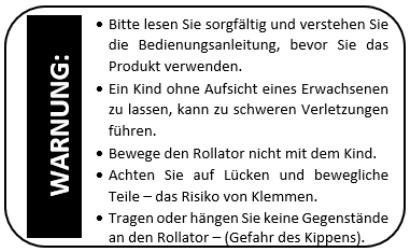

3. SYMBOLMARKIERUNG

SN	Produktseriennummer		Herstellername
	Zulässiges Gesamtgewicht des Nutzers	MD	Das Produkt ist ein medizinisches Gerät
	Herstellungsdatum		BESCHREIBUNG: "**WARNUNG!**" und das Symbol in dieser Anweisung wird verwendet, um die Aufmerksamkeit des Lesers auf den mit diesem Zeichen gekennzeichneten Inhalt zu schärfen. Die Nichteinhaltung der mit dieser Beschreibung gekennzeichneten Inhalte kann ein Risiko für die Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und Begleiter darstellen und auch zu Schäden am Produkt führen.
CE	Konformitätsbewertungszeichen gemäß den einschlägigen europäischen Vorschriften und Richtlinien		
	Warnung zur Handhabung der Produktanweisungen zur Verwendung		

4. WICHTIGE SICHERHEITSTIPPS UND -VORSCHRIFTEN

- Es ist verboten, den orthopädischen Rollator auf eine Weise zu verwenden, für die er nicht vorgesehen ist.
- Das Produkt enthält kleine Teile, die gefährlich sein können, wenn sie von einem Kind eingenommen werden!
- **BEMERKUNG!** Sie können die Griffe außerhalb des Rollators nicht seitlich neigen – es besteht die Gefahr, die Stabilität zu verlieren.
- **BEMERKUNG!** Beim Benutzen und Bedienen des go.spider orthopädischen Rollators sowie beim Falten und Einstellen der Mechanismen besteht die Gefahr, dass Körperteile des Nutzers/Betreuers in den Löchern/Spalten zwischen den Komponenten eingeklemmt und/oder zusammengedrückt werden. Sie sollten diese Schritte mit besonderer Sorgfalt durchführen. Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, muss die Position durch gründliches Anziehen der Muttern/Schrauben stabilisiert werden.
- **BEMERKUNG!** Wenn Sie durch Türen oder ähnliche Hindernisse fahren, die die Fahrtrichtung einschränken, achten Sie darauf, dass auf beiden Seiten genügend Platz vorhanden ist, um zu verhindern, dass Ihre Hände oder andere Körperteile eingeklemmt werden und um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- **BEMERKUNG!** Überschreiten Sie das maximal zulässige Benutzergewicht nicht.
- **BEMERKUNG!** Die Temperatur des Gehträgers kann steigen, wenn er Sonnenlicht ausgesetzt ist. Es wird empfohlen, den Rollator nicht dem Sonnenlicht auszusetzen.
- **BEMERKUNG!** Der Rollator ist nicht für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen (unter 5°C) vorgesehen.
- **BEMERKUNG!** Beim Anpassen der Höhe kann ein gewisser Widerstand der Klemme wahrgenommen werden – dies ist normal und sorgt dafür, dass die Position sicher verschlossen ist.
- **BEMERKUNG!** Die Hüftpolster-Knöpfe befinden sich in der Nähe der Halterungen, daher sollte beim Einstellen Vorsicht geboten werden, um Komfort und Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten.

WARNUNG!



- Lass den Nutzer niemals unbeaufsichtigt im Rollator!
- Greifen Sie die Griffe nicht mit nassen und schmutzigen Händen – es besteht die Gefahr zu fallen und auszurutschen.
- Beim Gehen halten Sie die Griffe mit beiden Händen.
- Achten Sie auf Lücken und bewegliche Teile – es besteht die Gefahr von Klemmen.
- Tragen Sie den Rollator nicht mit dem Nutzer.
- Tragen oder hängen Sie keine Gegenstände an den Rollator (Kipprisiko).
- Der Rollator ist in einer Tasche verpackt. Halten Sie sie unerreichbar für Säuglinge und kleine Kinder.

- **BEMERKUNG!** Es ist verboten, einen Rollator zu verwenden, wenn der technische Zustand des Produkts oder seines einzelnen Elements Zweifel beim Nutzer aufwirft oder eindeutig falsch ist, dann darf er nicht verwendet werden. In einer solchen Situation wird empfohlen, den Verkäufer dringend um Rat zu bitten.

5. ALLGEMEINE KONSTRUKTION

Grundausstattung



1- Obere Verlängerung
2- Höhenverstellung der oberen Verlängerung
3- Auffanggurt
4- Reverse-Roll-Lock
5- Anti-Kipper
6- Stützgriffe
7- Rahmenfaltmechanismus
8- Vorderrad-Drehverriegelung
9- Vordere Schwenkräder
10- Hinterrad-Reibungsbremse
11- Hinterräder

Zubehör



1- Begleiter-Führerbar
2- Unterarmunterstützung
3- Gerade Griffe zur Unterstützung
4- Sitz
5- Bremsen
6- Beckenstütze
7- Reisetasche

6. MERKMALE DES ORTHOPÄDISCHEN ROLLATORS

6.1. Das Entfalten des Walker-Rahmens



1



BEMERKUNG! Ein Versäumnis kann zu Schäden an der Struktur führen!

Lockere den Knauf auf beiden Seiten des Rahmens und hebe die Abstandshalter (A) an, sodass Schraube und Mutter die Kerbe (B) verlassen; so kann der Rahmen frei entfaltet werden



2



3



4

Dreh den Knopf auf beiden Seiten



5



6

Schiebe das oberste Zubehör ein.



7

Stellen Sie die Höhe der oberen Verlängerung ein

BEMERKUNG! Überschreiten Sie nicht die Mindest- und Maximalbereiche an der oberen Strecke.



8

Schließe den Verschluss auf beiden Seiten



9



10

6.2. Falten des Walker-Rahmens

1



Mach den Verschluss auf beiden Seiten ab.

2



Ziehe die obere Verlängerung heraus.

3



Lockere den Knopf auf beiden Seiten

4



5



6



6.3. Vorderrad-Drehverriegelung

Verriegelung der Vorderräder







Entriegelung der Vorderräder







6.4. Hinterrad-Reibungsbremse



Durch das Anziehen passt man die Verlangsamung des Hinterrads ein.

6.5. Revere-Roll-Schloss



Angelegte Sperre



Schloss entfernt

6.6. Obere Verlängerung



Höhenverstellung



1

Mach den Verschluss auf beiden Seiten ab.



2

Stelle auf beiden Seiten die gleiche Höhe ein

BEMERKUNG! Überschreiten Sie nicht die Mindest- und Maximalbereiche an der oberen Strecke.



3



4

Schließen Sie den Verschluss auf beiden Seiten



Mindesthöhe



Maximale Höhe

6.7. Auffanggurt




Montage auf einem Rollator







Anleitungen zum Befestigen der Gurte am Rollatorrahmen

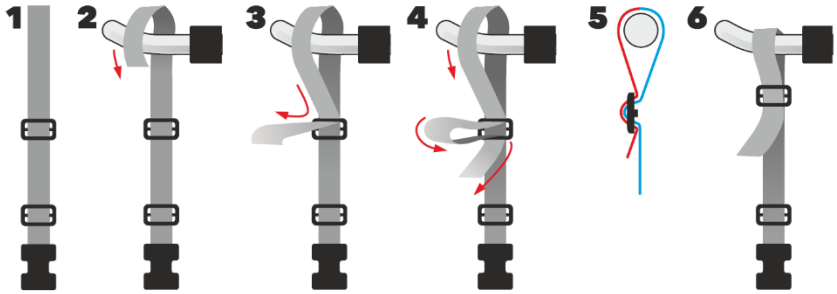

6.8. Stützgriffe



BEMERKUNG! Um die Griffe zusammenzubauen/auseinanderzunehmen, verwenden Sie einen 5-mm-Allbusschlüssel (im Umfang).

Versammlung

1



Schiebe die Griffe auf beide Seiten

2



Dreh die Schrauben auf beiden Seiten

Entfernung

1



2



Schraube die Schrauben auf beiden Seiten ab, schiebe die Griffe auf beiden Seiten heraus

Einstellbereich des Griffs



Korrekte Anpassung



Nicht erlaubt

BEMERKUNG! Kippen Sie die Griffe nicht seitlich nach außen – es besteht die Gefahr, die Stabilität zu verlieren.

6.9. Anti-Kipper





Montage und Demontage mit markierten Schrauben auf beiden Seiten des Rollators.


7. ZUBEHÖR

7.1. Begleiter-Führerbar

BEMERKUNG! Um die angeschlossene Führungsstange zusammenzubauen oder zu zerlegen, verwenden Sie einen 5-mm-Allbusschlüssel (mitgeliefert).

Versammlung

1

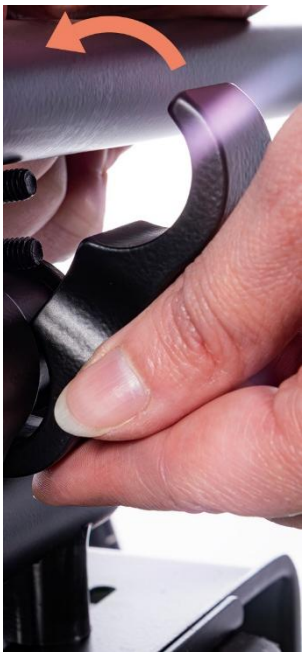

2



3



4



Schrauben und Muttern einsetzen und einschrauben

Entfernung

1



2



Entferne die Schrauben

7.2. Unterarmunterstützung

Zusammenbau / Zerlegung:





BEMERKUNG! Um die Unterarmstütze zusammenzubauen/auseinanderzunehmen, verwenden Sie einen 5-mm-Inbusschlüssel (im Umfang).

Änderung des Winkels der Unterarmstütze





BEMERKUNG! Um den Winkel der Unterarmstütze zu ändern, verwenden Sie einen 5-mm-Allbusschlüssel (enthalten).

Anpassung der Unterarmstütze



7.3. Beckenstütze



BEMERKUNG! Um die Beläge zusammenzubauen oder zu zerlegen, verwenden Sie einen 5-mm-Inbusschlüssel (im Umfang).

Versammlung



1



2



3



4



5

Entfernung

1



2



Anpassung der Breite der Beckenstütze



Lockere beide Muttern und passe die Breite der Beläge an.

Sobald die Breite der Beläge eingestellt ist, ziehen Sie die Muttern fest.



Minimale Breite



Maximale Breite

Up-Down-Pads-Einstellung



Lockere die markierten Schrauben mit einem Beibusschlüssel (im Inbus) und stelle die Höhe der Beläge ein.

Sobald die Höhe eingestellt ist, entferne die Schrauben.





Seitliche Einstellung der Polster



Lockere die markierte Schraube mit einem Inbusschlüssel (enthalten) und stelle das Pad ein.

Sobald das Polster sitzt, schraube die Schraube fest.

7.4. Sitz



BEMERKUNG! Um den Sitz zusammenzubauen/auseinanderzunehmen, verwenden Sie einen 4-mm-Allbusschlüssel (enthalten).

Versammlung



1

Dreh den Knauf ab, stecke die



2

Schraube und schraube sie in das Sitzrohr



3

Die Schraube mit einem Inbusschlüssel festziehen.



4

Den Sitz mit Gurten befestigen.

Entfernung



1

Lösen Sie die Gurte auf beiden Seiten.



2

Schrauben Sie die Schraube mit einem Allbusschlüssel ab und entfernen Sie den Sitz



3

Zieh die Schraube ein und dreh den Knopf

7.5. Bremsen



BEMERKUNG! Um die Bremsen einzu- oder auszubauen, verwenden Sie einen 5-mm-Inbusschlüssel (im Angebot).

BEMERKUNG! Abgenutzte oder abgenutzte Zähne an der Bremse können zu Fehlfunktionen führen – sie müssen sofort ersetzt werden.

BEMERKUNG! Damit die Handbremse richtig funktioniert, muss auch die Reibungsbremse des Hinterrads festgezogen werden.

Versammlung



1



2

Fügen Sie das Ende des Links in das markierte Feld ein



3



4

Entfernung



1



2



3

Entferne das Ende der Schnur aus den Löchern

Bremskabelverstellung



BEMERKUNG! Wenn das Kabel locker oder gedehnt wird, stellen Sie es so ein, dass die Bremsleistung erhalten bleibt.

Drehen Sie die Knöpfe 1 und 2 ab, bis eine effektive Bremswirkung erreicht ist, und ziehen Sie dann Knopf 1 fest, um den Mechanismus zu stillen und ein Drehen zu verhindern.

7.6. Gerade Griffe zur Unterstützung





Montage und Demontage der Griffe auf die gleiche Weise wie bei traditionellen Griffen in Abschnitt 6.8.

7.7. Reisetasche



Die maximale Ladung der Tasche beträgt 2 kg.



8. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DES ORTHOPÄDISCHEN ROLLATORS GO. SPIDER

Parameter	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Walker-Länge	80 cm	92 cm	94 cm
Breite des Laufers	66 cm	69 cm	69 cm
Walker Height	58 – 80 cm	64 – 92,5 cm	74 – 114 cm
Höhe vom Boden bis zum Griff	47 – 59 cm	53 – 72 cm	64 – 92 cm
Masse	8,8 kg	9,2 kg	10,5 kg
Länge des Rollators zum Transport gefaltet	86 cm	100 cm	103 cm
Breite des zum Transport gefalteten Rollator	66 cm	69 cm	69 cm
Höhe des zum Transport gefalteten Rollator	27 cm	29 cm	29 cm
Taschenladekapazität	2 kg	2 kg	2 kg
Max. Patientengewicht	35 kg	50 kg	80 kg
Patientenwachstum	100 – 135 cm	130 – 150 cm	150 – 170 cm

KOMMENTARE:

Toleranz der Messwerte +/- 20 mm, +/- 1,5 kg.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Parametern vorzunehmen.

8.1. Rohmaterialzusammensetzung des Rollators

Pulverbeschichteter Stahl und Aluminium, 100 % Polyesterstoffe und Kunststoffe (PA, PP, PU, PVC).

9. LIEFERUNG UND WERKZEUGE

Die Originalverpackung sollte folgende Artikel enthalten:

- Gefalteter Rollatorrahmen und obere Verlängerung,
- Zusätzliche Ausrüstung gemäß der Anordnung,
- Anleitung zur Verwendung mit der Garantiekarte,
- Allbusschlüssel 5mm
- 4mm Allbusschlüssel (beim Sitzkauf).

Vor der Nutzung:

a. Überprüfen Sie, ob die Verpackung nicht beschädigt wurde (im Falle einer Beschädigung der Verpackung in Anwesenheit des Lieferanten auspacken und prüfen, ob keine Elemente beschädigt wurden).
b. Überprüfen Sie den Inhalt der Sendung gemäß den Spezifikationen (falls eine der Komponenten fehlt, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer).

Lies die gesamte Anleitung sorgfältig, bevor du sie benutzt.
Um die Stützgriffe, Beckenstützen, die zugehörige Führungsstange und die Bremsen zu installieren, benötigen Sie einen 5-mm-Inbusschlüssel (inklusive Inbus).
Um den Sitz einzubauen, benötigt man einen 4-mm-Allbusschlüssel (beim Kauf des Sitzes enthalten).

10. ZUSAMMENBAU UND AUSEINANDERBAU DES ROLLATORS

- **Installation des Rollators.** Das im Originalkarton vorverpackte Produkt ist bereits vormontiert. Schließen Sie die Installation ab, indem Sie diese Schritte befolgen:
  - Entfalte den Walker-Rahmen,
  - Installieren und anpassen Sie das obere Add-on,
  - Installieren Sie zusätzliche Ausrüstung.
- **Auseinandernehmen des Rollators:**
  - zusätzliche Ausrüstung abbauen,
  - das obere Zusatzbett abbauen,
  - Falt den Rollator.

11. VORBEREITUNG FÜR DEN EINSATZ

Vor der Nutzung solltest du:

- Überprüfen Sie, ob der Rollator ordnungsgemäß ausgeklappt und der Rahmenklappmechanismus ordnungsgemäß geschlossen (verriegelt) ist.
- Überprüfen Sie die korrekte Installation aller vier Räder und den technischen Zustand (keine mechanischen Schäden – Brüche, Risse).
- Überprüfen Sie die Funktion der Hinterrad-Reibungsbremse, indem Sie die Hinterrad-Reibungsbremse aktivieren.
- Schalte den Vorderrad-Drehblock ein.
- Überprüfen Sie die Funktionsweise des Reverse-Roll-Locks, indem Sie das Reverse-Roll-Lock aktivieren.

- Nehmen Sie alle Einstellungen korrekt vor und passen Sie den Rollator an die Bedürfnisse des Nutzers ein, einschließlich der Einstellung der passenden Höhe und Breite der gesamten oberen Verlängerung. Überprüfen Sie, ob alle Verstellelemente richtig sitzen und gesichert sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Benutzer nicht ohne Kleidung im Rollator sitzt, die den Körper an den Kontaktpunkten mit dem Sicherheitsgurt schützt. Dies dient dazu, Abschürfungen am Körper des Nutzers zu verhindern und aus hygienischen Gründen.
- Achten Sie darauf, dass das Schuhwerk des Nutzers bequem ist und das Sprunggelenk gut stabilisiert.
- Wenn es Hinweise auf die Verwendung orthopädischer Geräte (Halskragen, Korsett, Orthesen, orthopädische Schuhe) gibt, sollten diese getragen werden.
- Im Fall der Verwendung zusätzlicher Hilfsmittel wie Beatmungsgeräte, Abflüsse, Beutel, Katheter usw. sollten Sie sicherstellen, dass sie gut vor Herausfallen, Herausziehen oder Einklemmen geschützt sind und die Nutzung des Rollators nicht beeinträchtigen.

12. DEN ROLLATOR BEWEGEN

Die beste Methode, einen orthopädischen Rollator zu tragen, ist, ihn mit seinen Rädern zu lenken.
Beim Tragen oder Anheben des Gehrahmens ist äußerste Vorsicht geboten. Der Rahmen muss bewegt werden, nachdem das Transportschloss zusammengeklappt und befestigt wurde.
Verwenden Sie kein Zubehör, um den Rollator zu tragen – es besteht ein Risiko, ihn zu beschädigen.

13. KORREKTE LAUFPOSITION

Aus Sicherheits- und Gesundheitsgründen wird empfohlen, dass der Nutzer eine stehende Position einnimmt, so nah wie möglich an der Gehhaltung, mit leicht gebeugten Knien und Hüften. Die Position sollte freien Zugang zum Stützgriff ermöglichen, und der Sicherheitsgurt sollte richtig eingestellt werden, sodass er die natürliche Gangmechanik nicht einschränkt, aber gleichzeitig vor Stürzen schützt.

14. BENUTZUNG DES ROLLATORS

Beim Einsatz des orthopädischen Rollators halten Sie immer die Stützgriffe fest.

15. TRANSPORT IM AUTO UND IN ANDEREN FAHRZEUGEN

- Um den go.spider-orthopädischen Rollator im Auto zu transportieren, falten Sie den Rollator zusammen und legen ihn in den Kofferraum.

Befindet sich der zusammengeklappte Rollator nicht im Kofferraum des Autos, getrennt vom Beifahrerraum, muss der Rollatorrahmen sorgfältig am Fahrzeug befestigt werden. Dafür können Sie unbenutzte Sicherheitsgurte verwenden.

- Einen orthopädischen Rollator in anderen Fahrzeugen wie Zügen, Straßenbahnen, Bussen, Flugzeugen, Schiffen usw. mitzunehmen. Fragen Sie die für den Transport in diesen Transportmitteln verantwortlichen Personen

nach den Bedingungen für eine sichere Reise mit einem Rollator zu Ihrem Ziel und zu den entsprechenden Anforderungen.

16. REINIGUNG UND PFLEGE

Der Sicherheitsgurt kann nur von Hand und sorgfältig bei einer Temperatur von bis zu 30 °C gewaschen werden. Nicht in der Maschine waschen. Flecken sollten sofort entfernt werden, nachdem sie auf der Oberfläche entstanden sind.
Die Folie an der oberen Verlängerung sollte von Hand gewaschen werden (der Fleck auf der Folie sollte mit einem feuchten Tuch abgewischt werden).

BEMERKUNG! Reinigen Sie nicht mit Chemikalien, die Lösungsmittel und Bleichmittel enthalten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel entstehen.

Achten Sie darauf, dass das Produkt vor der Anwendung immer trocken ist.
Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln, die auf diese Art von Material spezialisiert sind, befolgen Sie die Anweisungen für das verwendete Produkt.


Nur Handwäsche


Bleiche nicht


Nicht im Trockner trocknen


Trocknen Sie in horizontaler Position


Nicht bügeln

17. LAGERUNG DES ROLLATORS

Das Produkt sollte in einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahrt werden. Im Fall der Langzeitlagerung ist es notwendig, zusätzlich die in Punkt 18 beschriebenen Aktivitäten "jeden einzelnen Monat" auszuführen.

18. DIENST- UND PERIODISCHE INSPEKTIONEN

Um das Produkt sicher und fehlerfrei zu verwenden, sollte es regelmäßig und gründlich in speziellen Servicezentren inspiziert und gewartet werden.
Ist der Nutzer nicht in der Lage, die oben genannten Tätigkeiten selbst durchzuführen, sollte er das Produkt an eine spezialisierte Servicestelle oder direkt an den Hersteller zurückgeben, der die erforderlichen Servicearbeiten ordnungsgemäß inspiziert und durchführen wird. Diese Aktivitäten können mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Alle Reparaturen müssen von spezialisierten, autorisierten Servicezentren (siehe Punkt 21) oder direkt vom Hersteller durchgeführt werden. Walker-Reparaturen, die von jemand anderem als einem autorisierten Serviceanbieter oder dem Hersteller durchgeführt werden, erlöschen die Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Personenschäden oder Schäden am Produkt, die durch Reparaturen verursacht werden können, die von anderen Personen als dem autorisierten Service oder dem Hersteller durchgeführt wurden.

Im Produkt dürfen nur originale Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden.

Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden:

- **Jedes Mal vor der Anwendung**
  - Überprüfung der Effizienz des Hinterrad-Retarders und des Reverse-Roll-Locks – Wenn der Hinterrad-Retarder aktiviert ist, sollten beide Hinterräder des Rollators mit spürbarem Widerstand rotieren. Wenn der Reverse-Roll-Lock aktiviert ist, sollte sich das Rad blockieren, wenn der Rollator rückwärts fährt.
  - Überprüfung der Befestigung der Strukturelemente – Alle Rollatormechanismen und ihre beweglichen Teile sollten überprüft werden, insbesondere sollte beachtet werden: die korrekte Installation der oberen Verlängerung, der korrekt verriegelten Winkelverstellung der Stützgriffe, die korrekte Verriegelung des Rahmens.
  - Überprüfung des Zustands der Räder – Überprüfe, ob die Räder mechanische Schäden (Risse, Brüche) haben.
  - Inspektion der festen Rahmenelemente – Visuelle Inspektion des Zustands der Tragprofile. Diese Bauteile dürfen weder beschädigt noch gerissen werden.
  - Verletzungsrisiko durch Bremsversagen. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Radschloss richtig funktioniert, und korrigieren Sie es bei Bedarf auch. Abgenutzte oder beschädigte Räder müssen ersetzt werden.

Jeden einzelnen Monat

- Reinigung des Rollators – Reinigen Sie alle beweglichen Teile, Lager und Verstellmechanismen mit einem weichen Tuch und schmieren Sie sie dann mit ein paar Tropfen Silikonfett.
- Kontrolle aller Schraubverbindungen auf Freiräume – Prüfe sorgfältig, ob alle Schrauben und Knöpfe im Rollator richtig festgezogen sind.
- Überprüfen Sie die Öffnung der Abflusslöcher.

19. BESEITIGUNG

Der go.spider orthopädische Rollator besteht aus recycelbaren Materialien. Die Verpackung des Produkts sowie Stahl-, Aluminium- und Kunststoffprodukte können recycelt werden.
Entsorgung und Recycling: gemäß den geltenden Vorschriften Ihres Landes.

20. EINHALTUNG DER ANFORDERUNGEN AN MEDIZINISCHE GERÄTE

Medizinprodukte der Klasse I, die mit der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte konform sind. Der Hersteller hat eine entsprechende Konformitätserklärung für das Produkt herausgegeben, die auf der www.mywam.eu Seite zu finden ist

21. LISTE DER AUTORISIERTEN SERVICESTELLEN

POLEN
MyWam sp. z o.o.
Wiosny Ludów 91, 40-373 Katowice, Polen
Tel: +48 32 733 11 31
Website: www.mywam.eu
E-Mail-Adresse: mywam@mywam.eu

22. GARANTIEKARTE

Serie und Ausgabe: .....

Kaufdatum: ..... - ..... - .....

Stempel und Unterschrift des Verkäufers:

.....

.....

....

Garantiebedingungen

- Der Hersteller (Bürge) gewährt dem Käufer eine Garantie für den gekauften Rollator für einen Zeitraum von 24 Monaten, einschließlich des Kaufdatums.
- **Der Käufer, der sich über den Rollator beschwert, sollte ihn dem Verkäufer im Paket abliefern, sauber (frei von Flecken, zusätzlicher Ausrüstung, die nicht dem Rollator gehört, Feuchtigkeit, Haare usw.). zusammen mit den Walker-Elementen, die vor Schäden geschützt sind.**
- **Schäden durch unzureichenden Schutz des Rollators und seiner Komponenten unterliegen nicht der Garantie.**
- Der Beschwerdeführer (Käufer) darf im Falle von Schäden an der Sendung keine Entschädigung vom Hersteller verlangen, wenn diese die Lieferung des Rollators und seiner Komponenten falsch kennzeichnet oder falsch versichert.
- Die Garantiezeit im Falle der Annahme der Beschwerde verlängert sich um den Zeitpunkt der Reparatur des Rollators, der von dem Moment angerechnet wird, in dem der Rollator dem Verkäufer unter der Garantie übergeben wird, bis zu dem Tag, an dem der Rollator abholbereit war.
- Die im Handbuch vorgesehenen Maßnahmen, die der Benutzer des Rollators eigenständig und auf eigene Kosten ausführen muss, können nicht im Rahmen einer Garantiereparatur durchgeführt werden.
- Fehlgebrauch, Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung oder ordnungsgemäße Nutzung des Rollators erlöschen die Garantie.
- Strukturelle Änderungen am Rollator erlöschen die Garantie (im relevanten Bereich der Änderungen oder im gesamten Bereich).
- Schäden am Rollator durch unsachgemäße Benutzung, unsachgemäße Wartung, unsachgemäße Lagerung des Rollators, mechanische Schäden sowie natürliche Abrieb und Abnutzung von Teilen (z. B. Polsterung, Räder) fallen nicht unter die Garantie.
- Der Hersteller warnt davor, Garantiereparaturen in nicht autorisierten Serviceeinrichtungen durchzuführen. Eine solche Reparatur oder willkürliche Modifikation des Rollators erlischt die Garantie.
- **Die Garantiekarte ist gültig, vorausgesetzt, sie enthält: das Verkaufsdatum, bestätigt durch das Firmensiegel des Verkäufers, die Unterschrift des Verkäufers, den Typ und die Seriennummer des Rollators.**
- Die Garantiekarte ist gültig, sofern sie keine Löschungen und Korrekturen enthält.
- Der Hersteller des Rollators bietet in seiner Zentrale einen kostenpflichtigen Service nach der Garantie an.
- Der Hersteller legt die erwartete Nutzungsdauer des Produkts mit 4 Jahren fest. Eine weitere Nutzung nach diesem Zeitraum ist möglich, aber unter Berücksichtigung der Sicherheit und des Gebrauchskomforts empfehlen wir eine technische Inspektion durch den Hersteller oder ein autorisiertes Servicezentrum. Der Inspektionsdienst ist kostenpflichtig und umfasst eine Bewertung des technischen Zustands des Geräts, Sicherheitsüberprüfungen sowie notwendige Wartungsmaßnahmen.
- In Angelegenheiten, die nicht durch diese Garantiekarte geregelt sind, gelten die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches (Polen).
- Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Schadensfällen im Rahmen der Garantie oder Gewährleistung des Rollators sollten an den Verkäufer gerichtet werden.

23. NOTIZEN